

## ポルジェ 泌尿器用カテーテル（ウロダイナミック検査用カテーテル）

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

尿流動態検査の禁忌・禁止事項と同じ

#### 使用方法

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止


#### 適用対象（患者）

1. 本品の材質に対し過敏症のある患者に使用しないでください。

### 【形状・構造及び原理等】

材質：ポリ塩化ビニル、ネオプレックス


#### 膀胱内圧測定用 2way ストレート（AH50）

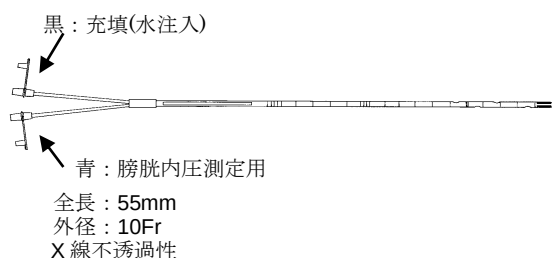


#### 膀胱内圧及び尿道圧測定用 2way ストレート（AH51）



#### 膀胱内圧及び尿道圧測定用 3way ストレート（AH53）

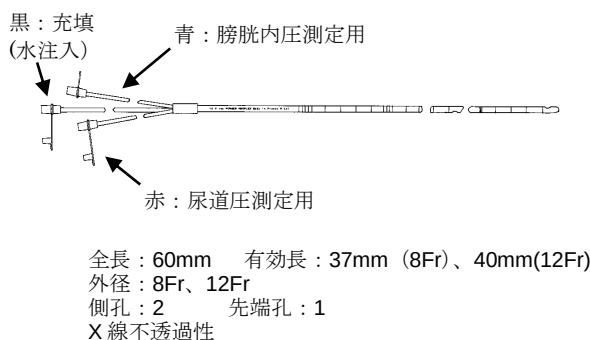

#### 膀胱内圧及び尿道圧測定用 2way クッティチップ（AH42）

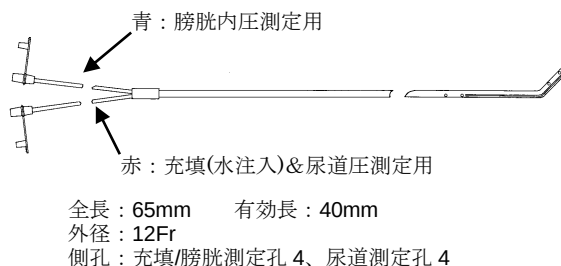

### 【使用目的又は効果】

本品は滅菌済み製品であり、そのまま直ちに使用できます。

### 【使用方法等】

#### ＜接続＞

1. 測定チャンネルを次のとおり測定装置のセンサーに接続します。
  - －青いコネクタ：膀胱内圧
  - －赤いコネクタ：尿道圧
  - －黒いコネクタ：充填用専用の充填チャンネルがない場合、通常は、尿道圧チャンネル(赤いコネクタ)を使用して充填を行います。

#### ＜測定及び気泡除去＞

2. チャンネルから気泡を全て取り除いてください。
3. 尿道口と同じ高さの位置でカテーテル先端を水平にして、カテーテル挿入前に装置のゼロ設定を行います。
4. 測定終了後、カテーテルを抜去します。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- ・ 単回使用製品の再使用は患者のリスクを高める可能性があります。
- ・ 再処理、掃除、消毒、および滅菌は、患者への身体的危害や感染などの追加リスク及び製品の品質を保持できない可能性があります。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保存してください。
2. 使用の期限  
直接の包装及び外箱を参照してください（自己認証による）。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：コロプラスト株式会社

住 所：〒102-0074 東京都千代田区九段南  
2-1-30 イタリア文化会館ビル

製 造 国 名：デンマーク

製 造 業 者：Coloplast A/S（コロプラスト社）

