

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル JMDN コード: 70263000

「ドルミヤ No-Tip, N. stone」の付属品

Touhy Borst ルアーコネクタ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. **使用方法**
再使用禁止、再滅菌禁止
2. **適用対象（患者）**
本品の材質に対するアレルギーのある患者

*【形状・構造及び原理等】

ルアーコネクタ

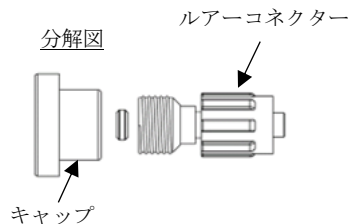

材質：ポリカーボネート、アクリル樹脂、シリコンゴム
内視鏡との接続に使用するコネクタ

【使用目的又は効果】

本品は、尿路結石の摘出、体外衝撃波結石破碎術等による結石破碎後の残石除去、結石破碎時の結石移動防止又は尿路、腎からの異物の除去等を目的に、体内に挿入する。
(ドルミヤ No-Tip, N. stone)

【使用方法等】

*準備

1. 本品は開いた状態で出荷されます。
2. 本品は無菌環境下でご使用ください。
3. ルアーコネクタが適切に開くことを確認してください。
4. キャップにより、開口範囲を調整することができます。
5. Tuohy Borst アダプターは、内視鏡のワーキングチャンネルを通過する機材で使用可能です。

装着

1. 本品のルアーポートを内視鏡のワーキングチャンネルに取り付けてください（時計回りに回します）。
2. 本品が所定の位置にあることを確認します。
3. 必要に応じて再調整してください。
4. ガイドワイヤー、バスケットカテーテル、レーザーファイバーなどの機材を本品に挿入し、機材を前進/位置決めしてください。
5. 機材を挿入した後、キャップを時計回りに回せなくなるまで回し、機材を希望の位置で固定させてください。
6. 液漏れがないことを確認してください。
7. 挿入した機材を軽く引っ張り、固定されていることを確認してください。

注意：本品の内腔が狭窄し、挿入した機材が損傷する可能性があるため、キャップを締めすぎないでください。

使用

1. 手術の手技に応じて接続部を調整してください。
 2. 必要に応じてキャップを緩め（反時計回りに回す）、機材を移動させ、機材の位置を調整する。
 3. その後、上記装着の手順 5 からを繰り返します。
- 注意：一度本品を通して最終位置にセットした機材は、再ポジショニングを避けることをお勧めします。

*交換/取り外し

1. キャップを反時計回りに回して緩めてください。
2. 慎重に機材（バスケットカテーテル、レーザーファイバーなど）を取り外してください。
3. 残った灌流液を排出してください。
4. 本品を内視鏡のワーキングチャンネルから外してください。
5. 本品を抜き取り、その完全性を確認してください。

【使用上の注意】

1. **重要な基本的注意**
 - ・ 本品は内視鏡操作以外では使用できません。
 - ・ 単回使用製品の再使用は、患者へのリスクを高める可能性があります。
 - ・ 再処理、洗浄、消毒及び滅菌は、患者への身体的危害や感染などの追加リスク及び製品の品質を保持できない可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

1. **保管方法**
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保存してください。
2. **有効期間・使用の期限**
直接の包装及び外箱を参照してください。（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

コロプラスト株式会社

住所：東京都千代田区九段南 2-1-30

イタリア文化会館ビル

製造業者

Coloplast A/S（コロプラスト社）

国名：デンマーク



**販売業者

**株式会社キースマック

**住所：東京都千代田区神田猿樂町 2-2-8

**電話番号：03-3292-2506

**FAX 番号：03-3292-2507