

医療用品 04 整形用品
高度管理医療機器 気管食道用スピーチバルブ 36245000
プロヴォックス Vega
（一般医療機器 整形外科用テープ 32882000）

プロヴォックス ライフ アドヒーズブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

適用対象

- ・ 本品は、意識レベルの低い患者、腕や手を動かすことができず、装置を自分で外すことができない患者には使用することはできない。
- ・ 過敏な肌、又は傷のある肌へは使用しない。
- ・ 本品を皮膚アレルギーの既往歴のある患者には使用しない。
- ・ 本品の使用により肌に刺激や発赤、ただれなどの痛みを伴う炎症など異常を感じられた場合は、すぐに使用を止め、医師に相談すること。

併用医療機器

- ・ 本品は対応するHMEおよび付属品以外との組合せで使用しない。


使用方法

- ・ 初めて使用する場合は短時間の試用にとどめ、発赤などアレルギー症状が出ないことを確認すること。


【形状・構造及び原理等】


＜アドヒーズブの種類＞

円形、楕円形、大型の製品にはそれぞれ素材の異なる普通肌用と敏感肌用の2種類があります。形状、サイズの違いは以下のとおり。

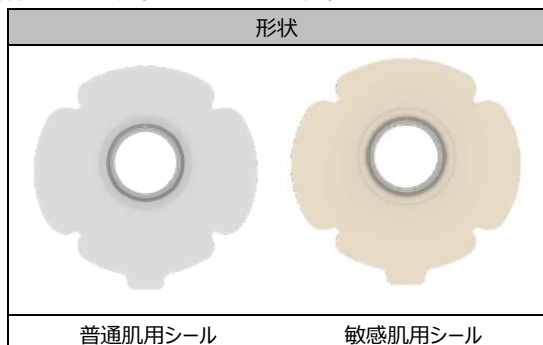

円形・楕円形・大型の大きさ・形状の違い

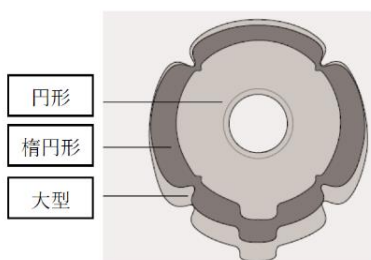

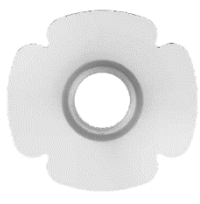	形状
ナイト用シール	
	ナイトHMEを装着するためのアドヒーズブ

特殊型

強化型シール	
	気管孔が深い患者、気管孔付近に大きな凹凸（胸鎖乳突筋）があって貼付が難しい患者用

＜原材料＞

アクリル系粘着剤、ハイドロコロイド系粘着剤、ハイドロゲル系粘着剤、エチレンブチルアクリレート共重合体、プラスチックフィルム

【使用目的又は効果】

本品はプロヴォックス ライフ HMEを永久気管孔に固定するプラスチック製の接着テープとして使用する。

【使用方法等】

プロヴォックス ライフ アドヒーズブは、咽頭全摘出術後にプロヴォックス ライフ HMEとアクセサリを貼付するための単回使用の装着用テープです。

＜本品の貼り方＞

1. 洗浄

プロヴォックス クリーニングタオル（別売）やせっけん和水を使用して必ず皮膚を洗浄し、本品を使用する前に皮膚を乾燥させてください。

2. 準備と塗布


必要に応じて、本品を貼る前に、プロヴォックス スキンバリア（別売）またはプロヴォックス シリコングルー（別売）を使用してください。（ナイト用シールにはスキンバリア及びシリコングルーを使用しない）

- ・ 永久気管孔周辺の皮膚に本品を貼ります。
- ・ 本品を優しく揉みこみます。
- ・ HME を取り付けます。
- ・ 接着力を向上させるために話す前に少なくとも 5 分間待ちます。

3. 剥がし方


つまむ部分のタブを使って本品をゆっくりと剥がします。

【普通肌用シール、敏感肌用シールの貼り方】

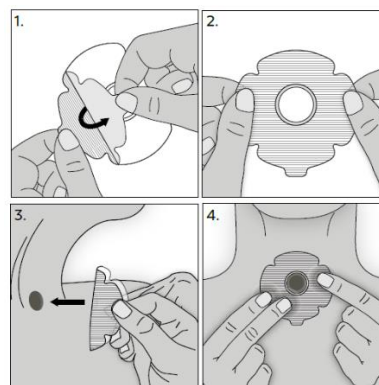


取扱説明書を必ずご参照下さい。

【強化型シールの貼り方】

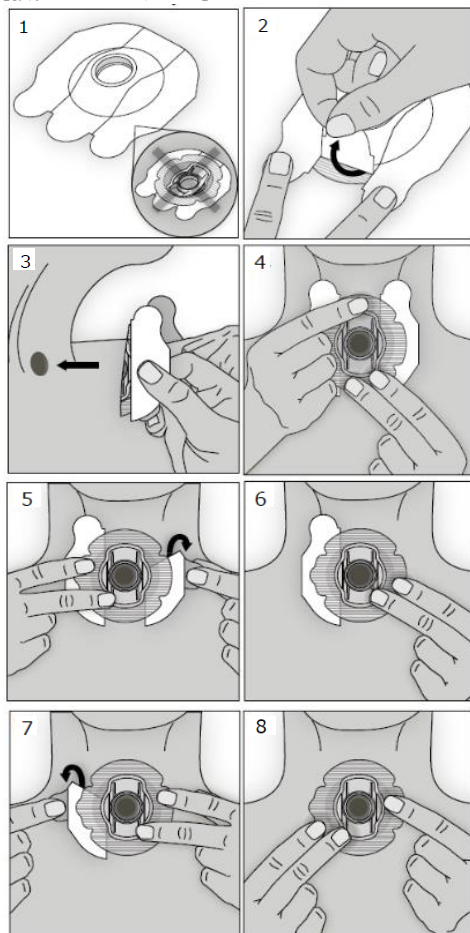

【ナイト用シールの貼り方】

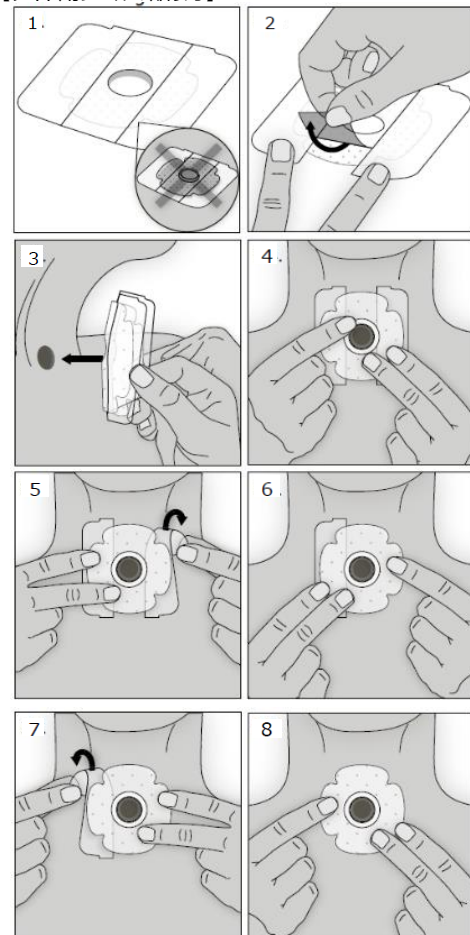

プロヴォックス ライフ ナイト用アドヒージブに関する説明：

- ・プロヴォックス スキンバリアおよびプロヴォックス シリコングルーは使用できません。
- ・プロヴォックス ライフ ナイト用アドヒージブをゆっくりと剥がします。水を使用すると本品を剥がしやすくなります。

使用方法に関連する使用上の注意

- 本品により皮膚を刺激する場合がある。皮膚炎を発症した場合には、本品の使用を中止し担当医に相談すること。
- 敏感肌用 アドヒージブおよびナイト用 アドヒージブは炎症した皮膚にも使用可能であるが、皮膚の炎症が14日間を超えて続く場合は、本品の使用を中止して担当医に相談すること。
- 皮膚に付着した粘着剤を拭き取る際は、気管孔に埃や液体が入らないようにすること。
- 本品を貼付してシャワーを浴びる場合は、プロヴォックス ライフ シャワーエイドを使用すること。
- 放射線治療で放射線が当たる位置に本品を貼っているときは、照射前に剥がすこと。肌の状態が悪化する可能性がある等の理由により、本品を剥がせない場合は、治療開始から終了までの全過程において、照射部位の皮膚に過度の炎症などがないか定期的に観察すること。
- 敏感肌用アドヒージブ、ナイト用アドヒージブ使用中に咳をした時は、必ず粘液を取り除くこと。（体液を吸収すると白く膨らみ接着性能が低下するため）。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・ 高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・ 傾斜、振動、衝撃等のない安定した場所で保管してください。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管してください。

<使用期間>

- ・ 本品は汚れたり、空気が漏れ始めたりしたら（貼りつけたときの気密性がなくなったら）交換してください。

<有効期間（未開封状態）>

- ・ 本品の外箱に記載されている表示をご確認ください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：コロプラスト株式会社

住所：東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル

TEL：03-3514-4141

製造業者：ATOS Medical AB（スウェーデン）