

**2017 年 11 月（第 6 版 新記載要領に基づく改訂）

* 2010 年 3 月 31 日改訂（第 5 版）

類別：機械器具（06）呼吸補助器
管理医療機器 *一般的名称：空気・酸素マスク（JMDN コード：35171000）
フェイス Tent


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 本品は医療用酸素ガスの投与に使用するための医療器具です。他の目的には使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

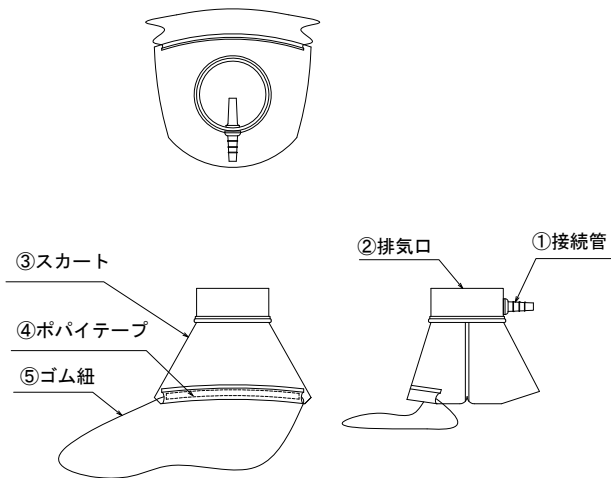

2. 寸法、質量

- ・ 寸法：110 mm (H) × 130 mm (W) × 95 mm (D)
- ・ 質量：約 25 g
- ・ ゴム紐の長さ：550 mm（ノーマルタイプ）
650 mm（ロングタイプ）

3. 原理

接続管より導入された酸素ガスに、排気口から取り入れられた空気と混合し、任意の酸素ガスに調整する。

****【使用目的又は効果】**

1. 使用目的

フェイス Tent は、若干酸素ガスを要する患者の鼻と口に設置して使用するマスクで、酸素流量計から流量調整された酸素ガスに、空気を混合することで最低 23% から最高 40% の酸素濃度に調整し、患者に投与する。
また、前面に約 6cm の開口部があるため、呼吸抵抗がなく、炭酸ガスの蓄積もない。

****【使用方法等】**

- (1) ①接続管へ酸素流量計からの酸素導入チューブを接続する。
- (2) ③スカーフ上に記載されている“フェイス Tent”の文字を上にして鼻と口を覆い、⑤ゴム紐を後頭部に廻してかぶせる。
- (3) 顔とフェイス Tent の隙間ができないように④ポパイテープを鼻の形に合わせ曲げる。
- (4) ⑤ゴム紐の位置や長さを調節し、フェイス Tent を顔にピッタリさせる。
- (5) 医師の指示により、酸素流量計の流量を設定し、酸素ガスの投与を開始する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ 使用中、患者の状態に異常がないか常に留意すること。
- ・ 本品を使用する場合は、医師の処方に従ってください。
- ・ 単回使用のため、患者ごとに交換すること。又、再使用せずに、医療機関の規定に従い、適切な方法で廃棄すること。
- ・ 本品を使用する前に、破れ等の異常がないことを目視にて確認すること。
- ・ 接続管に酸素導入チューブがしっかりと接続されているか確認すること。
- ・ 酸素ガスの投与を始める前に、接続管の口より酸素ガスが出ていることを確認し使用すること。

****【保管方法及び有効期間等】**

****1. 保管方法**

保管場所の条件としては、水のかからない場所、温度・湿度・風通し・日光・ほこり・塩分・イオウ分等を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所、及び化学薬品の保管場所やガスの発生しない場所とする。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

1. 製造販売業者

小松精機株式会社
住所：〒781-5101 高知県高知市布師田 3976 番地 4
TEL：088-846-0313

2. 製造業者

小松精機株式会社 高知工場

発売元

エア・ウォーター株式会社
住所：東京都港区虎ノ門 3 丁目 18 番 19 号
TEL：03-3578-7810