

機械器具 39 医療用鉗子
管理医療機器 単回使用鉗子 10861002

スプリングクリップ

再使用禁止


*【禁忌・禁止】

- 1.再滅菌禁止
- 2.再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

本品は、臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる小型クリップである。専用のアプリケーター「販売名:アプリケーター 届出番号:13B1X00094000002」への装着方法の違いにより、スタンダードタイプとステルスタイプがある。形状の違いにより以下の種類がある。

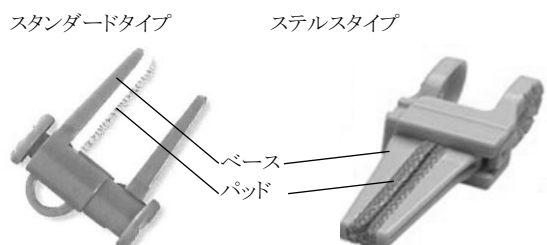

<パッドの特長>

- ・ラティス
表面のメッシュ部が多方向に編みこまれており、把持力に優れている。
- ・フィブラ
圧力を分散し不規則な組織を確実に把持出来るよう工夫している。
- ・ソフト
組織へのダメージを軽減できるように工夫し、遮断時のずれを防止する為にパッド部表面に波、突起の加工をしている。

スタンダードタイプ		
品番	開口幅(mm)	ジョウ組み合わせ
G-6050	6	ソフト/フィブラ
G-6052	6	ソフト/フィブラ
G-6054	6	ソフト/フィブラ
G-6000	6	ダブルソフト
G-1200	12	ダブルソフト
A1801	6	ダブルソフト
ステルスタイプ		
A1601	6	ラティス/ラティス
A1602	6	ラティス/ラティス
A1603	6	ラティス/ラティス
A1654	6	ソフト/フィブラ

2.原材料

接触部分	原材料
本体	PC/ABS 樹脂、ポリカーボネート、スチレン-エチレン/ブチレン-スチレンブロック共重合体、ナイロン、ポリエステル繊維
接着剤	シアノアクリレート

3. 原理


本品は、主にベース部とパッド部から構成される。スプリングの力を利用して血管等へ取り付け・取り外しができる。パッド部はベース上に付属する緩衝材として機能する。

【使用目的又は効果】

組織等を把持、圧迫又は支持するために用いる。

【使用方法等】

- 1.本品を指で強く握って開く。
- 2.把持する組織や血管上に置き、ゆっくりと離す。
- 3.外す時は、1.と同様に、組織や血管より取り出す。
- 4.深部の組織や血管を把持する時等、指が入らない所では、専用のアプリケーター「販売名:アプリケーター 届出番号:13B1X00094000002」を使用する。
- 5.アプリケーターの先端にある突起部をクリップの適切な溝にはめ込み、角度を調整する。アプリケーターをゆっくりと緩めると、クリップがゆっくりと閉じる。

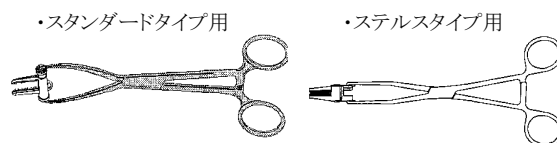

*【使用上の注意】

- 1.不具合・有害事象
(1)重大な有害事象
血管を遮断する際に、以下のような有害事象の可能性がある。
 - 1)局所血腫
 - 2)局所外傷
 - 3)内膜破壊
 - 4)血栓
 - 5)塞栓動脈硬化性プラーク
 - 6)血管の痙攣

*【保管方法及び有効期間等】

- 1.保管の条件
本品は、直射日光を避け乾燥した場所で、保管すること。
- 2.有効期間
有効期間は自己認証による。使用期限は包装容器に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : コスモテック株式会社
電話番号 : 03-5802-3830(代)
製造業者 : アプライドメディカルリソース社
(Applied Medical Resources Corporation)
製造業者の国名 : アメリカ合衆国