

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 四肢画像診断・放射線治療用患者体位固定具 40900000

ベンリーパッド

【警告】


不安定な場所で使用しないこと。[患者の転倒・転落事故に繋がる。]

【禁忌・禁止】

- 患部に外傷等がある患者には、本品を当該部位に使用しない。[感染症や炎症の原因となる。]
- 本品を火気に近づけない。[発火、引火の恐れがある。]
- 鋭利な刃物や突起物等のそばでは使用しない。[構成材である外袋が破損すると形状が保持できない。]
- オートクレーブ滅菌はしない。[破損する。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

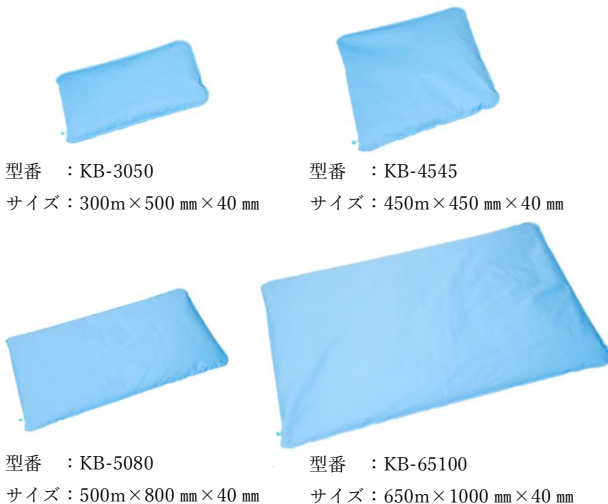

型番 : KB-3050

サイズ : 300mm×500mm×40mm

型番 : KB-4545

サイズ : 450mm×450mm×40mm

型番 : KB-5080

サイズ : 500mm×800mm×40mm

型番 : KB-65100

サイズ : 650mm×1000mm×40mm

2. 原材料

外 袋 : ポリエステル・ポリウレタン

脱気口 : ポリアセタール樹脂・ニトリルゴム

中 材 : 発泡ポリスチレン

3. 原理

本品内部の空気を抜くと、内部の空気が減少し、中材の発泡ポリスチレンビーズ（以降、ビーズ）が互いに密着することでビーズの動きが抑制され固定できる。

【使用目的又は効果】

画像診断、画像支援下での手術、インターベンション法、又は放射線治療の場合に患部を固定し適切に位置決めする。

【使用方法等】

- 柔軟化した本品を平らな手術台や検査台の上に置き、患部を当該位置に合わせるように患者を誘導する。
- 専用ポンプで本品内部の空気を抜き、患部を固定する。
- エックス線検査及び手術手技を行なう。
- 患部の位置調整や他の患部の位置決めを行なう場合は、空気を入れて本品を柔らかくし、再度本品内部の空気を抜くことで固定できる。

【使用上の注意】

重要な基本的事項

- 使用前に外観に異常がないか確認する。本品の繰り返しの使用による中材の劣化に伴い、固定保持力及びその持続性の確保ができなくなる場合がある。
- 本品は未滅菌であるため、感染の可能性が考えられる場合には滅菌済みの不織布等を取り付けて、患者に直接触れないように注意する。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
使用後は柔軟化した状態で高温多湿、直射日光を避けて適切ところで保管する。
- 有効期間
固定状態が保持できない、固定状態を長く保てない、中材のビーズが縮小し本品の厚みが薄くなってきた等の兆候があれば本品の劣化が考えられる。

【保守・点検に係る事項】

- 本品に穴あきや破損が確認された場合は使用を中止すること。
- 固定状態が保持できない場合は使用を中止すること。

【取扱い上の注意】

- 本品を洗浄する場合は、使用説明書を読み、内部に水分等が侵入しないように注意すること。
- 汚れた場合は水道水で洗浄すること。
- 血液、消毒剤等で汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使いスポンジ等でこする。塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないこと。
- 洗濯時に長く漬け置いたり、洗った後に濡れたまま放置すると色落ちや移染する可能性があるので注意すること。
- 洗浄後は水気をきり陰干しすること。
- アイロンがけは生地を傷めるため絶対にしないこと。
- 洗濯機、脱水機、乾燥機、ドライクリーニングは色落ち、移染及び破損の恐れがあるため絶対に使用しないこと。

【包装】

1 個／袋

【主要文献及び文献請求先】

神戸バイオメディクス株式会社

兵庫県神戸市長田区長者町 17-3/078-647-8347

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

神戸バイオメディクス株式会社

兵庫県神戸市長田区長者町 17-3/078-647-8347

製造業者

テクノライフジャパン株式会社

兵庫県神戸市西区宮下 1 丁目 4-3/078-939-3725

総販売元

東レ・メディカル株式会社