

機械器具（51） 医療用尿管及び体液誘導管
管理医療機器 間欠泌尿器用カテーテル JMDN コード：36125000

ジェントルカテ Air 女性用


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用及び再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

本品は親水性コーティングされたエラストマー製のカテーテルであり、滅菌精製水が充填されたケースに入っている。

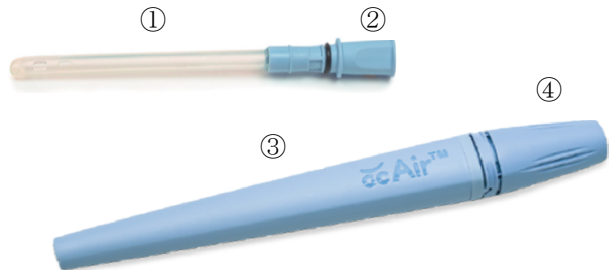

番号	名 称	原 材 料 名
①	カテーテル	親水性ポリオレフィン系エラストマー
②	ファネル	ポリエチレン エチレンビニルアセテート エチレンプロピレンゴム
③	ケース	ポリプロピレン エチレンプロピレンゴム
	充填液	滅菌精製水
④	キャップ	ポリプロピレン

規格

カテーテルの有効長：89.8mm

ファネルとカテーテルを加えた全長：13.5cm

外径タイプ（CH/Fr）	外径(mm)
10	3.3
12	4.0
14	4.7

2. 機能及び動作原理

本品は、導尿、採尿等を行うためのカテーテルであり、親水性素材を使用しているため、滅菌精製水に触れることで表面が潤滑になり、尿道口から挿入する際になめらかに尿道を進ませることができる。


【使用目的又は効果】

本品は、膀胱に一時的に挿入し、導尿、採尿等を行うためのカテーテルである。

【使用方法等】

本品は滅菌品であり、単回使用製品のため再使用を禁止する。


- 1) 使用前に手を洗い清潔にし、必要に応じて手袋を着用する。
- 2) 尿道口及びその周辺を消毒する。
- 3) ケースのキャップ部分を回して開封する。

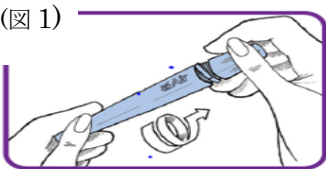


- 4) 外したキャップは、紛失を防ぐためにケースの底側へ取り付けることができる。




- 5) ファネルを持ち、ケースからカテーテルを取り出す。カテーテルには直接手が触れないようにする。

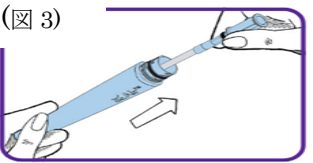

- 6) ファネルを持ち、尿が流出し始めるまで、カテーテルをゆっくり尿道に挿入する。
片手で陰唇を左右に広げ、上方に持ち上げると尿道口が見えるようになる。

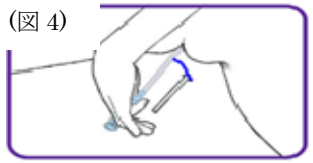

- 7) 尿が流出し始めたら、ファネルを 1～2cm 押して、カテーテルを膀胱内に確実に挿入する。

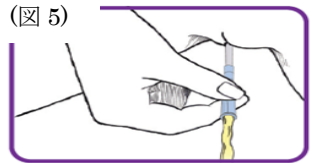

- 8) 膀胱を完全に空にするため、カテーテルをゆっくり抜去し、尿がさらに流出し始めたら手を止める。尿が流出しなくなったらカテーテルをゆっくり最後まで抜去する。



- 9) 排尿バッグを使用している場合は、バッグをファネルから取り外し、空にして廃棄する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品を在宅等で患者若しくは家族が使用する場合には、本品の使用方法及び使用上の注意について医療従事者が指

導を行うこと。

- 2) 膀胱洗浄または膀胱内注入と同時に使用しないこと。
- 3) 本品又は本品の構成成分に過敏な患者又はアレルギー反応を有する患者には使用しないこと。
- 4) 粘膜を損傷する恐れがあるため、カテーテルを無理に挿入や抜去しないこと。
- 5) 尿が流出しない場合又は他の合併症（痛み、挿入又は抜去困難、出血、尿路感染症の徴候又は分泌物）が発生したときは速やかに使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 6) ケースから出した後、速やかにカテーテルを使用すること。

2. その他の注意

- 1) 本品は再使用及び再利用禁止であり、交差感染リスクがあるため、複数の患者に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：直射日光及び多湿、凍結を避けて保管すること。

使用期間：外箱 Exp 参照（自己認証による）

【主要文献及び文献請求先】

コンバテックジャパン株式会社

電話番号：0120-532384

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

コンバテック ジャパン株式会社

 0120-532384

製造元：ConvaTec Limited

コンバテックリミテッド
英国