

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 鼻用洗浄器 41599000

ナバージ ノーズクリーナー

【警告】

同一のナバージ ノーズクリーナーを複数人で共用しないでください。
【感染する可能性があるため】

【禁忌・禁止】

以下の症状がみられる場合は使用しないこと。


- 鼻腔の天井又は頭蓋底が損傷している。
- 軟口蓋が麻痺している。
- 鼻血が出ている。

本品は鼻洗浄以外の目的で使用しないでください。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

分解組立図

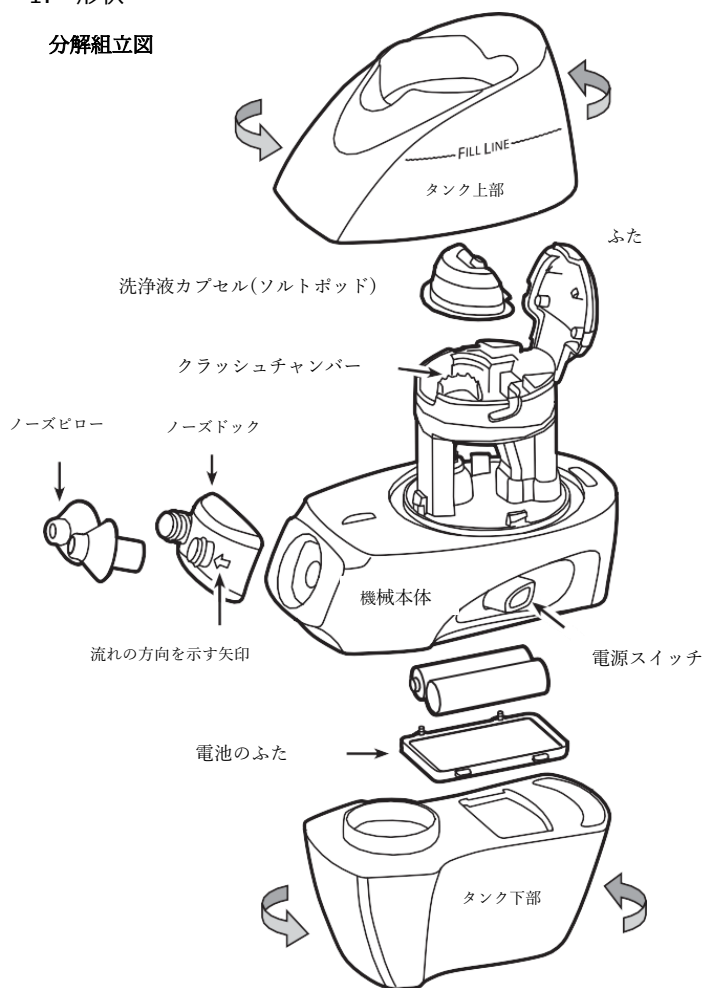

2. 原材料、成分

本体装置: タンク: コポリエステル、本体: ABS 樹脂
ノーズドック: ABS 樹脂
ノーズビロー: シリコンボム カプセル: ポリエチレン
洗浄液: 精製塩 + 精製水

3. 原理

本体装置への電源供給により、タンク上部に充填された洗浄液が一方のノーズビローから一方の鼻腔に流れ込み、鼻腔内の粘膜、鼻の通路を洗浄し、もう一方の鼻腔からタンク下部に流れ込みます。

【使用目的又は効果】

本品は、鼻洗浄液を直接鼻腔に適用するために用います。鼻の内腔から注入し、粘膜及び鼻の通路を洗浄及び加湿する洗浄液を充填します。

【使用方法等】

1. 温水をタンク上部の FULL LINE の線までいれます。
2. 洗浄液カプセル(ソルトポッド)を本体のクラッシュチャンバー (分解図参照)に入れます。
3. フタをカチットと音がするまでしっかり閉めます。
4. 本体を 1～2 秒間静かに振って、温水と洗浄液を混ぜ合わせます。
5. ノーズビローに少量の水をかけ、鼻孔に滑り込ませやすくします。
6. ノーズビローを両方の鼻孔に挿入します。ノーズドックにある矢印は洗浄液の流れる方向を示しています。洗浄液は、一方のノーズビローから鼻に入り、もう一方のノーズビローから出てきます。
7. 本体にある電源ボタンをしっかりと押し込みます。ポンプが始動します。排水バルブが開き、洗浄液がタンク上部から一方の鼻孔に流れ込み、鼻の後ろの周りを経て、もう一方の鼻孔からタンク下部に流れ込みます。
8. タンク上部が空になると、洗浄が終了します。終了したら、電源ボタンを離し、ノーズビローを鼻孔から取り外します。タンク下部をねじって本体から離し、空にします。

【使用上の注意】

1. ノーズビローを鼻孔に挿入するとき、先端が鼻の壁に当たらないように注意し、鼻孔の中央の位置に来るようにします。
2. ノーズビローを鼻孔にしっかり押し込み、漏れないようにします。洗浄液の流出が始まれば、流量を適量にするため、ノーズビローを少し後ろに下げます。ノーズビローを強く押し込みすぎて、先端が鼻腔の壁に当たった状態ですと、吸引力が低下又はストップし、洗浄液が喉に流れたり、流れが遅くなったり、あるいは止まったりする可能性がありますので、ノーズビローをほんの少し後ろに下げてください。
3. 鼻洗浄中の姿勢は、頭を水平に保ち、前を向いて、腰をかがめず、まっすぐ立ってください。洗浄中は口から普通に呼吸します。
4. 少量の洗浄液が鼻に残った場合は、頭を前に傾け、そっと鼻をかんてください。
5. ナバージ ノーズクリーナーで鼻洗浄を行う場合には、必ず専用の洗浄液カプセル(ソルトポッド)を使用してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄方法等
使用後、分解し、各パーツを洗浄します。
バッテリー室がある本体以外は、温かい流水で洗浄できます。食器用洗剤も使用できます。本体外面は湿った布で拭いてください。ノーズビロー、ノーズドック、本体内部(排水パイプ等)は付属のスワップで掃除してください。
2. 点検
1) モーターが低いピッチで作動している、または吸引力が落ちていないと感じた場合は、電池の交換時期です。
バッテリー室のネジをプラスドライバーで外し、フタを開け、新しい単三電池に交換します。
- 2) 使用前に各パーツに破損、変形、変色等の損傷がないか、各接続部がしっかり接続されているか 確認します。

【保管方法及び有効期間等】

1. 次の鼻洗浄まで 清潔で乾燥した埃のない環境で保管してください。
2. 十分な乾燥を行うため、タンク上部とタンク下部は本体から分離して、保管してください。

【備考】

付属の洗浄液カプセル(ソルトポッド)がなくなれば別売りのソルトポッドをご購入ください。

【製造販売業者の名称等】

製造販売業者: コビュー・ジャパン株式会社
TEL: 050-8881-2699
www.covue.com
お問い合わせ先: 0120-966-276