


医 05 副木
一般医療機器 成形副木 35354000
PLEXFIT 2.0 アームスリング

【禁忌・禁止】

- 以下の場合には装着前に医師に相談すること。
- 1. 本製品の装着部位に皮膚の疾患/疾病、特に炎症が見られる場合、同様に、腫れが伴い、傷が隆起している場合、または赤みや過度の発熱が見られる場合。
 - 2. 損傷部位に知覚障害または循環障害がある場合。
 - 3. リンパ機能に障害がある場合（装着部から離れた部位でも軟部組織の浮腫がある場合も含む）。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造

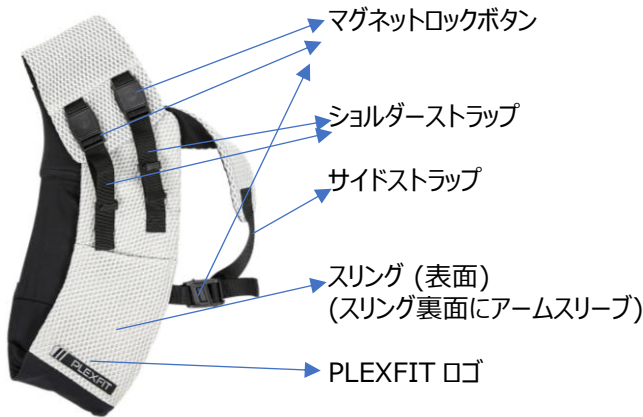

2. 寸法等

● 大人用 (右腕用 & 左腕用)

サイズ	XXL	XL	L	M
胸回り	135 ~ 150cm	109 ~ 135cm	89 ~ 109cm	61 ~ 89cm

● 子供用 (右腕用 & 左腕用)

サイズ	S
腕の長さ (肩から指先まで)	59 ~ 74cm
胸回り	42 ~ 63cm

3. 原材料

材質
マグネットロックボタン: ネオジウム磁石 + POM (ハウジング)
ショルダーストラップ & サイドストラップ: ナイロン
スリング: ポリエステル

4. 原理

損傷した腕、肘を本製品のアームスリーブに挿入し、肩から吊り下げて固定する。

【使用目的又は効果】

損傷した腕、肘を固定するために使用する。

【使用方法】



サイドストラップのマグネットロックボタンを押して、サイドストラップのロックを解除します。
ショルダーストラップの二つのマグネットロックボタンはロックしたままで、ストラップの長さは出来るだけ長くしておきます。



負傷した腕をスリング裏面のアームスリーブに手のひらを上にし、慎重に入れます。



スリングを頭の上を通して肩にかけ、スリングの AVALANCHE ロゴが背中に来るように調整し、腕を快適にフィットさせるようにします。



サイドストラップを脇に回し、マグネットロックボタンで留めます。



ショルダーストラップとサイドストラップを引いて、フィット感を調整します。



ストラップを背中の真ん中、肩の下あたりに来るよう調整します。

医 05 副木
一般医療機器 成形副木 35354000
PLEXFIT 2.0 アームスリング

【使用上の注意】

1. 本製品と他の製品を併用する場合は、医師へ相談してください。
2. 本製品は装着者の活動中に効果を発揮するため、就寝中等長時間使用しない場合は取り外してください。
3. 万一、症状の悪化などの異常に気付いた場合は、直ちに使用を中止し、医師へ相談してください。
4. 軟膏、ローション、グリースや酸を含む液体が製品に付着しないよう注意してください。
5. 本製品の改造は禁止します。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗濯の際は中性洗剤を使用して 50 度以下のお湯又は水で行ってください。
2. 漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
3. タンブラー乾燥はしないでください。
4. アイロンはかけないでください。
5. ドライクリーニングは行わないでください。

【製造販売業者及び製造業者の名称等】

製造販売業者: コビュー・ジャパン株式会社
www.covue.com

製造業者: BODYNITS TIEN GIANG COMPANY LIMITED
Hamlet 6, Phu An commune, Cai Lay District, Tien Giang Province, Viet Nam