

副木

一般医療機器 腱膜瘤防護具 13565000

おやゆび想い
母趾用SOX

【警告】

1. 以下の患者には予想されるリスクを勘案して、治療効果がリ
スクを上回ると判断した上で慎重に使用してください。
○繊維に対して過敏症のある患者。
【接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。】

【禁忌・禁止】

- 1) サイズ表範囲内に無い患者。
【各部位に過剰、過少な圧がかかるとなり、本品の効
果が発揮されないおそれがあるため。】

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

本品は糸が筒状に成型された形状の足袋型の靴下に親指基
底部にパッドを設け腱膜瘤を防護するものである。

2. 組成

綿、ポリウレタン、ナイロン、ゴム

3. 製品の種類及びサイズ

種類：足袋型靴下タイプ

カラー：黒、白、ベージュ

サイズ：22～23cm、23～24cm、24～25cm、25～26cm、
26～27cm、27～28cm

機能を発揮するにはご自分に合ったサイズをお選びください。
足幅の広い方や甲の高い方は1サイズ大きいくつ下をお選びくだ
さい。

— サイズは内側のラインの色で確認してください



サイズ別内側色

白	グレー	黒	茶	コン	ベージュ
22～ 23cm	23～ 24cm	24～ 25cm	25～ 26cm	26～ 27cm	27～ 28cm

【使用目的、効能又は効果】


腱膜瘤を防護する。靴等の履物と接触する腱膜瘤をパッドによ
り接触状態を減す。

【品目仕様等】


本品は、適用範囲内の人に対して、布製のパッドを設けた足袋
型の靴下で着用することで腱膜瘤を防護する。

【操作方法又は使用方法等】


〈着用方法〉

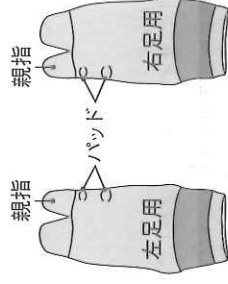


- ①左足用、右足用を確認します。
パッド(手で触ると分かる突起
物)がある方が親指側です。

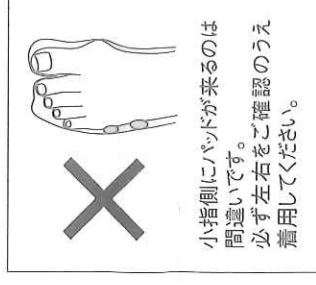


小指側にパッドが来るのは
間違いです。
必ず左右をご確認のうえ
着用してください。

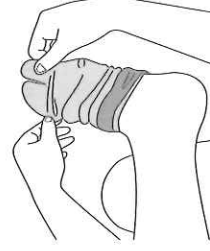

- ②親指とその他の指の指の位置を合
わせ整えます

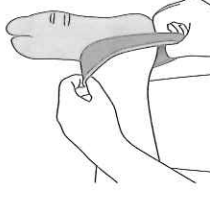

- ③履き口を広げゆっくりと履か
せます。

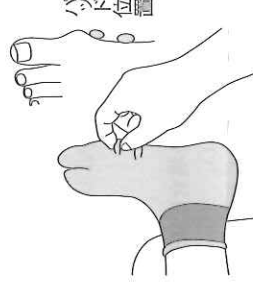

- ④前の防護パッドが患部の後ろ
側にくるよう位置を調整し、
全体的に整えます。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) 包装にきずや破れが生じないように、取扱い及び保管に注意してください。
- 2) 本品は、高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所で保管してください。
- 3) 本品を施設内で保管し使用する場合には、在庫品は先入れ先出しを励行してください。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
 - 1) 術後等患者の意識レベルが低い場合及び患者との意思疎通が困難な場合には患者の状態をよく観察して使用してください。
 - 2) 本品の使用で、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、発赤、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
2. 重要な基本的注意
 - 1) 適正な効果を得るため、正しいサイズの本品を選択してください。またサイズ適用外の場合には使用しないでください。
 - 2) 装着するときは少しずつ引き上げてください。強く引く張り上げると破損(伝線、ほつれ、破れ等)することがあります。
 - 3) 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周囲長が変わった場合は、適切なサイズに変更してください。
 - 4) 靴下及びパッドをはきみて切る等加工、修理を行わないでください。
 - 5) 本品は個人用の製品であり、他人への使いまわしはしないでください。

3. 相互作用

- 1) 軟膏等の薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化しますので付着しないよう注意してください。

4. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下の有害事象がおこる可能性があります。

1) 重大な有害事象

①血行障害

チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

②神経障害

腓骨神経麻痺等の神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

③皮膚障害

本品のずれ、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

2) その他の有害事象

本品装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれ等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。本品を脱いだ後で皮膚障害が現れる場合もありますので、同様に適切な処置を行ってください。

5. その他の注意

- 1) 本品に破損(伝線、ほつれ、破れ等)がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないでください。
- 2) 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損(伝線、ほつれ、破れ等)する場合がありますので注意してください。
 - ①爪が伸びていたり、反っていたりする足への着用
 - ②肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い
 - ③鋭利なものへの接触
- 3) 本品の着用での効果および効能には個人差があります。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 繰り返し使用する場合は、傷やほつれ、繊維の劣化等が無いことを確認してから使用してください。
- 2) 洗濯の際には、塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。
- 3) はきやすさを保つために中性洗剤・柔軟剤を使用し水か30℃位のお湯で必ず手洗いしてください。やむを得ず洗濯機をご使用の際は、必ずネットに入れて洗濯してください。
- 4) その他の取り扱い方法はパッケージの表示マークに従ってください。



※上記以外での洗濯は著しい収縮を招き靴下本来の機能を失いますので指定の洗濯を行ってください。

【包装】

1 足入り/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社コーポレーション パーパルス ター

第三種 医療機器製造販売業許可番号 34B3X10008

医療機器製造業登録番号 34BZ200022

〒739-2402

広島県広島市安芸津町三津4424番地

TEL 0846-45-0116

Fax 0846-45-0150

Email paristar@pastel.ocn.ne.jp