

副木

一般医療機器 腱膜瘤防護具 13565000

親指ラクパッド靴下
母趾用SOX

【警告】

本品の使用により、以下の有害事象がおこる可能性があります。

1) 重大な有害事象

① 血行障害

チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

② 神経障害

腓骨神経麻痺等の神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

③ 皮膚障害

本品のずれ、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

2) その他の有害事象

本品装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれ等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

【禁忌・禁止】

- 1) 現在強い痛みのある方、治療を受けている方、過去に治療を受けられていた方は、着用前に医師にご相談ください。
- 2) 本品を着用して強い痛みを感じられる場合は、着用をおやめください。

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

本品は糸が筒状に成型された形状の足袋型の靴下に親指基部にパッドを設け腱膜瘤を防護するものである。

2. 組成

本体：綿、ナイロン、ポリウレタン
パッド：ポリエステル

3. 製品の種類及びサイズ

種類：足袋型靴下タイプ

カラー：黒、ベージュ、白

サイズ：22～22.5cm、23～23.5cm、24～24.5cm
25～25.5cm、26～26.5cm、27～27.5cm

— サイズは内側のラインの色で確認してください

サイズ別内側色

白	グレー	黒	茶	コン	ベージュ
22～22.5cm	23～23.5cm	24～24.5cm	25～25.5cm	26～26.5cm	27～27.5cm



【使用目的、効能又は効果】


腱膜瘤を防護する。靴等の履物と接触する腱膜瘤をパッドにより接触状態を減らす。

【品目仕様等】

本品は、適用範囲内の人に対して、布製のパッドを設けた足袋型の靴下で着用することで腱膜瘤を防護する。

【使用方法等】


〈着用方法〉

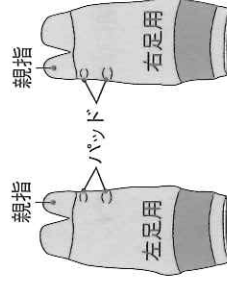

- ① 左足用、右足用を確認します。パッド(手で触ると分かる突起物)がある方が親指側です。




- ② 親指とその他の指の指の位置を合わせて整えます。

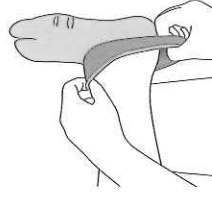

- ③ 履き口を広げゆっくりと履かせます。



- ④ 親指付け根側にある防護パッド(親指ラクパッド)が患部(腱膜瘤)の側面後方にくるよう位置を調整し、全体的に整えます。

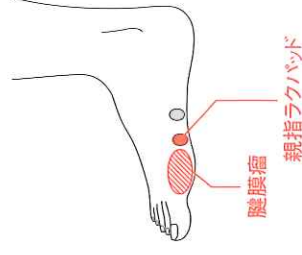

【保管方法及び商品の特徴等】


- 1) 本品は、高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所で保管してください。

【使用上の注意】

- 1) 適正な効果を得るため、正しいサイズの本品を選択してください。またサイズ適用外の場合には使用しないでください。
- 2) 装着するときは少しづつ引き上げてください。強く引っ張り上げると破損(伝線、ほつれ、破れ等)することがあります。
- 3) 初めのうちはパッドの当たる部分に多少の違和感や軽い痛みを感じられる場合があります。そのため、30分～1時間ほどの短時間から着用して徐々に慣らすようにしてください。
- 4) スニーカーやスリッポンなどゆとりがない靴の場合、パッドの当たりが強すぎ、パンプスなどゆとりの少ない靴の場合、濡れた状態でこすると色落ち・痛みを生じる場合があります。
- 5) 濃色の製品は素材の特性上、濡れた状態でこすると色落ち・色移りする場合があります。
- 6) 靴下及びパッドをばさみで切る等加工、修理を行わないでください。
- 7) 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損(伝線、ほつれ、破れ等)する場合がありますので注意してください。
 - ① 爪が伸びていたり、反っていたりする足への着用
 - ② 肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い
 - ③ 鋭利なものへの接触
- 8) 本品は指先を糸で縫い合わせているため、着用時に縫い目が開いて見えることがあります。
- 9) 本品の着用での効果および効能には個人差があります。


【お手入れ方法】

- 1) 30℃までのぬるま湯でネットに入れて洗濯機洗いでください。
- 2) 足当たりよく着用していただくために、柔軟仕上げ剤の使用をお薦めします。
- 3) 漂白剤や乾燥機のご使用、クリーニングはお避けください。
- 4) アイロンの使用はお避けください。

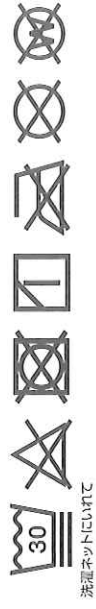

洗濯ネットに入れて

※上記以外での洗濯は著しい収縮を招き靴下本来の機能を失いますので指定の洗濯を行ってください。

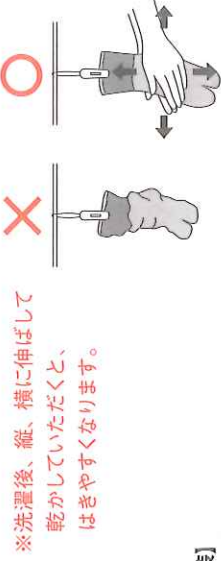

【包装】

- 1 足入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社コーポレーションパールスター

第三種 医療機器製造販売業許可番号 34B3X10008

医療機器製造業登録番号 34BZ200022

〒739-2402

広島県東広島市安芸津町三津4424番地

TEL 0846-45-0116

Fax 0846-45-0150

Email paristar@pastel.ocn.ne.jp

ロット番号 KH30-1115