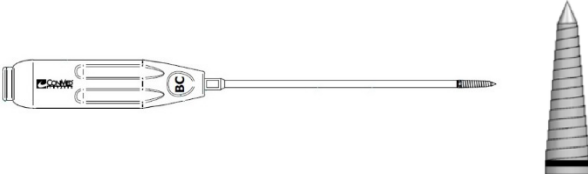
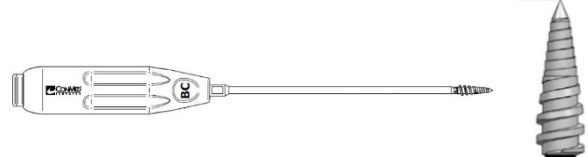


GENESYS インスツルメンツ

【禁忌・禁止】

弊社が指定した製品以外との併用はしないこと[専用品でない設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある]。

【形状・構造及び原理等】

製品名・製品外観・原材料	
GENESYS CrossFT パンチ (4.5mm)	ステンレス鋼
GENESYS CrossFT パンチ (5.5mm)	アルミニウム合金
	
GENESYS CrossFT タップ (4.5mm)	ステンレス鋼
GENESYS CrossFT タップ (5.5mm)	アルミニウム合金
GENESYS CrossFT タップ (6.5mm)	アルミニウム合金
	

【使用目的又は効果】

本品は、靱帯再建術等の靱帯又は腱手術に用いる手動式の手術器械である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 本品は再使用可能である。
- 本品は靱帯又は腱の手術時に手術器械として使用する。その手技に従うこと。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 本品は未滅菌にて供給されるため、使用前後に滅菌器製造業者の推奨及び病院施設の指針に従い必ず高圧蒸気滅菌すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 刃先等の鋭利な器具については、怪我をしないよう細心の注意をはらうこと。また、通常の使用で有意に鈍化したときには、安全のために再使用しないこと。
- 使用に先立ち、ゆるみ、破損がない等、適正な機能を果たす状態であることを確認すること。
- 本品への曲げの負荷が最小になるように注意して使用すること。
- 使用中の損傷・破損を防ぐため、器械に過度の力をかけないこと。
- 損傷や破損を防ぐため、使用中に他の手術器械と意図せず接触しないよう注意すること。
- 使用後に器械に損傷がなかったか確認すること。
- 本品の使用にあたり、次の患者には注意して使用すること。
 - 感染活動期の患者。
 - 敗血症患者。
 - 本品の原材料へのアレルギーがある、またはその疑いがある患者。

2. 不具合・有害事象

- 不具合
器械に過剰な荷重をかけたり、損傷及び不適切な取り扱いをした場合は、破損、折損、ルースニング、摩耗、腐食、酸化、機能の低下が発生する可能性がある。
- 有害事象
 - 金属アレルギー
 - 破損・脱落による体内遺残
 - 使用時の負傷
 - 組織、筋肉、靱帯、腱、神経、血管、骨等の損傷及び感染症が考えられる。
 - アレルギー、過敏反応／炎症、本品の材質に対するその他の反応。
 - 皮切の拡大、皮切の追加
 - 手術時間の延長
 - 再手術の必要性
 - 熱傷
 - 医療処置の中断

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

常温、常湿にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 洗浄

- 保護服を着用して汚染されたものを洗浄する時の一般的な注意事項に従うこと。
- 使用後 2 時間以内に濡らせたタオルやスポンジで拭き、流水で洗い流した後に水道水で洗浄し、その後 22～43℃の水道水の入った容器につけ置きすること。食塩水は一部の金属に対し腐食作用があるので、推奨しない。
- 水道水の温度は 45℃を超えないこと。
- 研磨作用のあるブラッシングは推奨しない。
- 穴、溝には繰り返し水を通し、血液／組織、洗浄液の残りがないようにする。

手動洗浄

- 洗剤メーカーの推奨に従って中性洗剤の準備をする。
- 洗浄液に 5 分間浸す。
- 水道水ですすぎ洗いを行う。
- 毛の柔らかいブラシを使用して、中性洗剤で 7 分以上洗浄する。
- 38℃以上の水道水で 30 秒以上洗い流す。
- 目視で汚れが確認できる場合は上記の洗浄を繰り返し行う。
- 25℃以上の脱イオン水で 30 秒以上すすぐ。
- 室温の消毒液(pH11.0～12.49 を推奨)に器具を 3 分以上浸す。
- 再度脱イオン水で 30 秒以上すすぐ。

自動洗浄

- 洗剤メーカーの推奨に従って中性洗剤の準備をする。
- エアロゾル化を防ぐために流水で洗浄する。
- やわらかい毛ブラシを使用して、中性洗剤を表面全体に塗布し、4 分以上ブラッシングする。
- 38℃以上の水道水で 30 秒以上洗い流す。
- 25℃以上の脱イオン水で 30 秒以上洗い流す。
- 器具を洗浄機に入れ、中性洗剤を用い機器メーカーの指示に従って洗浄する。中性洗剤の濃度はメーカーの指示に従うこと。
- 下記自動洗浄サイクルを実施する。

(8) 推奨する最低洗浄条件

工程	時間	温度 / 水	洗剤
前洗浄	5 分	冷たい水道水	－
酵素洗浄	6 分	洗剤メーカーの推奨に従う / 温水	中性酵素洗浄剤
酵素すすぎ	15 秒	温水	－
洗浄	5 分	洗剤メーカーの推奨に従う / 温水	中性洗剤
すすぎ	15 秒	温水	－
高温すすぎ	5 分	90℃ / 脱イオン水	－
乾燥	6 分以上	115.6℃以上	－

(9) 目視で汚れが確認できる場合は上記の洗浄を繰り返し行う。

2. 滅菌

(1) 推奨する滅菌条件

1) 滅菌方法: 高压蒸気滅菌

2) 推奨条件

方法	温度	滅菌時間	乾燥時間
高压蒸気滅菌 (プレバキューム)	134℃	3 分	15 分
高压蒸気滅菌 (重力置換)	121℃	30 分	15 分

(2) 滅菌トレイに入れて滅菌する場合は、トレイに関する固有のガイドラインに従うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: コンメッド・ジャパン株式会社