

機械器具 30 結紮器及び縫合器
管理医療機器 取外し可能な皮膚ステープル（JMDN コード：35884002）
（単回使用ステープルリムーバ JMDN コード：16787002）
リフレックス スキンステープラー
（エクストラクター）

再使用禁止

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

本品は滅菌済み製品である。

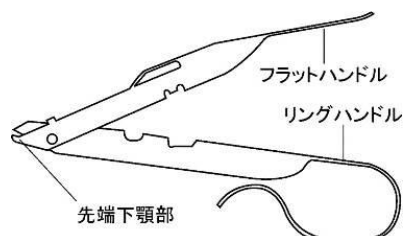

＜組成＞

ステンレス鋼(ニッケル、クロムを含む)

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

取外し可能な皮膚ステープルの定義を逸脱しない使用目的、効能
又は効果
単回使用ステープルリムーバの定義を逸脱しない使用目的、効能
又は効果

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 本品の先端下顎部を針の下へ差し込む。
2. リングハンドルで位置を決め安定させ、針が完全に開ききるまで、フラットハンドルを押さえ込む。
3. ハンドルを押さえ込んだまま針を皮膚面より持ち上げ、針を取り外す。なお、皮膚から取り外した針は下図のような形状となる。
4. 本品を逆さまにして開き、針を取り外す。



抜針形状

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

＜有効期間＞

5年間[自己認証(当社データ)による]

本品のラベルの使用期限を参照すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

コンメッド・ジャパン株式会社

製造元

コンメッド社(アメリカ合衆国)

CONMED Corporation