

【マツヨシ瞳孔計付 2WAY ペンライト】

【禁忌・禁止】

本品の目的以外に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

ペンライトの本体に瞳孔の大きさを示す円が表示された瞳孔計である。

（ペンライト）

本体に LED ライトが内蔵されており、スイッチ、クリップ、ライトキャップで構成される。ライトは電球色と昼白色の 2 種類を備えている。



2. 寸法/重量

寸法：140mm

直径：Φ13mm

重量：16g

3. 原理

本製品は、瞳孔の幅又は径を測定するために用いる。本品の側面に瞳孔の大きさを示す円（瞳孔計）が表示される。

（ペンライト）

4. 電源電圧

3.0VDC（単 4 アルカリ 乾電池 2 本）

【使用目的又は効果】

本製品は瞳孔の幅又は径を測定するために用いる眼科用器具である


【使用方法等】

1. 本製品を瞳孔に近づけて瞳孔の大きさを対比的に観察し測定する。

（ペンライト）

1. 乾電池の挿入

- ・LED 電球を左に回して取り外す
- ・単 4 形乾電池を LED 電球側がプラス+極になる向きで挿入する。乾電池交換の際は、2 本同時に新しい乾電池に交換する

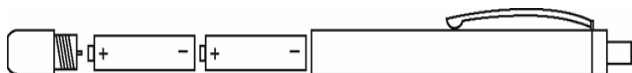

2. スイッチを押すと LED ライトが点灯する。スイッチの ON と OFF を繰り返すことでライトが電球色か昼白色に切り替える。

3. 測定を終了し、スイッチを戻すと LED ライトが消灯する。

【使用上の注意】

（ペンライト）

1. 使用にあたり電池を正しくセットすること。
2. 本品を落下させないこと。LED ライトを破損するおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿直射日光を避け、常温保管すること。

（ペンライト）

長期間使用しない場合は乾電池を抜いておく。

【保守・点検に係る事項】

〈点検方法〉

1. 使用前に本品に傷、破損等の異常がないことを確認すること。

（ペンライト）

1. 「使用方法等」にしたがって、正常な点灯を確認する。
2. LED 電球が暗くなってきた場合又は点灯しない場合は、予備の乾電池に交換する

〈洗浄・消毒〉

付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭・消毒する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社コンテック

〒544-0011

住所：大阪府大阪市生野区田島五丁目 3 番 3 0 号

TEL 06-6756-9810

FAX 06-6756-9820

〔製造業者〕

Shenzhen sunbot scientific & technical Co. LTD（中国）