

**パッケウオーマー

【禁忌・禁止】

適用対象

以下の症状を示す人、又は診断を受けた人へホットパックの使用はやめて下さい。[症状が悪化する恐れがあります]


1. 重篤な末梢神経障害、急性の炎症及び外傷、悪性腫瘍及び肉種、潰瘍がある場合、高血圧症で重症の場合、高熱時及び衰弱時
2. その他医師が不適当と判断した人

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

各部の名称の詳細については取扱説明書「各部の名称と働き」を参照して下さい。

- ① 本体
- ② 蓋
- ③ 操作部

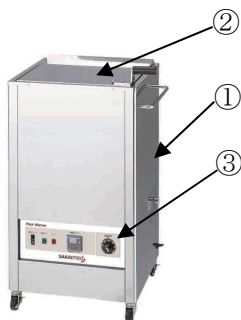

2. 電氣的定格

電源 : AC100V 50/60Hz

* 電源入力 : 1.0kVA (CL-15)

* 3. 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類 : クラス I 機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類 : B 型装着部

本製品は EMC 規格 IIS T 0601-1-2:2012 に適合しています。

4. 本体寸法及び質量

取扱説明書を参照して下さい。

5. 動作原理

槽内に入れた水(湯)を張り、サーモスタットにより設定されたヒーターによってエスパックが加温される装置である。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

エスパック(ホットパック)を温める為の加温装置

2. 効果・効能

温熱効果

【使用方法等】

1. 設置環境

設置場所について、次のような場所はお避けて下さい。

- 1) 水のかかる恐れのある場所
- 2) 温度、湿度、直射日光、ほこり、塩分、硫黄分等を多く含んだ空気等による悪影響のある場所
- 3) 傾斜、振動、衝撃のある不安定な場所
- 4) 化学薬品の影響やガス発生のおそれのある場所
- 5) 電磁波の発生する、マイクロ波治療器からの直接照射を受けたり、磁気の影響を受ける場所

2. 電源設備

電源は AC100V (3P) コンセントをご使用して下さい。

3. 操作手順

各部の操作の詳細については取扱説明書「操作方法」を参照して下さい。

- 1) 排水バルブを閉じて下さい。
- 2) 槽内の仕切りが隠れるの所まで水(湯)を入れて下さい。
- 3) エスパックを入れて下さい。
- 4) 電源コードプラグをコンセントに差し込んで下さい。
- 5) サーモスタット設定温度 80℃にし、電源スイッチを「入」して下さい。
- 6) 週間タイマーを使用する際は、セットをして下さい。
- 7) 週間タイマーを使用の場合、使用後コンセントを抜かないで下さい。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 機器に異常があった場合、直ちに機器の作動を停止して下さい。[事故の原因になります]
- 2) 患者が機器のスイッチやツマミ等に触れないよう注意して下さい。[事故の原因になります]
- 3) 設定温度に注意して下さい。[やけどの恐れがあります]

2. 併用注意

他の機器を併用する場合は、専門家の指示に従って下さい。[けがや事故の恐れがあります]

3. 過剰使用

治療に必要な時間・量は超えないように注意して下さい。[症状の悪化や事故の恐れがあります]

取扱説明書を必ずご参照下さい。

* 4. その他の注意

- 1) バックは直接槽の中に入れて仕切りカゴを使用して下さい。[破損の恐れがあります]
- 2) 破損しているバックは使用しないで下さい。 [中身がはみ出て槽内のサビの発生や、排水部の目詰まりの原因となります]
- 3) タイマー使用中は、槽内の水（湯）は十分に補給しておいて下さい。[夜間・休日等でも自動的にヒーターが作動する場合は、万が一空焚き防止機能が働かないと、事故につながります]
- 4) バック使用中は水（湯）を適量補給して下さい。[水位が下がると空焚き防止装置が作動して、自動的に加温をストップします]
- 5) 槽内に包帯やバンソウコウ等を落とした時は、すぐに拾い上げて下さい。[排水部の目詰まりの原因となります]
- 6) ホース等で水をかけて洗わないで下さい。[電気部品に水がかかり故障の原因になります]
- 7) 長期間使用されていない機器を使用する場合は、機器が正常に作動することを確認したうえで使用して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間

10 年（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- 1) 使用前に点検項目に基づき、始業点検を実施してください。

区分	点検内容	点検方法
周囲	障害物の有無	目視
本体	カバーおよびふたのガタつき、取付ネジの緩み、脱落	目視 およびドライバー等による確認
	槽内の汚れ、または不要物	目視
	槽内の水位	目視
	槽からの水漏れ	目視
	電源ランプの点灯	目視
	タイマーの表示	目視
	キャスターのロック	前後左右に押して浴槽が動かないことを確認
エスパック	エスパックのほつれ、吸水	目視
ホットバック-mie	ホットバック表面の破損	目視

- 2) 清掃等の保守を実施してください。（清掃方法は取扱説明書を参照してください）
- 3) 故障のときは電源を切り、「故障・使用不可」等の適切な表示を行い、取扱店又はメーカーの修理が完了するまで機器に触れないで下さい。

2. 業者による保守点検事項

製品を長期間正常な状態で安全に使用できるように「保守点検契約」の締結をお勧めいたします。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：酒井医療株式会社

製造業者：酒井医療株式会社 白井第一工場

問合せ先：047-498-1220