

ヘミアームスリングⅡ

【警告】

* 1. 適用対象

以下の症状を示す人、又は診断を受けた方への使用及び使用後は、適切な処置を行うこと。[感染や症状が悪化する恐れがあります]

- ① 感染症、伝染性皮膚疾患のある場合、出血のある場合

【禁忌・禁止】

* 1. 適用対象

- 1) 天然ゴムに対する過敏症、アレルギーがある方への使用はしないこと。
2) 骨折には使用しないでください。[悪化の恐れがあります]
3) その他医師が不適当と判断した人


2. 使用方法

- 1) スリングやストラップを必要以上にきつく締めないでください。[血液などの循環を妨げる恐れがあります]

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

- ① アームカフ (コットン)
② プラスチックストラッププロテクター
(写真のような形状のストラッププロテクター)
③ Oーリング (鉄)
④ チェストストラップ (ポリエステル)

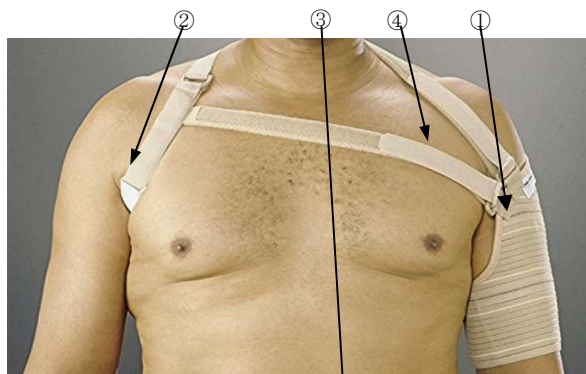

** 2. 本体寸法

Mサイズ (寸法：46～61 cm)

サイズについては肩甲骨の中間点を通して、片峰から片峰までの長さです。

【使用目的又は効果】

脳卒中発症後の亜脱臼している肩のサポートや予防

【使用方法等】

取り付けについては、付属の英文マニュアルの写真を参考にしながら手順に従って取り付けるようにしてください。

1. 取り付け方1

患者へ取り付ける場合の手順

- 1) ホックとループを開き、アームカフのストラップとチェストストラップ (Oーリングにつながっていないストラップ) を締める。
2) 正面のチェストストラップを緩め、Oーリングを背中側へ持っていく。正常な腕に手順1でループにしたストラップを通し、ストラッププロテクターを腕の下あたりに引き入れる。
3) アームカフを背中側からまわし、上腕二頭筋の末端の面を覆うように取り付けます。このとき、Oーリングが背中中央に無いことを確認してください。
4) 肩の周りが合うようにストラップを調整します。
5) チェストストラップを取り付けます。
6) 適切なポジショニングになるように調整してください。
7) 今後の取り付けのためにストラップなどの取り付け位置に目印をつけておきます。

2. 取り付け方2

患者自身が取り付ける手順

取り付け方1の手順に従って取り付け位置の目印をつけておきます。

- 1) チェストストラップを開きます。アームカフを故障している腕に取り付けます。ストラップが絡まっていないことを確認してください。
2) もう一方のループを正常な腕につけます。
3) Oーリングを持って、頭の上から背中側へ回します。
4) チェストストラップを取り付け調整します。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- * 1) 医師や指導者の指示に従い行い、患者に対して装着方法や諸注意の説明は必ず行ってください。
2) 使用中に違和感がある場合は、直ちに使用を中止し、医師の指示に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

- * 使用後は、清潔さを保ち、衛生的に保管ください。

【保守・点検に係る事項】

- * 汚れた場合は、面ファスナーを留め、ぬるま湯と中性洗剤で洗い、完全に乾かしてから使用してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町 358-6

問合せ先：047-498-1220

** 外国製造業者：Performance Health Supply, LLC（アメリカ）

Performance Health（イギリス）