

添付文書

歯科材料 02 歯冠材料

管理医療機器

アクリル系レジン歯

JMDN : 70807000

イージーモア


【禁忌・禁止】

本品又はメタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏性の既存症のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕（**）

本品は「レジン臼歯」であり、形態を以下に示す。

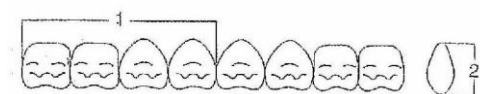

形態	寸法 (mm)		色調
	片側 4 歯 全幅径 (1)	第 1 小臼歯の直径 (2) カラーを除く	
28M 上	28.0	8.0	55 56
28M 下	30.5	7.5	
30M 上	30.0	9.0	
30M 下	32.5	8.5	
32M 上	32.0	9.5	
32M 下	34.5	9.3	

〔原材料〕メチルメタクリレート（MMA・PMMA）・着色剤

〔原理〕義歯床に植立し義歯として使用する。

【使用目的又は効果】

本品は、義歯床に植立し義歯として使用する。

【使用方法】

通常の義歯排列法により排列し、義歯床用合成樹脂と結合させて使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 形態修正を行った場合は、その部分を十分に研磨すること。
- 2) アクリル系樹脂以外の床用樹脂を用いて義歯を作成する場合は接着しないので、床用樹脂メーカー指定の方法に従って維持孔の付与等の前処理をすること。
- 3) 口腔内において色素沈着（タバコのヤニなど）により着色した場合は、みがき粉をつけ義歯用ブラシを用いて研磨して除去し、亜鉛華（酸化亜鉛）を付け、軟毛ブラシを用いて、艶出し研磨すること。

4) 人工歯の表面には凹凸が付与されているため、プラークや、タバコのヤニが付着することがあるので、義歯用ブラシなどを用いてよく清掃するように、患者に指導すること。

5) 本品は幼児の手の届かない場所に保管すること。

6) 人工歯の切削、研磨の際防護メガネ・マスクなどを使用し、粉塵が目に入ったり吸引しないようにすること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

①他の製品と混用しないこと。

2) 重要な基本的注意

②本品の使用により過敏症状を起こした患者には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

③本品に対して過敏症状の既存症のある術者は、本品を使用しないこと。また使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

④本品の研磨作業などの際には、集塵装置、防護マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

⑤本品の切削、研磨の際には保護メガネなどを使用すること。

⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

〔保管方法〕

直射日光の当たらないところで、常温で保管すること。

〔有効期間〕

購入当初から正規の保守点検を行った場合に限り、保証印の日付より 5 年間とする

記載の有効データは自己認証（当社データ）による。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】（***）

販売元 住所 TEL	株式会社ビーディーアール 愛知県名古屋市天白区原 4-106 052-846-2718
製造販売業者 住所 TEL	株式会社ビーエスエーサクライ 名古屋市天白区高島一丁目 117-1 052-805-1181
外国製造業者 国名	上海ラビット有限公司 中国