

添付文書
器 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用顔弓 JMDN：35700000


フェイスボウ

【禁忌・禁止】

- ・破損・変形・劣化品は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕（＊）

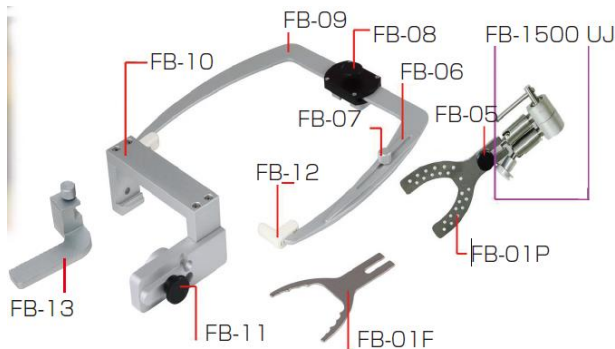

FB-01P	バイトフォークプレーン
FB-01F	バイトフォーク
FB-1500UJ	ユニバーサルジョイント
FB-05	バイトフォークスクリュー
FB-06	balancing check
FB-07	balancing check screw
FB-08	フェイスボウアームスクリュー
FB-09	フェイスボウアーム
FB-10	トランスファージグ
FB-11	トランスファージグスクリュー
FB-12	イヤープース
FB-13	トランスファージグアダプター

〔原理〕（＊）

側頭下顎関節（又は顎の開口運動軸）に対する上顎弓の相対位置を記録するほか、口腔模型を顎の開口運動軸と同じ関係に合わせるために用いるカリパス様歯科用器具をいう。

【使用目的又は効果】（＊）

側頭下顎関節（又は顎の開口運動軸）に対する上顎弓の相対位置を記録するほか、口腔模型を顎の開口運動軸と同じ関係に合わせるために用いる。

【使用方法等】（＊）

- ①バイトフォーク（FB-01F）に、パラフィンワックスをかぶせ、患者に噛ませる。
- ②バイトフォーク（FB-01F）をユニバーサルジョイント（FB-1500UJ）に取り付ける。

- ③フェイスボウアーム（FB-09）を耳にかけて水平にし、balancing check（FB-06）を眼窩に合わせる。
- ④フェイスボウがきちんと噛まれているかを確認する。
- ⑤確認後、ユニバーサルジョイント（FB-1500UJ）のスクリーンを時計方向に回しながら締める。
- ⑥フェイスボウアーム（FB-09）を開けて、耳と口から外す。
- ⑦トランスファージグ（FB-10）、ユニバーサルジョイント（FB-1500UJ）を利用して、咬合器にバイトフォーク（FB-01F）装着する。

【使用上の注意】（＊）

- ・患者へ装着時に、本機器及び部品が、突き刺さったり、引っかかりたりしないように注意して取り扱うこと。
- ・無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。
- ・バイトフォーク、バイトフォークプレーンは、オートクレーブ滅菌は 133℃以下で行うこと。
- ・金属腐食を起こす恐れがある薬剤を使用しないこと。
- ・歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- ・オートクレーブ滅菌の方法は、それぞれの滅菌器のメーカーの使用説明書に従って正しく行うこと。

【保管方法及び有効期間等】（＊）

〔保管方法〕

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避けること。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島 1 丁目 117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	コリデント
	CORIDENT
国名	韓国