

添付文書
器 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用電気エンジン JMDN : 38611000

スピーディーワン EX

【禁忌・禁止】 破損品の使用禁止


【形状・構造及び原理等】（**）

【形状・構造】（*）

ハンドピースモーターの形状により、2 種類ある。

■ EX タイプ

①コントローラー

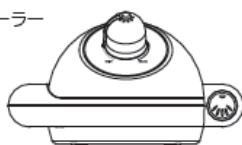

③フットコントローラー



⑤ハンドピース スタンド



⑦保証書



②ハンドピース



④ACコード




⑥カーボンブラシ



■ DX タイプ

①コントローラー

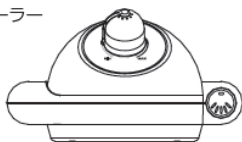

③フットコントローラー



⑤ハンドピース スタンド



⑦保証書



②治療用マイクロモーター 100E



④ACコード



⑥カーボンブラシ



【原理】

歯科技工用カーバイト切削器具等の回転器具を接続するためのチャックを備えた 1 つのハンドピースからなる歯科技工用器具をいう。本機器は、通常、電源から離れており、フレキシブルドライブシステムを接続する。

【性能】

	EX タイプ	DX タイプ
入力電圧	100V 50/60Hz	
電源入力	12VA	
最高回転速度	35000/rpm	
トルク	3.5N	
本体	W168×D168×H75mm 2.2kg	
HP/マイクロモーター	165mm×Φ30	102mm×Φ24
	110g	135g

【作業環境】

温度 0～40℃、湿度 35～70%

【使用目的又は効果】

歯科技工用のためのカーバイト切削器具等の回転器具を接続し、歯科技工用のための研磨や切削を行う。

【使用方法等】（*）

詳細は、取扱説明書を参照すること。

- ①本体を安定した場所に設置し、ハンドピース又はマイクロモーターを接続する。（フットコントローラーを使用の場合は、フットコントローラーを本体に接続する。）

- ②ハンドピースに回転器具を装着する。又はマイクロモーターに ISO 規格のライト無タイプのストレートハンドピースかアングルハンドピースを接続し、ハンドピースの先に回転器具を装着する。
- ③ACコードを本体に接続し、電源プラグをコンセントに差し込む。
- ④本体背面の主電源を入れる。
- ⑤回転調節ダイヤルが最小になっていることを確認し、電源スイッチを押す。
- ⑥正逆回転切替スイッチで、正回転／逆回転を選択する。
- ⑦ハンド／フットスイッチ切替スイッチで、ハンドモードかフットモードの選択をする。
- ⑧ハンドモードの場合は、回転数調節ダイヤルにして使用し、使用後は回転ダイヤルを最小にする。フットモードの場合は、フットスイッチを踏みこんで使用し、使用後は回転ダイヤルを最小にする。
- ⑨本体背面の主電源を切り、ACコードのプラグをコンセントから抜く。

【使用上の注意】

【使用上の注意】

- ・本機器は【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ・本機器は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・分解・改造は一切しないこと。
- ・本機器に落下・転倒など衝撃を与えないこと。
- ・バーにキズ・曲がり等があるものは使用しないこと。
- ・バーを取り付けた後、強く引っ張っても抜けないことを確認すること。

詳細は、取扱説明書を参照すること。

- ・バー等を交換するときはパワースイッチがOFFで回転軸が停止していることを確認すること。
- ・モーターに、異常に負荷をかけ過ぎないこと。
- ・使用の際は、保護メガネを使用すること。(*)
- ・水場の近く又は、水のかかる恐れのある場所で使用しないこと。(感電のおそれ) (*)
- ・アルコール又はアルコールを含む洗剤を使用しないこと。(*)
- ・清掃は、柔らかな乾いた布で拭くこと。(*)

[重要な基本的注意]

- ・本機器使用中に異常を感じた場合は、コンセントを抜き、販売店に相談すること。
- ・故障したときは、専門家に修理を任せること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水ぬれに注意し、直射日光、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- ・移動させるときは衝撃が加わらないよう注意すること。
- ・歯科医療従事者以外の人が触れないよう、適切な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・機器および部品は必ず定期点検を行なうこと。
- ・しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、仕様前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者	(株)ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目 117-1
電話番号	052-805-1181
外国製造業者	マイクロ イキックス カンパニー リミテッド MICRO-NX Co., Ltd
国名	韓国