

添付文書
機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用印象材混こう器 JMDN：38790000


オートミキサー

【禁忌・禁止】

- ・ 本器の分解・改造を行わないこと。

【形状、構造及び原理等】

【形状、構造】

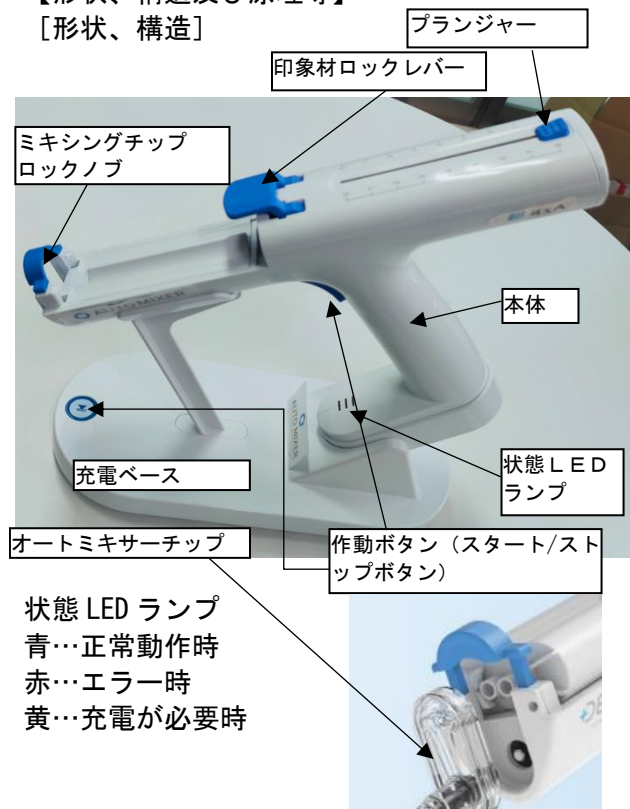

【電氣的定格】

AC100-240V、50/60Hz

【包装】

本体×1、充電ベース×1、オートミキサーチップ×50、AC アダプター

【原理】

使用前にチェアサイドですぐに印象材を混ぜ合わせるために使われる電動式器具をいう。

【性能及び安全性に関する規格】

破損、変形、劣化が見られないこと。

【使用目的又は効果】

使用前にチェアサイドですぐに印象材を混ぜ合わせるために使われる電動式器具をいう。

【使用方法】

- ① 充電ベース後部に AC アダプターを接続し AC アダプターの反対側のプラグを、規定のコンセントに挿入する。
- ② 本体のガンを充電ベースにセットし、充電を行う。
- ③ AC アダプターの右上 LED ランプが赤色は充電中、緑色は充電完了。
- ④ プランジャーを本体後部側に移動させる。
- ⑤ 本体ガンに等量が出るようにすりきり作業を行った印象材カートリッジを装着する。
- ⑥ 本体後部のプランジャーを手前側に寄せる。
- ⑦ 印象材ロックレバーを、下げる。（うまく下げられない場合は、プランジャーを前後に軽く移動させる。）
- ⑧ 専用のミキシングチップを本体ガンに装着する。
- ⑨ ミキシングチップロックノブを下げる。
[本体ガンを持って使用する場合]
- ⑩ 本体ガンの作動ボタンを押し続けて印象材を出す。（作動は押してから 1 秒後）
- ⑪ 本体ガンの作動ボタンを離すと、印象材が出るのがストップする。（動作停止は、離してから、0.5 秒後）
[充電ベースに置いた状態で使用する場合]
- ⑩ 充電ベース手前側の動作ボタンを 1 度押す。（作動は押してから 1 秒後）
- ⑪ 充電ベース手前側の動作ボタンを 1 度押して印象材が出るのをストップする。

【使用上の注意】

- ・ 使用前に取扱説明書を熟読すること。
- ・ 平らで安定した場所に設置すること。
- ・ 長期間使用しない場合、AC アダプターを外して保管して下さい。（充電中以外は、AC アダプターを外すことを推奨。）
- ・ 使用前に正常に作動するかを確認する。
- ・ 熱源から遠ざけ、水のかからない場所に設置する。
- ・ 濡れた手で AC アダプターに触れないこと。
- ・ 印象材は、機器にセットする前に等量が出ることを確認し、すりきり作業を行ったものを使用すること。
- ・ AC アダプター及びミキシングチップは、付属のものを使用すること。

詳細は、取扱説明書を参照のこと。

- ・ 本器の分解・改造を行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温・低温や湿気の多い 場所は避けること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること
- ・ 通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	(株) ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島 1-117-1
電話番号	052-805-1181
外国製造業者	インターデンタル アール アンド デイ センター カンパニー リミテッド INTER-Dental R&D CENTER CO., Ltd
国名	韓国