

スイーツカン


【禁忌・禁止】

- ・変形・劣化・損傷がみられるものは使用しないこと。
- ・【使用目的又は効果】に記載の目的以外に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

*【形状・構造】

接続部内径Φ10mm タイプ（ライトブルー、イエロー）、Φ11mm タイプ（ダークブルー、クリアグリーン）、Φ10、11mm 共用ソフトタイプ（ピンク）の 5 種類がある。

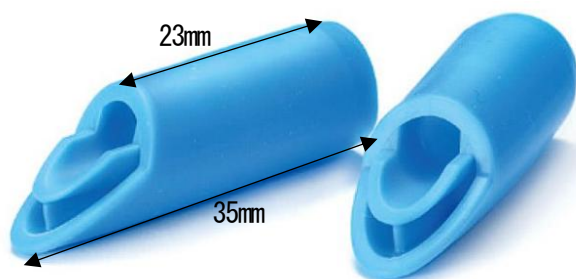

【原理】

非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の歯科用器具をいう。口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本品は滅菌後に再使用する。

【原材料】

熱可塑性エラストマー（TPS）

【使用目的又は効果】

非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の歯科用器具をいう。口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本品は滅菌後に再使用する。

【使用方法等】

- ①使用前に必ず洗浄、滅菌がされていることを確認する。（オートクレーブ滅菌 121℃ 20 分 乾燥工程不可）
- ②使用前に変形・劣化・損傷がないことを確認する。
- ③適切なサイズの本品を選択する。
- ④非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結し、使用前にしっかりと接続していることを確認してから、腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。
- ⑤使用后、非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）が停止していることを確認してから、本品を取り外す。
- ⑥洗浄・滅菌を行う。（オートクレーブ滅菌 121℃ 20 分 乾燥工程不可）

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず洗浄、滅菌がされていることを確認すること。（オートクレーブ滅菌 121℃ 20 分 乾燥工程不可）
- ・使用後は、洗浄・滅菌を行うこと。（オートクレーブ滅菌 121℃ 20 分 乾燥工程不可）
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・変形・劣化・損傷がみられるものは使用しないこと。

- ・【使用目的又は効果】に記載の目的以外に使用しないこと。
- ・非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）にしっかりと接続していることを確認すること。
- ・本品の脱着は、非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）が停止していることを確認してから行うこと。
- ・フェノール系の消毒液で消毒後、紫外線殺菌を行うと著しく変色することがあるので、注意すること。

【保守・点検に関わる事項】

【洗浄】

- ・血液・体液等で汚染した本品は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなるので、使用後は直ちに洗浄、滅菌を行うこと。
- ・金ブラシ、金属ウール、及びクレンザー（磨き粉）は錆や傷の原因となるので使用しないこと。

【滅菌】

- ・オートクレーブ滅菌は、21℃ 20 分 乾燥工程は行わないこと。
- ・オートクレーブ時は、外力がかからないようにすること。
- ・オートクレーブ時は、バキューム管は外すこと。
- ・アルコールを使用した高圧滅菌、乾熱滅菌は行わないこと。
- ・使用する薬液の添付文書に書かれた【使用上の注意】の注意事項を守ること。（薬剤によって本品の素材に影響を及ぼす恐れ）

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・歯科従事者以外が触れないように、適切な場所に保管すること。
- ・直射日光が当たる、高温、多湿な場所で保管しないこと。
- ・粉塵や化学製品を避け、清潔な場所で保管すること。

【有効期間】

- ・特に定めはないが、変形・劣化・損傷がみられたら使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	（株）ビーエスエーサクライ
住所	愛知県名古屋市中天白区高島 1-117-1
T E L	052-805-1181
製造業者	三晃合成工業（株）

