

添付文書  
医 04 整形用品  
一般医療機器 医療用スポンジ JMDN：13695000

再使用禁止

ドライパット

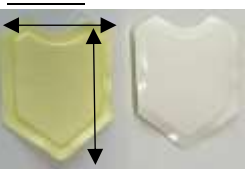
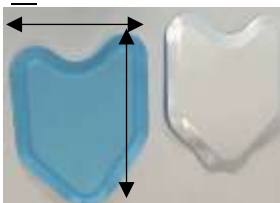
【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・汚れ、破損及び劣化等がみとめられる本品は使用しないこと。
- ・本材に使用される成分に対して、発疹等の過敏症の既往歴のある患者に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

\* [形状、構造]

本品は形状により 4 種類ある。

| リフタータイプ 小 (S)                                                                                    | リフタータイプ 大 (L)                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 × 44mm<br>  | 43 × 50mm<br>  |
| リジカタイプ 小 (S)                                                                                     | リジカタイプ 大 (L)                                                                                     |
| 39 × 44mm<br> | 43 × 50mm<br> |

【原材料】

吸収体：ポリアクリレート、セルロース

カバー：ポリエチレン、ポリプロピレン

【原理】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いるスポンジなどの高分子材料をいう。創傷被覆・保護材を除くものをいう。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いるスポンジなどの高分子材料をいう。創傷被覆・保護材を除くものをいう。

【使用方法】

1. 適切な本品のサイズを選択する。
2. 本品をピンセット等で把持する。
3. 吸収面（青、黄色）を頬側になるように、挿入する。

4. 頬面に吸収面を数秒間密着させる。
5. 使用後、頬側から水を噴射し、ピンセット等を用いて口腔外へ除去する。
6. 口腔外へ除去した本品は、適切に廃棄する。

【使用上の注意】

- ・再使用はしないこと。
- ・消毒はしないこと。
- ・汚れ、破損及び劣化等がみとめられる本品を使用しないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載以外の用途に使用しないこと。
- ・歯科医療従事者以外に使用しないこと。
- ・廃棄の際は、感染防止に注意し、関係法及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・歯科医療従事者以外が触れないように、適切な場所に保管すること。
- ・高温、低温、多湿、直射日光、蛍光灯、紫外線、水濡れを避けて、清潔な場所に常温で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【有効期間】

- ・包装材に記載の使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ  
住 所 名古屋市天白区高島一丁目 117-1  
電 話 番 号 052-805-1181  
外国製造業者 B.H MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.  
(ビーエフメディカルプロダクツカンパニー  
リミテッド)  
国 名 中国

