

添付文書
歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科研削用ストリップ JMDN：35702000

BSA IPRストリップキット


【禁忌・禁止】

- ・破損、変形及び劣化等が見られるものは使用しないこと。
- ・器具の改造は行わないこと。

【形状、構造及び原理等】

【形状、構造】

本品は、ハンドル 2 本と取り外し器具及びそれぞれ異なる 10 種のストリップで構成される。

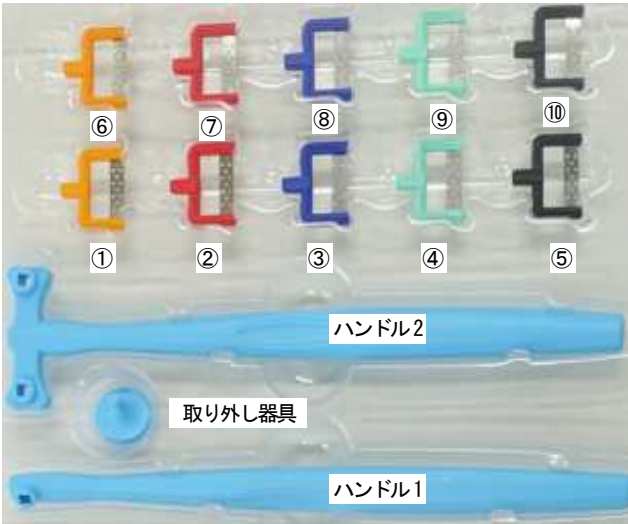


ハンドル 1…前歯用、ハンドル 2…臼歯用
ストリップ

	①イエロー両	②レッド両	③ブルー両	④グリーン両	⑤ブラック両
厚み	0.17mm	0.19mm	0.23mm	0.32mm	0.4mm
粒子	15μm	25μm	40μm	60μm	90μm
塗布	両面	両面	両面	両面	両面
	⑥イエロー片	⑦レッド片	⑧ブルー片	⑨グリーン片	⑩ブラック片
厚み	0.17mm	0.19mm	0.23mm	0.32mm	0.4mm
粒子	15μm	25μm	40μm	60μm	90μm
塗布	片面	片面	片面	片面	片面

【原材料】

ハンドル部、取り外し器具：PP
ストリップ軸部：PP
ストリップ作業部：ステンレス鋼
(SUS304)

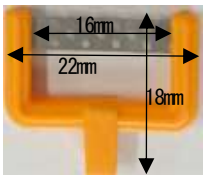

【原理】

研削粒子が片面又は両面にコーティングされた歯科用ストリップをいう。歯牙又は修復物表面の修正に用いる。

【使用目的又は効果】

研削粒子が片面又は両面にコーティングされた歯科用ストリップをいう。歯牙又は修復物表面の修正に用いる。

【使用方法等】

1. 本品をオートクレーブ滅菌する。(134℃ 5 分 乾燥工程不可)
2. 適したハンドルに、適したストリップを装着する。
3. 本品を装着したハンドルの把持部を持ち、歯間部に作業部を挿入させ、推定方向に往復させ、研磨する。

【使用上の注意】

- ・無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・本来の目的以外は使用しないこと。
- ・再使用する場合は、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、オートクレーブ滅菌（134℃ 5 分 乾燥工程不可）を行い、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・高温・多湿を避け、直射日光のあたらない清潔な場所に保管すること。
- ・保管中、損傷しないように注意すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【有効期間】

- ・特に定めはないが、異常が見られる場合は使用を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住 所 名古屋市天白区高島一丁目 117-1
電 話 番 号 052-805-1181
外国製造業者 B. H. MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
(ビーエイチメディカルプロダクツカンパニーリミテッド)

国 名 中国