

添付文書
器 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 単回使用歯科用吸引カニューレ JMDN：37434000

エンドQ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・本品は、E0 ガス滅菌済みのディスポーザブル品のため、再使用禁止。（感染、汚染の恐れ）
- ・本品は再滅菌禁止。（破損の恐れ）
- ・包装に破損・汚れがみとめられる場合は使用しないこと。（感染、汚染の恐れ）

【形状、構造及び原理等】

【形状、構造】

本品は先端のチップ部と本体チューブ部で構成され、チップ部とチューブ部の取り外しはできない。

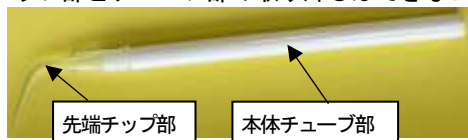

全長：約 126mm

【原材料】

PP

【原理】

非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いるものをいう。本品は単回使用である。

【使用目的又は効果】

非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いるものをいう。本品は単回使用である。

【性能及び安全性に関する規格】

無菌性保証水準（SAL）： 10^{-6} 以下

担保の方法：滅菌バリデーションの記録による。

【使用方法等】

1. 包装袋から本品を取り出す。
2. 本品を非能動型吸引装置（別売）に装着し、吸引を行う。
3. 使用済みの本品を適切に廃棄する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・本品と非能動型吸引装置が確実に接続されていることを確認すること。
- ・使用前に詰まり破損がないことを確認すること。

【使用上の注意】

- ・本品は、E0 ガス滅菌済みのため、包装に破損汚れがないことを確認してから使用すること。
- ・本品に対して、形状変更等の二次加工を行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- ・本品に損傷、変形（ひび、割れ）等があるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【有効期間】

本材は包装に記載の使用期限までに使用すること。
[記載の有効期間は自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	（株）ビーエスエーサクライ
住所	愛知県名古屋市中天白区高島 1-117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	B. H MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. （ビーエイチメディカル プロダクツ カンパニーリミテッド）
国名	中国