

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用印象材混こう器 38790000

デュオミックス 2

【形状・構造及び原理等】


1. 形状・構造

寸法 (高さ×幅×奥行): 330×190×380mm
重量 (印象材カートリッジ除く): 約 7.0kg



2. 各部名称

- A: メインスイッチ
B: ヒューズ
C: カートリッジ残量インジケータ
D: (スタートキー (トレイ用))
E: (スタートキー (ディスペンサー用))
F: (リトラクトキー)
G: 電源表示 (緑点灯時/電源 ON)
H: 本体カバー表示 (赤点灯時/カバー開)
I: カートリッジ残量警告表示 (黄点灯時/残量少)

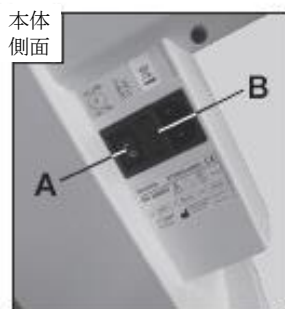

本体
側面



本体
上面

3. 電氣的定格

電源電圧: 100V
周波数: 50/60Hz
消費電力: 280VA

【使用目的又は効果】

使用前にチェアサイドで印象材を混ぜ合わせるために使われる電動式器具である。

【使用方法等】

1. 初回起動時

初回起動時 (開封時) は、電源を入れた上でリトラクトキーを押して内部のピストンを定位置に戻し、本体カバーを開けて梱包材を取り除いてから使用する。

2. 通常使用時

- (1) 通常の使用前には、メインスイッチ (A) を押して電源を入れ、リトラクトキー (F) を押して内部のピストンを定位置に戻す。
- (2) 印象材カートリッジに、専用のミキシングチップを装着しておく。
- (3) 本体カバーを開けて印象材カートリッジを装着し、本体カバーを確実に閉める。
- (4) ロッキングリング (印象材の付属品) を用いて、印象材カートリッジ及びミキシングチップを固定する。
- (5) 通常スピードで押し出す場合はコントロールキーの ST を、ターボスピードで押し出す場合はダイヤを選択する。
- (6) スタートキー (D 又は E) を選択し、必要な量の印象材が得られるまでキーを押し続ける。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 印象材カートリッジの初回又は再使用時には、スタートキーを押して少量をカートリッジから押出し、印象材が確実に押し出されることを確認すること。
2. アクアジル ウルトラ DECA (別売) 以外の印象材カートリッジを使用する際は、コントロールキーの ST を選択すること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 電磁妨害による誤操作を避けるため、他の電気機器の近くに設置しないこと。また携帯電話などの通信機器が本品の動作に影響を与える恐れがあるため、使用には注意すること。
2. 本品は、直射日光や他の熱源及び多湿を避けた場所に設置して使用すること。
3. 本品の使用前には、電源コードの劣化の有無など各部の点検を行うこと。
4. 本品の清掃には濡れた布等を用い、溶剤が含まれた洗剤等は使用しないこと。
5. ピストン部のシャフトは注油してあるので、清掃しないこと。
6. 本品は、高圧蒸気滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 本品は、直射日光や他の熱源及び多湿を避けた場所で保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 ドイツ
製造業者 レンフェルト社
Renfert GmbH

【問い合わせ窓口】

カスタマーサービス

* 電話番号 0120-667-467

取扱説明書を必ずご参照ください。