


機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科材料加温器 70720000

サーマプレップ2

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
寸法（W×D×H）：155×178×81 mm
重量：約 0.56 kg

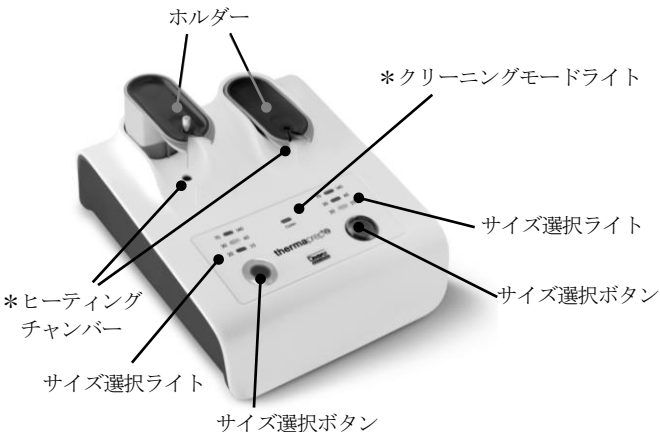

2. 電氣的定格
電源電圧：115V
周波数：50／60Hz
消費電力：最大 380W
電撃に対する保護の形式：クラス II

【使用目的又は効果】

寒天印象材等の材料を適切な使用状態に維持するために用いる加温装置である。

* 【使用方法等】

1. 本機器の電源コードプラグを電源に差し込みます。サイズ選択ライトが点灯し、お知らせ音が聞こえるまで、どちらか一方のサイズ選択ボタンを押し続け、スタンバイモードを解除します。
2. ホルダーを押し、両方のホルダーを上げます。
3. オブチュレーターを消毒後、ストッパーをセットし、オブチュレーターをホルダーにセットしてください。ストッパーはホルダーの下になるように設置します。
4. サイズ選択ボタンを押して、適切なサイズを選択します。
5. ホルダーを押し下げ、加温を開始します。加温時間はオブチュレーターの種類に応じて設定します。
6. 所定の時間が経過するとお知らせ音が鳴るので、ホルダーを押して、ゆっくりと引き上げます。
7. 所定の時間が経過しても、90 秒後までは本機器内にオブチュレーターを保温することができます。その場合は 15 秒毎にお知らせ音が鳴ります。なお、90 秒後には自動的に保温が解除されます。
* 8. クリーニングを行う際は、両方のサイズ選択ボタンを同時に 2 秒間押してクリーニングモードにします。【保守・点検に係る事項】に従い、クリーニングを行います。
9. 本機器の電源コードプラグを電源から外します。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. オブチュレーターをセットする際は、オブチュレーターが曲がっておらず、直線になっていることを確認すること。
2. ホルダーを引き上げる際は、オブチュレーターのガッタパーチャ部分が周囲に付着しないように注意すること。
3. 加温時間はオブチュレーターの種類に応じて設定します。

オブチュレーター	サイズ	時間（秒）
メルファーサーマフィル	20－25	20±5
	30－60	44±7
	70－140	49±8
ガッタコア ピンク	20－90	20±5

4. 本機器は、使用の都度清掃すること。
5. 電源コードプラグを電源から外さずに、クリーニングモードからノーマルモードに戻す際は、どちらか一方のサイズ選択ボタンを 2 秒間押すこと。
6. 何度も警告音になる場合は、修理に出すこと。
（時間内に所定温度に達しなかった時や、所定温度を超えた時は、警告音となります。）
* 7. ヒータリングチャンバーの出入り口付近は熱くなっている場合があるので、直接触れないようにすること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 本機器は、直射日光や他の熱源及び多湿を避けた場所に設置して使用すること。
2. 本機器の使用前には、電源コードの劣化の有無など各部の点検を行うこと。
3. 本機器を使用しないときは電源を抜くこと。
4. 故障したときは勝手にいじらず、修理は専門家に任せること。
5. 弊社製オブチュレーター以外の製品を加温しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管の条件〕

1. 本機器は、直射日光や他の熱源及び多湿を避けた場所で保管すること。
2. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。
3. 本機器は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

* 【保守・点検に係る事項】

〔使用者による保守点検事項〕

- * 1. 使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
* 2. 以下の手順でクリーニングします。
(1) ホルダーまたはヒータリングチャンバー出入口付近に付着したガッタパーチャは、市販の根管充填材用軟化材等を綿に含ませて除去します。
(2) 本機器にはクリーニングモードが搭載されており、ヒータリングチャンバー内を清掃することができます。クリーニングモードを作動する際は、両方のサイズ選択ボタンを同時に 2 秒間押します。クリーニングモードライトが点灯し、サイズ選択ボタンの周りのランプが点滅します。ヒータリングチャンバー内は 60℃程度の温度となり、15 秒ごとにお知らせ音が鳴ります。2～3 回程度のお知らせ音が鳴った後、どちらか一方のサイズ選択ボタンを押し、クリーニングモードを停止させます。
(3) 電源コードプラグを電源から外し、ワイヤーブラシでヒータリングチャンバー内部を底面側から清掃します。清掃の際は必ず、電源コードプラグを電源から外してください。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 オランダ
製造業者 ユニトロン社
 Unitron Group B.V.

〔問い合わせ窓口〕

カスタマーサービス

**電話番号 0120-667-467