

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 歯科用口腔洗浄器 (12304020)
サージカルユニット イリゲーションチューブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・本品は再使用しないこと。
- ・本品は再滅菌しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 種類


1) 注水セット (品番: 24785)

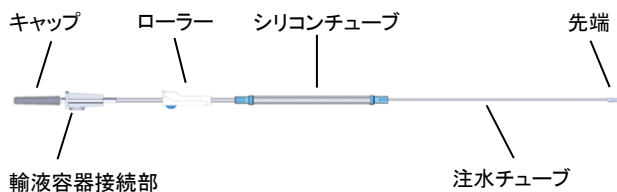

全長: 275cm(±9cm)

材質: ポリ塩化ビニル(DEHP フリー)、ABS 樹脂、ポリエチレン、ポリスチレン、シリコン


2) 延長チューブ (品番: 24786)

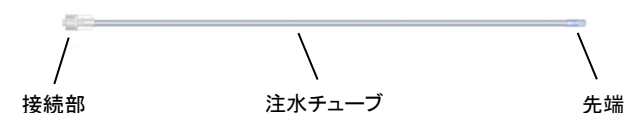

全長: 230cm(±9cm)

材質: ポリ塩化ビニル(DEHP フリー)、ABS 樹脂

3) カバースリーブ (品番: 24787)

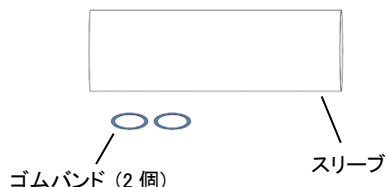

全長: 240cm(±9cm)

材質: 低密度ポリエチレン、SBS(ラテックスフリー)


【使用目的又は効果】

本品は、創面清掃の目的で処置する部位(窩洞やう窩)を洗浄し、歯及び残留充填材等の破片又は壊死性物質及び感染性物質を除去するために歯科治療で使用する注水セットであり、能動型医療機器に接続して使用される。

【使用方法等】


※使用前に、包装に損傷がなく、製品が無菌であることを確認してから、滅菌包装から注水セットを取り出すこと。

- ① 輸液容器接続部からキャップを外す。
- ② 輸液容器接続部を液体冷却バッグに挿入するか、ルアーロックを通して注水システムを接続する。輸液容器接続部は、キャップを開閉することにより輸液の流れを調整できるエアフィルターを備えている。

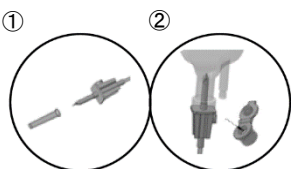


③ 必要に応じて、ローラーで流れを調整する。

④ シリコンチューブをペリスタルティックポンプに挿入し、流れの方向を確認した後、シリコンチューブ先端で適切に接続する。

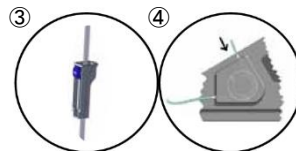

⑤ 注水チューブ先端をコントラアングルに接続する。本注水セットには、以下のオプションがある。

- ⑧ 内側からの注水
- ⑨ 外側からの注水
- ⑩ 内側と外側両方からの注水

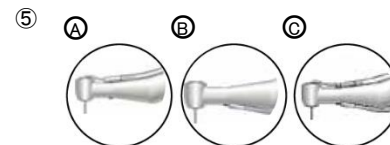

⑥ 必要に応じて、カバースリーブを使用しハンドピースおよび注水チューブを保護することが可能。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 包装が開封、破損している場合には使用しないこと。
- 2) 使用前に有効期限を確認すること。
- 3) 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- 4) 使用後は感染防止に注意し適切に廃棄すること。

2. 相互作用

マニュアルに規定されている歯科用ユニットとのみ併用すること。

***【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- 1) 本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
- 2) 本品は、熱源の近くに保管しないこと。
- 3) 本品は、乾燥した場所に保管すること。
- 4) 本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

製品表示を参照。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社

製造業者 オムニア社
(OMNIA S.r.l.)

製造国 イタリア

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

**電話番号 0120-667-467

取扱説明書を必ずご参照下さい。