

医療用品 04 整形用品
高度管理医療機器 歯科用インプラントシステム (JMDN: 70909000)
MISインプラントSEVEN
(アバットメント)

再使用禁止

【警告】

インプラント治療を行うにあたり、正しい技術を得得するために適切に十分なトレーニングを受けることが求められる。施術者の適切なトレーニング、知識、経験の欠如はインプラント治療の失敗や患者の健康を損なう原因となることがある。

【禁忌・禁止】

＜適用対象(患者)＞

- 以下の患者には使用しないこと。
 - ・外科治療全般の禁忌患者
 - ・血液疾患、出血性疾患を有する患者
 - ・骨粗鬆症等の代謝性骨疾患を有する患者
 - ・重度の全身的慢性疾患(高血圧、虚血性心疾患、糖尿病、免疫不全、肝硬変、腎不全等)を有する患者
 - ・呼吸器疾患を有する患者
 - ・内分泌機能障害のある患者
 - ・口腔又は口腔周辺に感染、悪性と疑われる腫瘍、圧痛がある患者
 - ・口腔粘膜に疾病のある患者
 - ・放射線治療を受けている患者
 - ・定期的にステロイド投与を必要とする患者
 - ・インプラントに含まれる特定の材料に対して感受性のある患者
 - ・臨床検査で BUN、クレアチニン、血清カルシウムに関して異常な検査値が見られた患者
 - ・妊娠又は妊娠していると思われる女性、授乳中の女性
 - ・過去 5 年間に悪性腫瘍と診断されたことがある患者
 - ・骨量が十分にない、又は骨移植等による骨造成の可能性がない患者
 - ・補綴再建が不可能な患者
 - ・非協力的、動機付けのない患者
 - ・インプラント治療に対して非現実的な期待を持つ患者
 - ・認知症、精神的障害を有する患者、治療計画の説明に対して十分な理解が得られない患者
 - 次の患者には使用しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に使用すること。
 - ・ブラキシズムやクレンチング等口腔習癖を有する患者
 - ・口腔衛生管理ができない患者
- ＜使用方法＞
- ・再使用禁止[感染症、骨吸収、硬組織及び軟組織の損傷、インプラントの失敗の原因となる]
 - ・他社製品との併用はしないこと。[相互作用の項参照]
 - ・組み合わせ使用するフィクスチャの径に合わせて適切なタイプを選択し、各製品の混同に注意すること。

【形状・構造及び原理等】

本システムを構成する各製品の形状は以下の通り。
本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包装表示ラベルの記載を確認すること。

セメンティングポスト



品 番	サイズ
MN-MAC10	NP
MD-MAC10	SP
MW-MAC10	WP

セメンティングポスト



品 番	サイズ
MW-CTP10	ナロー WP

セメンティングポスト



品 番	サイズ
MD-WMAC1	ワイド SP
MW-WMAC1	ワイド WP

アナトミックアバットメント(単品)



NP

品 番	サイズ
MN-CPK41	H=1mm C=4mm
MN-CPK42	H=2mm C=4mm
MN-CPK43	H=3mm C=4mm
MN-CPK44	H=4mm C=4mm
MN-CPK61	H=1mm C=6mm
MN-CPK62	H=2mm C=6mm
MN-CPK63	H=3mm C=6mm
MN-CPK64	H=4mm C=6mm

SP

品 番	サイズ
MD-CPK41	H=1mm C=4mm
MD-CPK42	H=2mm C=4mm
MD-CPK43	H=3mm C=4mm
MD-CPK44	H=4mm C=4mm
MD-CPK61	H=1mm C=6mm
MD-CPK62	H=2mm C=6mm
MD-CPK63	H=3mm C=6mm
MD-CPK64	H=4mm C=6mm
MD-CPK81	H=1mm C=8mm
MD-CPK82	H=2mm C=8mm
MD-CPK83	H=3mm C=8mm

WP

品 番	サイズ
MW-CPK41	H=1mm C=4mm
MW-CPK42	H=2mm C=4mm
MW-CPK43	H=3mm C=4mm
MW-CPK44	H=4mm C=4mm
MW-CPK61	H=1mm C=6mm
MW-CPK62	H=2mm C=6mm
MW-CPK63	H=3mm C=6mm
MW-CPK64	H=4mm C=6mm
MW-CPK81	H=1mm C=8mm
MW-CPK82	H=2mm C=8mm
MW-CPK83	H=3mm C=8mm

エスティックアバットメント



品 番	サイズ
MD-A0010	SP 1mm
MD-P0030	SP 3mm
MW-P0010	WP 1mm

アングルアバットメント



品 番	サイズ
MN-AN020	NP 20°
MD-AN151	SP 15°
MD-AN251	SP 25°
MW-AN151	WP 15°

エスティックアングルアバットメント



品 番	サイズ
MD-A1510	SP 15° 1mm
MD-P1530	SP 15° 3mm
MD-A2510	SP 25° 1mm
MD-P2530	SP 25° 3mm
MW-P1510	WP 15° 1mm

ダイレクトテンポラリーシリンダー ヘックス付き



品 番	サイズ
MN-TCH13	NP
MD-TCH13	SP
MW-TCH13	WP

ダイレクトテンポラリーシリンドー ヘックス無し



品番	サイズ
MN-TCO13	NP
MD-TCO13	SP
MW-TCO13	WP

アバットメントスクリュー



品番	サイズ
MN-S0160	NP
MD-S0200	SP/WP ミニ
MD-S0220	SP/WP

【原材料】 チタン合金 (Ti-6Al-4V 合金)

【使用目的又は効果】

本品は歯の欠損部位の上下顎骨内に埋植し、人工歯などの歯科用補綴物を支持することによって咀嚼機能を回復させるために使用する。

【使用方法等】

【前準備】

アバットメント、アバットメントスクリューは未滅菌品のため、使用前にオートクレーブで滅菌を行う。

滅菌条件 温度:135℃ 時間:10 分間


【使用方法】

1. インプラントフィクスチャの埋入

- (1) 術前の診査診断によりインプラントフィクスチャの埋入位置 (SEVEN インプラントφ3.3 は下顎中切歯、下顎側切歯、上顎側切歯以外には使用しないこと。) を決定し、手術野の消毒、麻酔 (術者の判断により、単純局所麻酔又は静脈鎮静下での局所麻酔を行う)、歯肉及び骨膜の切開剥離を行い、埋入部位の歯槽骨骨面を十分に露出する。
- (2) 専用のドリルを用いて起始点を穿孔後、ボディライイン¹⁾で方向及び深さを確認しながら、埋入するインプラントフィクスチャの径に合わせて段階的にインプラント窩を拡大形成する。
- (3) インプラントフィクスチャに付属のファイナルドリル (コニカルドリル) を使用し、200 ~ 400rpm の回転数でインプラント窩の最終形成を行う。骨質が硬い場合には、カウンターシンクドリル²⁾を用いて皮質骨のカウンターシンク形成を行う。また、骨質が脆弱な場合は、ファイナルドリル (コニカルドリル) は使用せず、カウンターシンクドリル²⁾を用いて皮質骨のカウンターシンクのみを形成する。
- (4) 外部チューブを開封し、インプラントフィクスチャ及びカバースクリューが入った滅菌済内部チューブを滅菌された清潔域に取り出す。
- (5) 内部チューブのキャップを外し、チタンチューブに保持されたインプラントフィクスチャにコントラアングルハンドピースに装着したインサクションツール²⁾又はラチェットレンチ¹⁾に装着したラチェット用インサクションツール¹⁾を挿入し、口腔内へキャリアする。
- (6) インプラントフィクスチャを骨内に完全埋入する。(推奨埋入トルク: 35 ~ 60Ncm)
- (7) モーターアダプター²⁾又はヘックスドライバー³⁾を使用し、内部チューブのキャップからカバースクリューを取り外し、インプラントフィクスチャに装着する。
- (8) インプラントフィクスチャを骨内に完全に埋入し、歯肉で覆った状態で縫合を行い、下顎では3ヶ月以上、上顎では6ヶ月以上の治癒期間をおく。
- (9) オッセオインテグレーションの達成後、2次手術を行いカバースクリューを取り外した後、使用するアバットメント及び歯肉厚に応じて選択したヒーリングキャップをインプラントフィクスチャに装着し、歯肉を縫合し歯肉の治癒を待つ。

2. ダイレクトテンポラリーシリンドーによる暫間補綴物の作製

- (1) インプラントフィクスチャからキャップを取り外す。
- (2) インプレッションコーピング⁴⁾を装着し、通法に従い印象採得を行い、インプラントアナログ⁵⁾を用いて作業模型を作製する。
- (3) 模型内のインプラントアナログ⁵⁾に装着したダイレクトテンポラリーシリンドーを、対合歯とのスペースを考慮してカットする。このとき、補綴スクリュー頭部の露出を避けるため、ダイレクトテンポラリーシリンドーに付与したレジン維持機構の最下段の中央部 (右図) より低い位置ではカットしないこと。また、軸面の形成は強度が低下するため行わないこと。

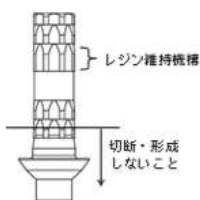

- (4) 通法に従い、最終補綴物を装着するまでの歯肉の治癒期間中に使用する暫間補綴物を、咬合負荷がかからないように設計・作製する。
- (5) 口腔内のインプラントフィクスチャにヘックスドライバー³⁾及びトルクレンチ³⁾を使用し、暫間補綴物と一体となったダイレクトテンポラリーシリンドーを 30Ncm の締め付けトルクで装着する。

3. 上部構造の作製

- (1) インプラントフィクスチャからキャップを取り外す。
- (2) インプレッションコーピング⁴⁾を装着し、通法に従い印象採得を行い、インプラントアナログ⁵⁾を用いて作業模型を作製する。
- (3) 作業模型上でアバットメントを選択・形成し、補綴物を作製する。アバットメントを形成する場合は長さの調整、歯肉貫通部のマージンの微調整にとどめ、軸面の形成は行わないこと。
- (4) 口腔内のインプラントフィクスチャにヘックスドライバー³⁾及びトルクレンチ³⁾を使用し、アバットメントを 30Ncm の締め付けトルクで装着し、補綴物をアバットメントにセメント固定する。

1) ~ 5) を付した製品は本品には含まれず、それらの販売名、認証・届出番号は下記のとおりである。

- 1) MIS インプラント外科用インスツルメント
(届出番号: 13B1X10236IS0004)
- 2) MIS サージカルキット
(認証番号: 227AFBZIO0057000)
- 3) MIS インプラント補綴用インスツルメント
(届出番号: 13B1X10236IS0005)
- 4) MIS インプレッションコーピング
(届出番号: 13B1X10236IS0006)
- 5) MIS インプラントアナログ
(届出番号: 13B1X10236IS0007)

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) インプラント治療に関して、患者に十分な説明を行い、同意を得ること。
- (2) 本品は口腔・顎顔面の解剖学的知識ならびにインプラント治療に関して十分な知識、技能、臨床経験を有する歯科医師が使用すること。
- (3) 本システムを使用する際は、術式マニュアル等をよく理解した上で、適切な手順に従い、インプラント治療を行うこと。但し、MIS 社により推奨された術式は、外科医の判断と専門的経験に置き換わるものではないことに留意すること。
- (4) 治療計画の立案時や外科処置の段階において、インプラントの種類を選択しインプラントの3次元的位置決めに影響する決定を行う際には、補綴医の積極的な関与を推奨する。
- (5) 本品をインプラントフィクスチャに装着する際は、フィクスチャの内面に血液等の付着物のない状態で乾燥させてから装着すること。[適切な嵌合が得られない場合がある。]
- (6) 術中に患者が本品を誤飲しないように十分注意して使用すること。
- (7) インプラントフィクスチャへの装着時は、推奨締結トルクを遵守すること。
- (8) 補綴物を支持するインプラントへのオーバーロードを防ぐために、咬合調整には特別の注意を払うこと。
- (9) 上部構造装着後は患者に対する定期的な検診とメンテナンスを行うこと。口腔衛生、習癖、咬合調整、補綴物の安定性に特別の注意を払うこと。
- (10) 患者が MRI 診断を受ける際は、インプラントが埋入されていることを担当医師に申告するよう患者への指導を行うこと。
- (11) アバットメントに対する技工操作は長さの調整、マージンの微調整にとどめ、軸面の形成は行わないこと。[強度が低下し、アバットメントの破折を招く恐れがある。]
- (12) ダイレクトテンポラリーシリンドーは適切な最終補綴物を装着するまでの間、歯肉の治癒を待つために暫間補綴物の支台として使用し、使用期間中、ダイレクトテンポラリーシリンドーに咬合負荷がかからないように暫間補綴物を設計・作製・装着すること。
- (13) 製品のトレーサビリティを確保するために使用した製品の製品名、サイズ及びロット番号を患者カルテに記載すること。

* (14) 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。
[自己認証による]

2. 相互作用 (他の医療機器との併用に関すること)

【併用禁忌・禁止】 (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本品は、当社が指定する製品と組み合わせで使用するように設計されています。指定以外の製品とは組み合わせで使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず想定外の不具合が起こる可能性がある。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

3. 不具合・有害事象

(1) 重大な不具合

インプラントの原材料の強度を上回る過大な側方力やねじり応力が繰り返し加わることにより、インプラントが金属疲労により破折するおそれがある。

(2) 重大な有害事象

1) インプラント埋入後の感染や早期のインプラントの加重により、インプラントが動揺又は脱落するおそれがある。

2) インプラント周囲骨の骨吸収

(3) その他の有害事象

裂開、治癒の遅延、感染、疼痛、腫脹、感覚障害、炎症を生じることがある。

これらの不具合・有害事象に対する再治療のためにインプラントの撤去又は再手術が必要な場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 開封せずに保管し、直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任外国製造医療機器等製造販売業者：デンツプライシロナ株式会社

製造業者：エムアイエスインプラントテクノロジーズ

(MIS Implants Technologies Ltd.)

製造国：イスラエル

*[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

**電話番号 0120-667-467