

ウェーブ・ワン ゴールド ガッタパーチャ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：本品は、ウェーブ・ワン ゴールド（電動式歯科用ファイル）で拡大形成された根管に用いる、コーン状のガッタパーチャである。

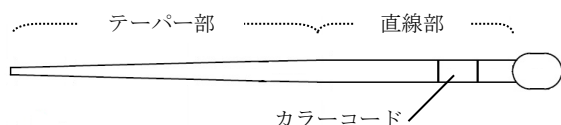

種類：4 種類

種類	先端直径 (mm)	直線部の直径 (mm)	カラーコード
スモール	0.18	1.03	黄
プライマリー	0.24	1.11	赤
ミディアム	0.33	1.12	緑
ラージ	0.43	1.10	白

※（全長：29mm、テーパ部：16mm、直線部：10.5mm）

材質：酸化亜鉛、ガッタパーチャ、他

【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いる。

【使用方法等】

1. 電動式歯科用ファイル「ウェーブ・ワン ゴールド」（医療機器認証番号：227AGBZX00033000）を用いて根管拡大形成を行います。
2. 最終拡大形成に使用したウェーブ・ワン ゴールドの種類に対応する本品を選択し、根尖から 1～2mm 程度離して本品の適合を確認します。
3. 根管を洗浄、乾燥させた後、本品に少量の歯科用根管充填シーラを塗布します。
4. 本品を根管内に挿入し、ヒートキャリアを用いて歯冠部側の余剰分を切断します。
5. ヒートキャリアで根管内の本品を加熱し、ブラガーを用いて本品を加圧します。その際、ヒートキャリアを引き出して本品の上部を切断します。
6. 大・小サイズのヒートキャリア及びブラガーを用いて 5. のステップを繰り返し、根尖部 3～4mm を確実に充填させます。
7. 歯冠部側は歯科用根管充填シーラを塗布し、本品を少しずつ加熱しながら、ブラガーで加圧して充填します。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

1. 本品を使用する前に必ずアルコールなどで消毒すること。
2. 使用するファイルシステムの取扱い方法に従い、根管拡大形成を行うこと。
3. 側方加圧法により充填させる場合は、通法のとおりスプレッダーを用いて凝縮させ、必要に応じてアクセサリポイントを使用すること。
4. 同一歯牙の複数根管に充填する場合は、シーラを全ての根管に同時に塗布すること。
5. 高圧蒸気滅菌や乾熱滅菌は行わないこと。
6. 完全抜髄した歯髄に対して適用すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意
(1) 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
(2) 本品は再使用しないこと。
(3) 本品を根管内に装着する時、根尖孔から突出させないように、十分注意すること。
(4) 本品を根管充填した後の数日間、打診痛が出る場合があります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管の条件〕

本品は、直射日光及び高温多湿を避けて涼しい場所に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社

※製造国 スイス
※製造業者 メルファー インストルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

〔問い合わせ窓口〕

カスタマーサービス

※電話番号 0120-667-467