

スマイルキュートミニ

【警告】

1. 器械の操作については、医師又は医療従事者の指導に従うこと。
[症状が悪化するおそれがあります。]
2. 鼻の病気がある場合や病気が疑われる場合は、本製品を使用する前に医師に相談すること。
[症状が悪化するおそれがあります。]
3. 出血したり、使用中に痛がる場合は、すぐに使用をやめただちに医師に相談すること。
[症状が悪化するおそれがあります。]
4. 購入後、初めてお使いになるときや、長期間ご使用にならなかったときは、使用前に清拭・消毒を行うこと。
[本製品は未滅菌で出荷されます。]
5. 吸引物をオーバーフローさせないこと。
吸引中は吸引量を常に監視すること。
[吸引ポンプや配管回路が吸引物で汚染され、故障や院内感染のおそれがあります。]

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

1. 採血用には絶対に使用しないこと。
[本製品は採血用ではありません。]
2. 鼻腔内の分泌物や粘液（鼻水）の吸引目的以外で使用しないこと。
[思わぬ事故の原因になります。]
3. 乳幼児の手の届く所に置かないこと。小さい部品もあります。
[誤って部品を飲み込んだり、けがのおそれがあります。]
4. 吸引瓶内に陰圧が残っている状態で電源スイッチを入れ吸引ポンプを作動させないこと。
[正常に起動できない場合があります。]


【形状・構造及び原理等】

＜主要部の形状と名称＞


外観図

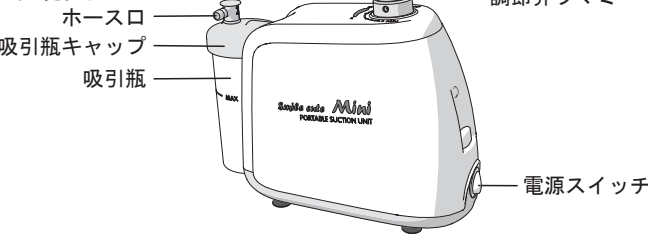


本体下面

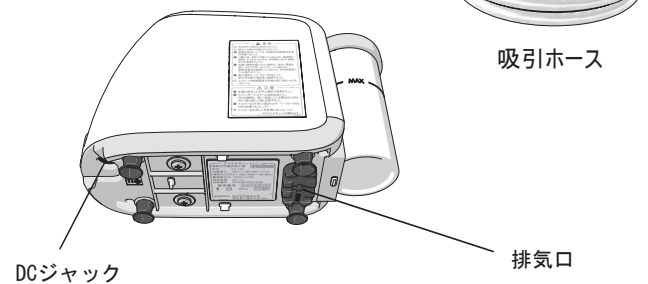

鼻水吸引キットA

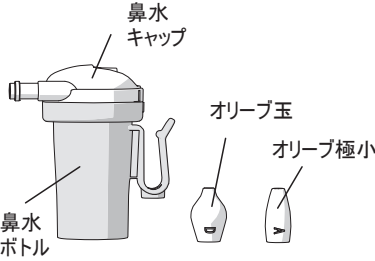

専用ACアダプター

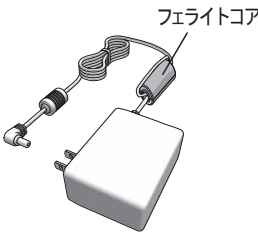

メーカー：ADAPTER TECH.
型 式：CDM024T-W120U

＜仕様＞

外形寸法：幅228mm×奥行き92.5mm×高さ166mm(突起物除く)
本体質量：約0.85kg(本体のみ)

*＜電気的定格＞


電源(専用ACアダプター)	入力：交流100V - 240V(50Hz - 60Hz)、出力：直流12V/2A
消費電力	交流100V(50-60Hz)：31VA(ACアダプター使用時)
電撃に対する保護の形式	クラスⅡ機器
電撃に対する保護の程度	B形装着部(オリーブ各種)
電磁両立性規格(EMD)	本製品はEMD規格『JIS T0601-1-2：2023』に適合しています。

*＜構成＞

構成部品／付属品(構成部品名)	材質／規格	個数
本体	アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体	1台
└ 吸引瓶セット	ポリカーボネート アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体	1個
専用ACアダプター	出力：直流12V/2A	1個
吸引ホース	シリコーンゴム	1本
鼻水吸引キットA	製造販売届出番号 11B1X00012000035	1個

＜動作原理＞

吸引ポンプが作動すると吸引瓶や鼻水吸引キットA内の空気が排気され陰圧状態になり、吸引を可能にする。オリーブから吸引された吸引物は、鼻水ボトルに溜まる。吸引圧調節器には、吸引回路以外からの空気を吸引することができる空気流入口があり、吸引回路以外から吸引する空気量を調節して吸引量(鼻水吸引キットA内の陰圧)を加減する。鼻水吸引キットA内の吸引物が一定量を超えた場合は、吸引ホースを通り吸引瓶に溜まる2重構造になっており、吸引ポンプ内に吸引物が到達することを防ぐ。

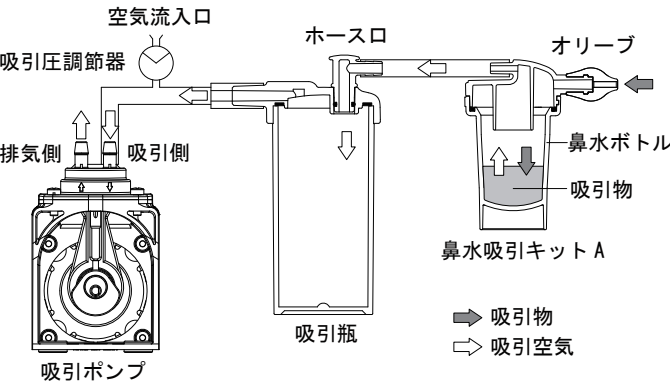

取扱説明書を必ずご参照ください

【使用目的又は効果】

医療施設及び在宅における処置のために、鼻腔内からの分泌物や粘液（鼻水）を吸引する。

【使用方法等】

＜使用環境＞

使用環境温湿度 : +5℃から+35℃ 30%RHから75%RH
(ただし結露なきこと)

＜使用方法＞

1. 使用の準備

- ① 本器を水平で安定した場所に置きます。
- ② 電源スイッチが『○』になっていることを確認します。
- ③ 専用ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックに接続します。
- ④ 電源プラグをコンセントへ差し込みます。
- ⑤ 吸引ホースに付属の鼻水吸引キットAを接続します。
- ⑥ ホース口に吸引ホースを接続します。
- ⑦ 電源スイッチを『Ⅰ』にすると、吸引ポンプが作動します。
- ⑧ オリーブの先端に指先をあて、吸引圧を確かめながら圧力を調節します。
- ⑨ 吸引圧の調節が完了しましたら電源スイッチを『○』にし、吸引ポンプを停止させます。

2. 使用中

- ① 滑りを良くするために、オリーブの先端を清潔な常水または精製水につけます。
- ② 電源スイッチを『Ⅰ』にし、吸引ポンプを作動させます。
- ③ オリーブの先端を患者の外鼻孔から挿入し、吸引を開始します。
- ④ 電源スイッチを『○』にし、吸引ポンプを停止します。

3. 使用後

- ① 電源スイッチが『○』になっていることを確認し、専用ACアダプターを取り外します。
- ② 吸引ホースを鼻水キャップから取り外します。
- ③ 鼻水キャップを回して鼻水ボトルから取り外します。
- ④ 吸引物を捨てます。

※ 吸引ホースや吸引瓶に吸引物が入ってしまった場合

- ① 吸引ホースをホース口から取り外します。
- ② 吸引瓶セットを本体から取り外します。
- ③ 吸引瓶キャップを回して吸引瓶から取り外します。
- ④ 吸引物を捨てます。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 可燃性ガス雰囲気内で使用しないこと。
[火災やけがのおそれがあります。]
2. 直接日光の当たる場所や火気の近くや車内など高温になる場所に設置、および保管しないこと。
[発火や故障、変形のおそれがあります。]
3. 走行中や運転者による操作は絶対に行わないこと。
[交通事故の原因になります。]
4. 本体や専用ACアダプターは、防水構造ではありません。水やお湯などで丸洗いや、水に浸したりしないこと。
[感電やショートによる火災のおそれがあります。]

5. 本器に異常を感じた場合は、直ちに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜くこと。
[感電やショートによる火災のおそれがあります。]
6. 絶対に分解や改造は行わないこと。
[発火や感電、けがのおそれがあります。]
7. 本器は水平で安定した場所で使用すること。
[落下によるけがや故障の原因になります。]
8. 長時間の連続運転はしないこと。
[長時間の連続運転を行うと吸引ポンプの寿命を早める原因になります。連続運転は30分間を限度とし、運転後は30分程度の休止時間を設けることを推奨します。]
9. 本製品の付属品及び本製品の別売品以外は使用しないこと。
[正常に動作しないおそれがあります。]
10. 本体を布団や毛布、タオルなどでくるんだ状態で使用しないこと。
[発熱や感電、故障の原因になります。]
11. 吸引瓶容量(100mL)以上の吸引物を連続して吸引しないこと。
100mL以上吸引する場合は、一度吸引瓶の中身を捨ててから再度吸引を行ってください。
[吸引物があふれ、本体内部に入ってしまうおそれがあります。]
12. 設定した吸引圧を変更する場合は、指先で吸引圧を確かめながら弱い吸引圧から段階的に調節すること。
[鼻腔内の粘膜を損傷するおそれがあります。]
13. 吸引中は感染防止のために、ディスポーザブル手袋などの装着を推奨します。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

次のような環境に保管してください。
温度：-10℃ から +60℃
湿度：10%RH から 75%RH (ただし結露なきこと)

＜耐用期間＞

＜使用環境＞に記載された環境条件のもと、1回3分程度の吸引を1日10回(合計30分/日)行ったと想定した場合、以下のとおりです。適切な保守・点検を行い、正規の保存状態を保った場合に限りです。

本体 5年(自己認証(当社データ)による)

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 吸引ホースなどの消耗品は、機器の作動に支障をきたす前に交換すること。
2. 使用前に必ず本体が正常かつ安全に動作することを確認すること。
3. 日常点検及び保守点検(ユーザー点検)を必ず行うこと。
4. 2年に1度は、専門業者による年次点検、整備を必ず行うこと。
[性能や安全性を維持できなくなります。]

＜洗浄・消毒について＞

注意：詳しい洗浄・消毒方法については
取扱説明書『お手入れ』の項をご参照ください。

1. 洗浄・消毒した部品は、十分に水洗いを行い、速やかに乾燥させたうえ、必ず清潔な場所に保管すること。
[乾燥が十分に行われていないと雑菌が繁殖し、感染の原因になります。]

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 Sanko Medical
埼玉県さいたま市西区中釘652番地
048-624-8121