

2006年7月13日作成（第1版）

承認番号：20100BZZ00834000

類別：機械器具80 はり又はきゅう用器具

管理医療機器 一般的名称：温灸器（71018000）

キューマツト

【禁忌・禁止】

次の方はキューマツトを使用しないでください。

・乳幼児 ・睡眠薬等を服用した人 ・酩酊状態の人

以下の方はご使用前に、医師にご相談の上ご使用ください

- ・ 糖尿病等の抹消循環障害による知覚障害のある人
- ・ 温度感覚過失が認められる人
- ・ 低温やけどをしたことがある人
- ・ 脊椎の骨折、捻挫、肉離れ等の急性とう痛性疾患の人
- ・ 悪性腫瘍のある人
- ・ 熱の高い人（38℃以上）

たとえば急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動）
の強い時期

- ・ 衰弱しているとき
- ・ 心臓障害のある人
- ・ 妊娠中又は出産直後の人
- ・ 安静を必要とする人
- ・ 適用部位に異常がある人
- ・ その他疾患のある人

1. 構成

基本構成品：発熱マット（大） 発熱マット（小）
コントローラー

なお、構成の詳細は本体付属の取扱説明書を参照してください。

2. 本体の寸法及び重量（単位はmm）

寸法：発熱マット（大）380×830（±10%）

：発熱マット（小）280×410（±10%）

重量：約2.5Kg

3. 電氣的定格


定格電源：AC100V 50/60Hz

定格消費電力：100W

発熱マット（大）70W

発熱マット（小）30W

【形状・構造及び原理等】

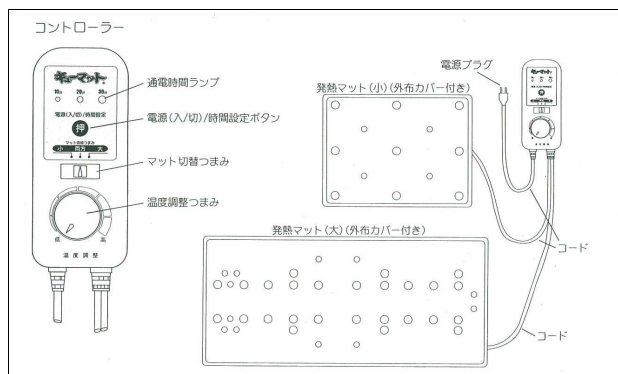

取扱説明書を必ずご参照ください。

4. 動作原理

本品は交流100V 50/60Hzを電源として使用する温灸器である。合成樹脂被膜式発熱体「大」及び「小」の2面を採用している。そして発熱体「大」には自動温度調節器（温度過昇防止器内蔵）としてバイメタル式のもの3個、温度ヒューズ式のもの3個、発熱体「小」には自動温度調節器（過昇防止器内蔵）としてバイメタル式のもの2個、温度ヒューズ式のもの2個をそれぞれ発熱体に直列に配し温度が113℃に上昇したとき温度ヒューズが作動し電流を遮断する。電源電線中間にはスイッチボックスがあり発熱体切替スイッチ、可変発熱体温度調節器（定格消費電力内での調節装置）及び30分電子タイマーを配し電子タイマーにて主回路及び発熱体回路を時間にて遮断している。

【使用目的、効能又は効果】

灸の代用。

【品目仕様等】

導子部温度：70℃以下

導子部（発熱部）面積：

発熱マット（大）2263cm²

発熱マット（小）640cm²

タイマー設定時間：30、20、10分

【操作方法又は使用方法】

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。

また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 使用前

①電源プラグを持って、交流100ボルトのコンセントに根元まで確実に差し込む。

②発熱マットの治療を行いたい部位にきちんと当てる。

このとき気孔（穴）部を接触部位側に当てること。

・発熱体（大）は平らな場所に広げて背中部にご使用ください。

・発熱体（小）は腹部に乗せてご使用ください。

2. 使用中

電源スイッチを押して希望の治療時間にセットし、治療を開始する。

・最初にスイッチを押すと通電と同時に治療時間30分にセットされる。

・2回目にスイッチを押すと治療時間20分にセットされる。

・3回目にスイッチを押すと治療時間10分にセットされる。

温度調節ツマミを回して温度調節をする。

1回の加温は10分～30分を目安にしてください

連続で使用するときは必ず必ず30分以上の間隔時間をお取りください。

3. 使用後

使用後は必ず電源プラグを持ってコンセントから抜く。

【使用上の注意】

禁忌・禁止

本添付文書赤枠内【禁忌・禁止】の項参照

①キューマットは温灸器です。禁忌・禁止事項に該当する方はご使用の前に必ず、医師と相談すること。またしばらく使用しても効果が現れない場合は医師又は専門家に相談すること。

1) 1時間をこえて使用する場合「高血圧の人」「不整脈のある人」、「睡眠時無呼吸症の人」及び「喘息の人」は医師と相談すること。

②使用条件及び環境上の注意事項

1) 幼児や身体の不自由な方は、付き添い無しでは使わない。

2) 一定時間ごとに身体を動かして使う。カバーをつけて必ず使う。

3) 本体各部やコントローラーに水やお湯等をかけない。針やはさみ等の鋭利な物を本体に落とさない。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- 4) 就寝用暖房器具としては使わない。
- 5) 低温やけどの恐れがありますので、睡眠薬やかぜ薬等の眠気を誘う薬を服用された人、深酒状態の人は使用しないでください。
- 6) コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使わない。
- 7) コードを傷つけたり、破損したり加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない。また重い物を載せたり挟み込んだりしない。
- 8) 交流100V以外では使わない。
- 9) ペットや家畜の暖房器具として使わない。
- 10) 定められた時間をこえて使用しないこと。
- 11) 浴室等の湿度の高いところでは使用しないこと。
- 12) 平らな場所で使用のこと。

③使用前の注意事項

- 1) コードや発熱マットにねじれや傷等の異常がないかよく点検してください。
- 2) 電源プラグを持って、交流100ボルトのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

④使用中の注意事項

- 1) 身体に異常を感じたときは、使用をただちに中止すること。
- 2) 絶対に折りたたみ、しわよせ使用しない。
- 3) 定格15A以上のコンセントを単独で使い、他の器具と併用しない。
- 4) 暖房器具として使用しないこと。また他の暖房器具他の治療器と併用して使用しないこと。
- 5) 使用中に機器に故障又は異常が発見されたときは電源を切り、ただちに使用を中止すること。
- 6) 使用中に異臭（こげる臭い）を感じたときは電源を切り、ただちに使用を中止すること。

- 7) 使用中、停電、カミナリ等が発生のときは温度調節を「低」にし、ただちに電源を切り使用を中止すること。

⑤使用後及び保管の注意事項

- 1) 使用後は操作つまみ等を元の位置に戻した後電源プラグを持ってコンセントから抜くこと。また濡れた手で抜き差ししないこと。
- 2) 本体、付属品等は次回の使用に支障がないように清浄し湿気の少ないところに整理、保管してください。

⑥機器の故障及び改造の注意事項

- 1) 故障した場合は勝手にいじらず、販売店または発売元に連絡すること。
- 2) 修理技術者以外の人は絶対に分解や、修理・改造は行わない。
- 3) 消耗品、残留物など、並びに寿命の終わった機器及び付属品の廃棄に関しては、地域に定める条例に従って廃棄してください。

【取扱上の注意】

- 1) 取扱を間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、使用上の注意を厳守してください。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 故障した場合は勝手にいじらず、販売店または発売元に連絡すること。
- 2) 機器は改造しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者及び製造業者：株式会社三幸ポライト
住所：茨城県東茨城郡城里町石塚1184の3
電話：029-288-2311

取扱説明書を必ずご参照ください。