

サミック・イリゲーションセット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止


【形状・構造及び原理等】

本品は滅菌済み医療用チューブなので、包装から取り出した後、そのまま使用可能である。
本品はポリ塩化ビニール（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。

2 スパイク・タイプ

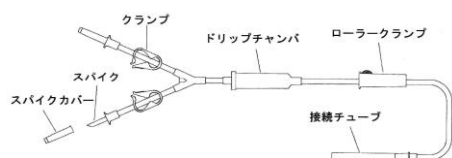

4 スパイク・タイプ

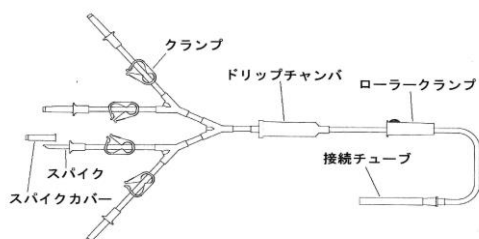

【使用目的又は効果】

本品は鏡視下手術及び検査時に内視鏡や関節鏡に接続するチューブであり、薬液を供給する目的に使用するものである。

【使用方法等】

本品は手技に精通した医師の管理下で使用する。

- 1、本品を使用する前に、包装及び本品の汚れ、破損等が無いことを確認し、清潔操作で本品を滅菌袋から取り出す。
- 2、全てのクランプを閉じ、灌流液等の容器を準備し、スタンド等に吊り下げる。
- 3、スパイク・カバーを取り去り、容器のスパイク刺入部にスパイクを刺入する。
- 4、灌流液等の容器のクランプを開放し、灌流液等の容器を圧迫したり、緩めたりしてプライミングを行う。
- 5、次いで、内視鏡のクランプを開放し、残りの回路の洗浄を行う。
- 6、回路の洗浄時にドリップチャンバーを逆さにし、灌流液等を完全に満たした後、ドリップ・チャンバーを軽くたたき、気泡を除去する。
- 7、回路の洗浄が完了した後、クランプを閉じる。
- 8、接続チューブを内視鏡又は関節鏡に接続する。
- 9、ローラークランプにより、灌流液等の流量を調節する。

9、使用中の灌流液の容器が空になる前に、他の容器の回路を開放して、空になった容器の回路を閉じる。更に灌流液等が必要な場合には、空の容器を新しい容器へ取り換えを行う。

使用方法に関連する使用上の注意

- 1、クランプやローラークランプの開閉操作は確実に行うこと。
- 2、本品の接続箇所が確実に接続されていることを十分確認すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1、包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 2、内容物が正しく入っており、瑕疵の無いことを確認すること。
- 3、組み立て操作などの際に、汚染が起きないように注意すること。
- 4、本品の総ての接続箇所、緩み、外れが無いことを常に確認すること。
- 5、使用中は、チューブの折れによる閉塞に注意すること。
- 6、本品はディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用のみで使い捨て、再使用しないこと。
- 7、包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で医療用廃棄物として処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

有効期間・使用の期限

使用期限は外箱に記載[自己認証（当社データ）]による]

包装

10セット／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社サミック・インターナショナル
住 所：東京都八王子市小宮町171-1
電話番号：042-649-2373
外国製造業者：ポリメディキュア社(Poly Medicure Ltd.)
外国製造業者国名：インド(India)