


ステンレス聴診器ダブル

JMDN：13755000

【禁忌・禁止】

本品に強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。又、医療の目的以外では使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

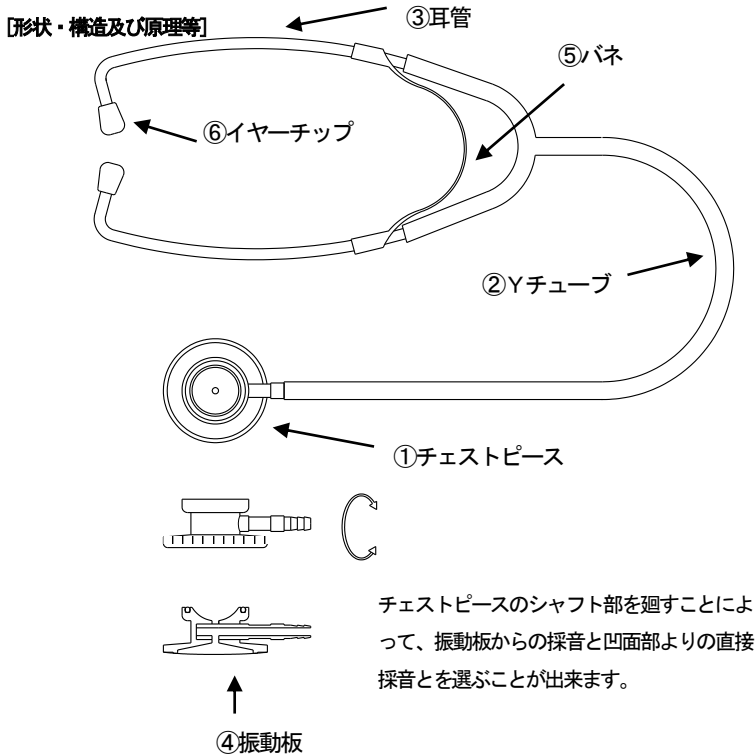

【使用方法等】

- ①チェストピース、②Yチューブ、③耳管の各部品をしっかりと連結します。
- 耳管部イヤーチップを亮耳に差し込み チェストピースの振動板を人体の皮膚に押し当てて聴診します。

【使用上の注意】

- チェストピースの変形、Yチューブの劣化、耳管の破損等直接聴診に影響を与える部品は必ず交換してください。

【保管方法及び有効期間等】

使用環境：温度 10℃-40℃ 湿度 30%-75%（結露無し）
保管環境：温度 -5℃-50℃ 湿度 30%-85%（結露無し）
高温、多湿、直射日光は避けて保管してください。
標準的な使用期間の目安：3年（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】

- 各部品の消毒は消毒用アルコールの清拭をお願いします。
又、シンナーなどの有機溶剤での拭取りはしないでください。
- 取り外しの出来るイヤーチップ、Yチューブは軟質の石鹸水で洗ったあと乾いた布等でよくふき取ってください。

【包装】

包装単位 1個

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名 株式会社 三 恵
住 所 千葉県市原市八幡海岸通1969-33, 34
電 話 番 号 0436-41-1820

製造業者名 ウェンゾウボカングインストルメント
中華人民共和国
Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd

《原理》

心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置であり、振動板からの採音と凹面部よりの直接採音する構造である。

【使用目的又は効果】

本品は、心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置である。
又、臨床・病棟活動に用いる汎用聴診器である。

【品目使用】

本品は採音部で採った音を耳に伝える。

名称	材質	寸法
①チェストピース	ステンレス	直径46mm×20mm
②Yチューブ	塩化ビニール	直径8mm、長さ60cm
③耳管	真鍮、クロームメッキ	直径5mm
④振動板	テトロン繊維入りエポキシ樹脂	直径43mm、厚さ0.2mm
⑤バネ	鋼	厚さ0.7mm
⑥イヤーチップ	塩化ビニール	直径12×13mm