

機械器具 68 歯科印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器 歯科印象採得用トレー JMDN16350000


トリックハンドル

【形状・構造及び原理等】

ハンドル部と支柱部からなる

色調：クリアピンク、クリアブルー

形状：ハンドル部

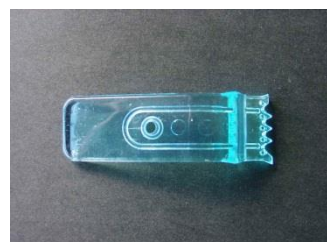

支柱部




原材料：アクリルレジン

【使用目的又は効果】

成型された本品を使うことにより作業時間の短縮させる


【使用方法等】

○前歯部が残存していない症例

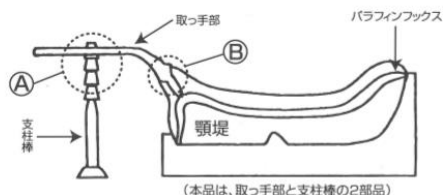

- 1) 支柱棒のAの部分で、ハンドルの高さを設定する
- 2) 模型本体に通常どおりの作業で樹脂を覆い被せる
- 3) Bの部分に樹脂を少し巻き付ける。巻き付ける時にはハンドルの維持の部分にレジンをなじませてからご使用いただくと結合が強化されます
- 4) トレーレジンの硬化後差し込んだ支柱棒を外す。支柱棒はくびれの部分でカットできます

II 前歯部が植立している場合

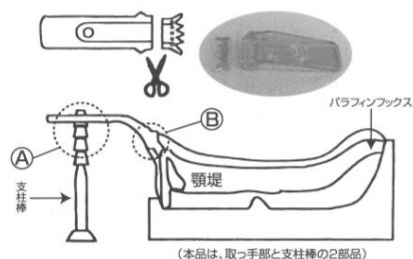

- 1) Bの維持部を予め2/3ほど図のようにカットする
- 2) 後は（I）同様の手順で作業を行って下さい。

【保管方法及び有効期限等】

〔保管方法〕

- ・本材は高温多湿の場所を避けて保管すること。
- ・本材は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】 株式会社サポート
住所 〒581-0845
大阪府八尾市上之島町北 1-60-3
電話番号 072-923-0139