

器 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 汎用X線診断装置用非電動式患者台（40654000）

特定保守管理医療機器/設置管理医療機器 X線リーダー撮影台 S A - R W

【形状・構造及び原理等】

1. 形状


本装置は、以下の各ユニットから構成されます。

標準構成

1) 支柱部 2) カセットホルダ 3) 上部連結部

4) 下部連結部

外形寸法（mm）幅 445×奥行 128×高 1850

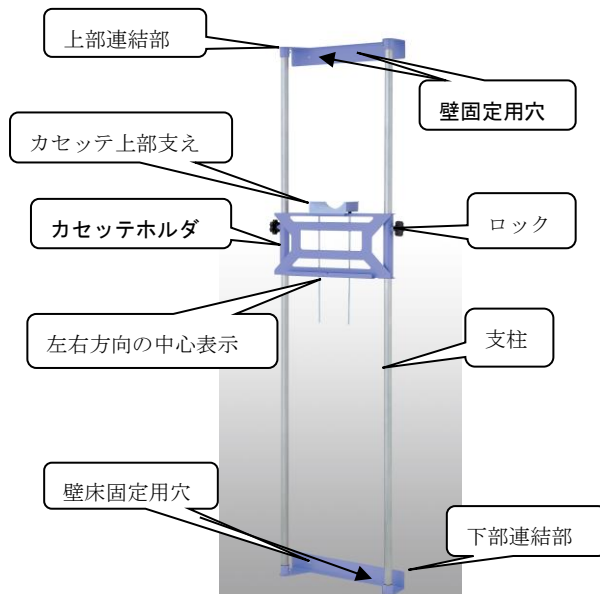

2. 原理

本装置は、汎用X線装置を必要とする立位撮影の場合に被検者の撮影部位に位置決めをするよう設計されている。カセットホルダ部の上下移動は手動で行い固定は両側のロックを締め付ける。

【使用目的又は効果】

本装置はリーダー撮影台として、X線発生装置と組合せて、カセットホルダに必要に応じてグリッドを装着しフィルムカセット又はCRカセットをセットして、立位撮影に用いる撮影台です。2本のパイプにカセットホルダのフランジにより上下移動を手動で行う。

【使用方法等】

1. 使用方法

カセットホルダにグリッド、カセットを装着し、カセット上部支えのあご受け部を基準に、撮影部位の高さに合せ両側のロックを締め付けて固定します。X線装置のX線管とカセット中心位置を合せ、X線撮影を行います。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 未整備の状態で使用すると、部品の落下や装置の転倒、破損による健康被害につながる恐れがあります

【使用目的又は効果】

本装置はリーダー撮影台として、X線発生装置と組合せて、カセットホルダに必要に応じてグリッドを装着しフィルムカセット又はCRカセットをセットして、立位撮影に用いる撮影台です。2本のパイプにカセットホルダのフランジにより上下移動を手動で行う。

【使用方法等】

1. 使用方法

カセットホルダにグリッド、カセットを装着し、カセット上部支えのあご受け部を基準に、撮影部位の高さに合せ両側のロックを締め付けて固定します。X線装置のX線管とカセット中心位置を合せ、X線撮影を行います。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 未整備の状態で使用すると、部品の落下や装置の転倒、破損による健康被害につながる恐れがあります。
- 2) 被検者、操作者、介助者は装置の可動部分や装置と壁や床等に挟まれない様に常に注意を払うこと。
- 3) カセットホルダ部には正面から垂直な方向に 250 N以上の力を加えないこと。
- 4) 基台への被検者の乗り降りは、転倒などの恐れがあるので十分注意すること。
- 5) カセットホルダにはカセット重量以上の荷重をかけないこと。
- 6) 上下バランスはカセットホルダ、グリッド、カセットの全重量が下降側に働くためロック状況によりカセットホルダ部は下降します。重くなるほど急激な下降となりますのでカセットの落下等には十分注意すること。
落下に対しての問い合わせには、応じられない場合がございますのでご了承ください。
- 7) カセットの装着は必ず両手で、手を挟まないよう注意すること。
- 8) 可動部には被検者の方が触れないように注意すること。特に上下ロック等に触れるとカセットホルダが下がりが手を挟むことがあります。
- 9) 位置決定後は必ず2ヶ所のロックで確実に固定すること。
- 10) 高齢者、小児等、介助者が必要な場合の検査は介助者を付けること。

〈妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用〉

妊婦、妊娠の疑いのある者、授乳中の者、及び小児へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

動作保証条件（撮影室内）

温度 10～40℃ 湿度 30～85%RH 気圧 700～1060 hPa

結露しないようにご注意ください。

〈耐用期間〉

5 年〔自己認証（当社データ）による〕

（但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定の保守点検と定期交換部品・消耗品の交換をした場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある）

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検（日常点検）〉

1) 目視による点検

(1) 外観の確認

装置の外観に異常がないことを確認すること。

- ・附属品などに損傷や磨耗がないこと。

(2) 清浄性の確認

清浄な状態であることを確認すること。

- ・装置に被検者の体液、血液、汚物及び造影剤等が付着していないこと。

(3) 装置周辺の確認

装置の妨げになる物がないこと。

2) 機能の確認

(1) 装置の正常状態の確認

装置の正常状態・正常動作を確認すること。

- ・可動部の動作
- ・異音、異臭がないことを確認すること。

(2) 装置の固定状態の確認

装置（附属品含む）の固定を確認すること。

(3) 安全機能の確認

所定の安全機能が正常に作動することを確認すること。

(4) 故障時の対応

修理が完了するまで装置の使用を禁止するよう指示・表示をしてください。人身事故や火災発生につながる恐れがあります。

(5) 洗浄・消毒

- ・本装置を清掃する際、シンナーやベンジンなどの溶液やコンパウンドなどの研磨剤を含むものを使用しないこと。
- ・金属やゴムに対して強い腐食性を持つ塩素系消毒剤、または消毒剤の取扱説明書に金属・プラスチック及びゴムの内一つでも使用が不適と注意書きのある消毒液を使用しないこと。

〈定期交換部品及び消耗品〉

特に設定はしておりません。使用頻度、操作方法、経年劣化により下記部品交換が発生する場合があります。

- ・ロックハンドル
- ・カセットホルダ 1 式

〈業者による保守点検〉

1 年ごとの定期点検を弊社または弊社の指定する業者に依頼すること。

項目	点検時期	点検内容
上下ロック	1 年	ロックネジ部注油
各部重要固定部	1 年	固定ねじの増し締め

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：三共医療機株式会社

住所：大阪市平野区加美東 6-14-22

〔販売業者（販売店）〕