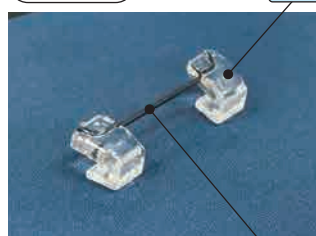
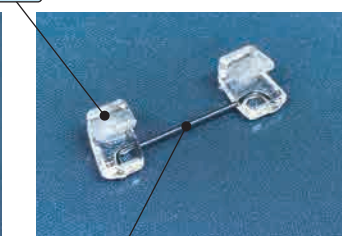
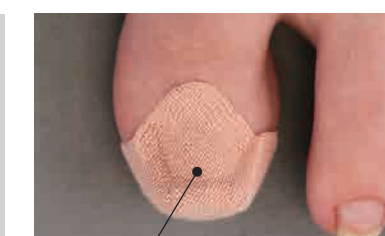


巻き爪ワイヤーガード

【禁忌・禁止】

- ・爪に割れ、ヒビ等がある場合、爪が極端に薄い方や厚い方は使用しないでください。
- ・爪の周辺が化膿、炎症など皮膚に異常がある場合は使用しないでください。



【形状・構造及び原理等】 形状記憶合金ワイヤーの反発力で巻き爪を引き上げ、爪が食い込んだ痛みを緩和し、再発を防ぐ。

形 状	フック		
			
	形状記憶合金ワイヤー		保護テープ
構 造	フック／ポリカーボネート 形状記憶合金ワイヤー／チタン・ニッケル合金 保護テープ／綿・ポリウレタン・アクリル系粘着剤	原 理	巻き爪の両端に「フック」を装着し、間に渡した形状記憶合金ワイヤーの反発力により、巻き爪の食い込みを逆方向に引き上げることで爪内側を拡張し、圧迫部の圧力を軽減、圧迫を防止する。

- 【使用目的又は効果】
- ・巻き爪による食い込み、圧迫の防止。
 - ・巻き爪の引き上げとクセづけ。
 - ・巻き爪による痛みの緩和、再発防止。

【使用方法等】 巻き爪の両先端部に「フック」を装着し、指先全体を保護テープで覆ったもの。

ご使用前に必ずお読みください。

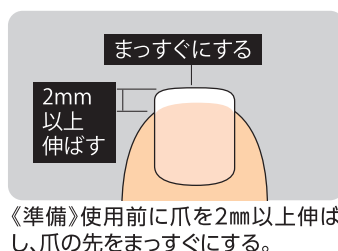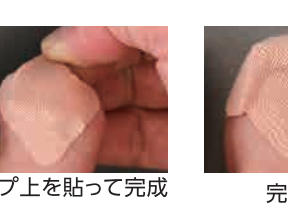 まっすぐにする 2mm 以上 伸ばす 《準備》使用前に爪を2mm以上伸ばし、爪の先をまっすぐにする。	1  爪の片方にフックを深く差し込みます。	2  もう片方のフックを爪に差し込みます。形状記憶合金ワイヤー部分が爪の真ん中にくるようにします。	3  イメージ 保護テープを台紙からはがし保護テープの真ん中に形状記憶合金ワイヤーがくるようにします。	4  保護テープ左右を貼ります。
5  保護テープ下を貼ります。	6  保護テープ上を貼って完成です。	 完 成	・装着する際に、形状記憶合金ワイヤーの弾力で本体が跳ねる場合がございます。紛失しないよう十分注意して装着してください。 ・衛生上1日毎の入浴時には本体とテープを外してください。入浴後、本体を装着して新しいテープで固定してください。 ・形状記憶合金ワイヤー弾力の特性上、本体の使用目安は約1ヶ月です。 ・靴をはく際は、先がゆったりとした靴をはいてください。 ・毎日継続して使用されることをおすすめします。	

【使用上の注意】

- ・最初は1～2時間くらいの使用で不快感や痛みが無いかを確認し、問題がない場合には使用時間を徐々に長くしてください。
- ・爪に割れ、ヒビ等がある場合、爪が極端に薄い方、また爪の周辺が化膿、炎症など皮膚に異常のある場合は使用しないでください。
- ・極端に爪が薄い場合や厚い場合、また爪が極端に湾曲している場合は専門医に相談してください。
- ・粘着テープ類によるかぶれやアレルギー症状のある方は使用しないでください。
- ・血行障害、糖尿病等の方は使用前に専門医に相談してください。
- ・使用中や使用後に痛み、発疹、かゆみ、かぶれ、うっ血等の異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。
- ・テープをはがす時は強く引っ張らず、皮膚を傷つけないようにゆっくりとはがしてください。
- ・本体のお手入れは中性洗剤を使用し、シンナー等の薬品は使用しないでください。
- ・直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- ・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・本来の目的以外での使用はお止めください。
- ・改造して使用することはおやめください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・お子様の手の届かない場所に、室温で保管してください。
- ・直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- ・形状記憶合金ワイヤー弾力の特性上、本体の使用目安は約1ヶ月です。

【保守・点検に係る事項】

- ・フック部分にヒビや欠けがないか確認してから装着してください。
- ・衛生上1日毎の入浴時には本体とテープを外してください。入浴後、本体を装着して新しいテープで固定してください。
- ・本体のお手入れは中性洗剤を使用し、シンナー等の薬品は使用しないでください。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 サンメディカル
千葉県野田市目吹96番地 電話:04-7123-8515

【発売元】

株式会社サイプラス
奈良県橿原市八木町3-1-16