

取扱説明書

医療用品04 整形用品
一般医療機器 ギブス包帯 JMDNコード:33056000

プラスウォーク 外反母趾矯正プロテクター

ご使用前に必ずお読みください。

【禁忌・禁止】

- ・高温なものには近づけないでください。・裂傷や化膿がある部位には使用しないでください。
- ・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。
- ・製品素材にアレルギーのある方は使用しないでください。


【形状・構造及び原理等】

外反母趾や捻挫などで変形した足の親指関節を正常位置に固定し、治癒を補助するために用いる器具である。足から足親指に添うように形成されたプラスチック材と、その内側に弾力性のある緩衝材を貼り付けた本体をベルトで固定し、足親指関節の変形を矯正する。

【使用目的又は効果】

外反母趾や捻挫によって変形した足の親指に本品をベルトで固定し、足親指関節の変形を矯正する。

形状

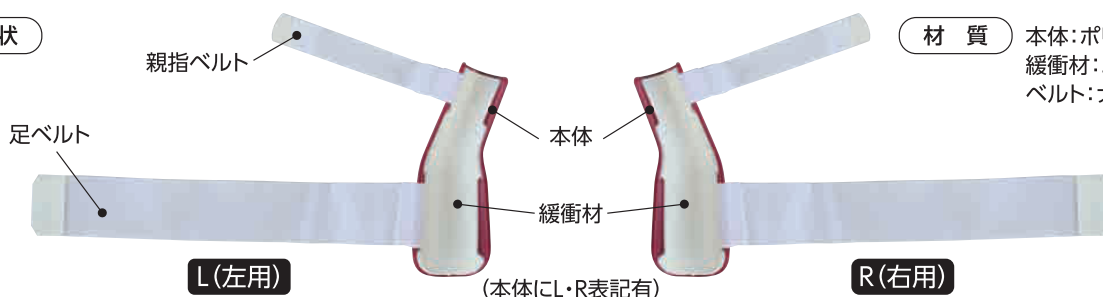

材質

本体:ポリプロピレン
緩衝材:エラストマー
ベルト:ナイロン

【使用方法】(右足の場合)※左足の場合は逆になります。



ベルトを広げた上に足を合わせ、商品の向きを確認します。



足側面に本体を合わせて、足ベルトを穴に通します。



足ベルトを引っ張り、面テープを固定します。



親指ベルトを穴に通して親指を外側に引っ張ります。



そのまま親指ベルトを下から回します。親指ベルトを面テープで固定します。



完成です。

※過度にベルトを引っ張って使用すると伸びてしまう場合がありますので注意ください。



- ※最初はゆるめに装着し、徐々に締め付けを調節しながら使用してください。
- ※本品は就寝時の使用を目的としています。装着しながらの歩行は破損等の原因になりますのでお止めください。

【使用上の注意】

- ・最初は1～2時間くらいの使用で不快感や痛みが無いかを確認し、問題がない場合には使用時間を徐々に長くしてください。
- ・使用中や使用後にかゆみ、かぶれ、発疹等が現れた場合には直ちに使用を中止し専門医に相談してください。
- ・血行障害、糖尿病等の方は使用前に専門医に相談してください。
- ・本体に割れ等が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・緩衝材が変色または色移りする場合がありますが、性能上は問題ありません。
- ・熱い物の近くや熱風のかかる場所には置かないでください。
- ・汚れた場合には中性洗剤で水洗いして、しっかり乾燥させてから使用してください。
- ・使用中の歩行は本品が破損する場合がありますので、お止めください。
- ・本来の目的以外での使用はお止めください。
- ・改造して使用することはお止めください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・直射日光や高温多湿を避けて室温で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前にはヒビや傷が無いことを確認してください。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 サンメディカル
千葉県野田市目吹96番地 電話:04-7123-8515

【発売元】

株式会社サイプラス
奈良県橿原市八木町3-1-16

商品についてのお問い合わせは 野口健康相談室まで ☎ 0120-895-020 (平日9:00～17:00 土日祝休み)

取扱説明書

医療用品04 整形用品
一般医療機器 ギブス包帯 JMDNコード:33056000

プラスウォーク 外反母趾矯正プロテクター

ご使用前に必ずお読みください。

【禁忌・禁止】

- ・高温な物には近づけないでください。・裂傷や化膿がある部位には使用しないでください。
- ・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。
- ・製品素材にアレルギーのある方は使用しないでください。


【形状・構造及び原理等】

外反母趾や捻挫などで変形した足の親指関節を正常位置に固定し、治癒を補助するために用いる器具である。足から足親指に添うように形成されたプラスチック材と、その内側に弾力性のある緩衝材を貼り付けた本体をベルトで固定し、足親指関節の変形を矯正する。

【使用目的又は効果】

外反母趾や捻挫によって変形した足の親指に本品をベルトで固定し、足親指関節の変形を矯正する。

形状

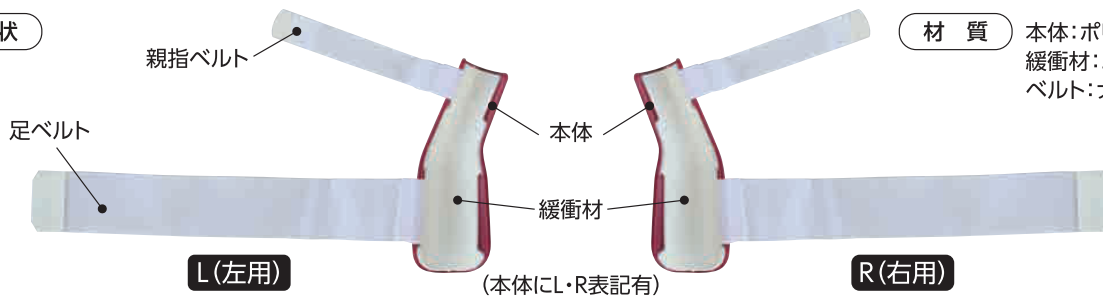

材質

本体:ポリプロピレン
緩衝材:エラストマー
ベルト:ナイロン

【使用方法】(右足の場合)※左足の場合は逆になります。



ベルトを広げた上に足を合わせ、商品の向きを確認します。



足側面に本体を合わせて、足ベルトを穴に通します。



足ベルトを引っ張り、面テープを固定します。



親指ベルトを穴に通して親指を外側に引っ張ります。



そのまま親指ベルトを下から回します。親指ベルトを面テープで固定します。



完成です。

※過度にベルトを引っ張って使用すると伸びてしまう場合がありますので注意ください。



- ※最初はゆるめに装着し、徐々に締め付けを調節しながら使用してください。
- ※本品は就寝時の使用を目的としています。装着しながらの歩行は破損等の原因になりますのでお止めください。

【使用上の注意】

- ・最初は1～2時間くらいの使用で不快感や痛みが無いかを確認し、問題がない場合には使用時間を徐々に長くしてください。
- ・使用中や使用後にかゆみ、かぶれ、発疹等が現れた場合には直ちに使用を中止し専門医に相談してください。
- ・血行障害、糖尿病等の方は使用前に専門医に相談してください。
- ・本体に割れ等が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・緩衝材が変色または色移りする場合がありますが、性能上は問題ありません。
- ・熱い物の近くや熱風のかかる場所には置かないでください。
- ・汚れた場合には中性洗剤で水洗いして、しっかり乾燥させてから使用してください。
- ・使用中の歩行は本品が破損する場合がありますので、お止めください。
- ・本来の目的以外での使用はお止めください。
- ・改造して使用することはお止めください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・直射日光や高温多湿を避けて室温で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前にはヒビや傷が無いことを確認してください。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 サンメディカル
千葉県野田市目吹96番地 電話:04-7123-8515

【発売元】

株式会社サイプラス
奈良県橿原市八木町3-1-16

商品についてのお問い合わせは 野口健康相談室まで ☎ 0120-895-020 (平日9:00～17:00 土日祝休み)

取扱説明書

医療用品04 整形用品
一般医療機器 ギブス包帯 JMDNコード:33056000

プラスウォーク 外反母趾矯正プロテクター

ご使用前に必ずお読みください。

【禁忌・禁止】

- ・高温なものには近づけないでください。・裂傷や化膿がある部位には使用しないでください。
- ・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。
- ・製品素材にアレルギーのある方は使用しないでください。


【形状・構造及び原理等】

外反母趾や捻挫などで変形した足の親指関節を正常位置に固定し、治癒を補助するために用いる器具である。足から足親指に添うように形成されたプラスチック材と、その内側に弾力性のある緩衝材を貼り付けた本体をベルトで固定し、足親指関節の変形を矯正する。

【使用目的又は効果】

外反母趾や捻挫によって変形した足の親指に本品をベルトで固定し、足親指関節の変形を矯正する。

形状

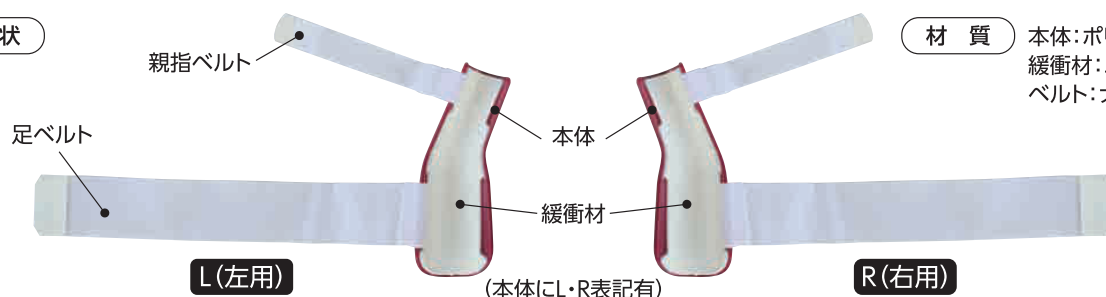

材質

本体:ポリプロピレン
緩衝材:エラストマー
ベルト:ナイロン

【使用方法】(左足の場合) ※右足の場合は逆になります。



ベルトを広げた上に足を合わせ、商品の向きを確認します。



足側面に本体を合わせて、足ベルトを穴に通します。



足ベルトを引っ張り、面テープを固定します。



親指ベルトを穴に通して親指を外側に引っ張ります。



そのまま親指ベルトを下から回します。親指ベルトを面テープで固定します。



完成です。

※過度にベルトを引っ張って使用すると伸びてしまう場合がありますので注意ください。



- ※最初はゆるめに装着し、徐々に締め付けを調節しながら使用してください。
- ※本品は就寝時の使用を目的としています。装着しながらの歩行は破損等の原因になりますのでお止めください。

【使用上の注意】

- ・最初は1～2時間くらいの使用で不快感や痛みが無いかを確認し、問題がない場合には使用時間を徐々に長くしてください。
- ・使用中や使用後にかゆみ、かぶれ、発疹等が現れた場合には直ちに使用を中止し専門医に相談してください。
- ・血行障害、糖尿病等の方は使用前に専門医に相談してください。
- ・本体に割れ等が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・緩衝材が変色または色移りする場合がありますが、性能上は問題ありません。
- ・熱い物の近くや熱風のかかる場所には置かないでください。
- ・汚れた場合には中性洗剤で水洗いして、しっかり乾燥させてから使用してください。
- ・使用中の歩行は本品が破損する場合がありますので、お止めください。
- ・本来の目的以外での使用はお止めください。
- ・改造して使用することはお止めください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・直射日光や高温多湿を避けて室温で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前にはヒビや傷が無いことを確認してください。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 サンメディカル
千葉県野田市目吹96番地 電話:04-7123-8515

【発売元】

株式会社サイプラス
奈良県橿原市八木町3-1-16

商品についてのお問い合わせは 野口健康相談室まで ☎ 0120-895-020 (平日9:00～17:00 土日祝休み)