

取扱説明書

機械器具 52 医療用拡張器
一般医療機器 医療用拡張器 JMDNコード:70969001


巻き爪矯正シール

ご使用前に必ずお読みください。

【禁忌・禁止】

- ・爪に割れ、ヒビ等がある場合、爪が極端に薄い方や厚い方は使用しないでください。
- ・爪の周辺が化膿、炎症など皮膚に異常がある場合は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】 高弾性樹脂製のフックで巻き爪を引き上げ、爪が食い込んだ痛みを緩和し、再発を防ぐ。

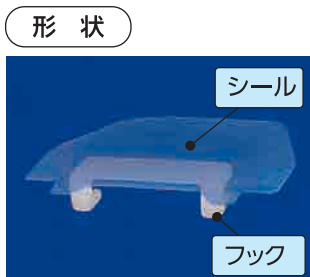


材質 フック／ポリアセタール
シール／ポリエチレン、アクリル系粘着剤

原理 巻き爪の両端に「フック」を装着し、当該品全体の反発力によって両端を引き上げ、爪の内側を拡張することにより食い込みを軽減する。そのことで痛みを緩和し再発を防止する。

【使用目的又は効果】

- ・巻き爪による痛みの緩和、再発防止
- ・巻き爪による食い込み、圧迫の防止
- ・巻き爪の引き上げとクセづけ

【使用方法】

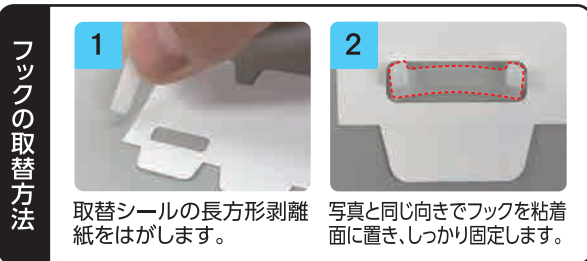

- ※衛生上、毎日の入浴時にフック付シールを外してください。入浴後フックをシールから取り外し、新しい取替シールに貼りつけて爪に装着してください。
- ※材質の特性上、フックの使用期間は3日です。古いフックは捨て、4日目からは新しいフック付シールを使用してください。
- ※靴をはく際は、先がゆったりとした靴をはいてください。 ※毎日継続して使用されることをお勧めします。

【使用上の注意】

- ・最初は1～2時間くらいの使用で不快感や痛みが無いかを確認し、問題がない場合には使用時間を徐々に長くしてください。
- ・爪に割れ、ヒビ等がある場合、爪が極端に薄い方、また爪の周辺が化膿、炎症など皮膚に異常のある場合は使用しないでください。
- ・極端に爪が薄い場合や厚い場合、また爪が極端に湾曲している場合は専門医に相談してください。
- ・粘着シール類によるかぶれやアレルギー症状のある方は使用しないでください。
- ・血行障害、糖尿病等の方は使用前に専門医に相談してください。
- ・使用中や使用後に痛み、発疹、かゆみ、かぶれ、うっ血等の異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。
- ・シールをはがす時は強く引っ張らず、爪を傷つけないようにゆっくりとはがしてください。
- ・フックのお手入れは中性洗剤を使用し、シンナー等の薬品は使用しないでください。
- ・本来の目的以外での使用はお止めください。
- ・改造して使用することはおやめください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・直射日光や高温多湿を避けて室温で保管してください。
- ・材質の特性上、フックの使用期間は3日です。古いフックは捨て、4日目からは新しいフック付シールを使用してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前にはヒビや傷が無いことを確認してください。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】 株式会社 サンメディカル
千葉県野田市目吹96番地 電話:04-7123-8515

【発売元】 株式会社サイプラス
奈良県橿原市八木町3-1-16

商品についてのお問い合わせは 野口健康相談室まで ☎ 0120-895-020 (平日9:00～17:00 土日祝休み)