

取扱説明書

医療用品(05) 副木
一般医療機器 手・指用副木 JMDNコード:16210000

腱鞘炎サポーター手首ガード

ご使用前に必ずお読みください。

【禁忌・禁止】

- ・高温な物には近づけないでください。・化膿のある部位には使用しないでください。
- ・裂傷がある部位には使用しないでください。・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。
- ・製品素材にアレルギーのある方は使用しないでください。

【形状・構造等】

金属製の板(ボーン)を中核に、親指から手首までを覆うように製作された本体と締め付け用ベルトで構成されている。

【原理】

親指から手首にかけてボーンを添え、本体とベルトで固定することによって、親指の関節及び手首が腱鞘炎や関節炎、バネ指などの疾患により治癒のために安静が必要な部位を固定することによっての痛みを緩和し、疾患部位の回復を補助する。


【使用目的又は効果】

手首関節及び親指関節を固定し関節の動きを制限することにより、腱鞘炎(ドケルバン病等)、バネ指、関節炎等からの痛みを緩和し回復を補助する。

材 質

本 体:ナイロン
ポリエステル
ポリウレタン
ボーン:アルミニウム

形 状

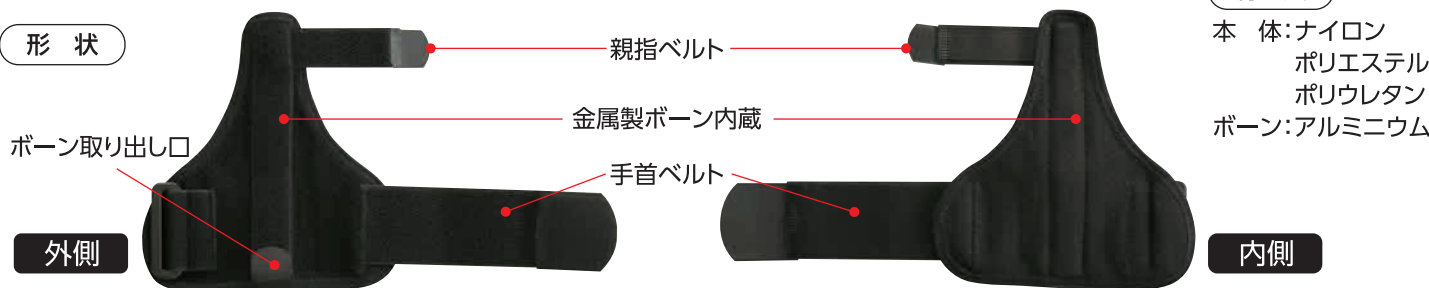

【使用方法(左右兼用)】 親指から手首にかけて装着する。



装着しやすいように、手首ベルトと親指ベルトの面テープを固定します。

面テープで固定した状態で手首と親指に本体を通します。



ボーンが手首の側面に沿う位置に合わせながら手首ベルトを巻いて固定します。



親指をボーンに合わせながら親指ベルトを巻いて調整固定します。

完成です。

【ボーンの手入れ方】



ボーン取り出し口を開き、ボーンを取り出してください。



入れる際は写真のような向きでボーンを入れてください。



※最初は緩めに装着し、徐々に締め付けを調整しながら使用してください。

【使用上の注意】

・最初は1~2時間くらいの使用で不快感や痛みが無いことを確認し、問題がない場合には使用時間を徐々に長くしてください。・血行障害、糖尿病等の方は使用前に専門医に相談してください。・使用中や使用後に痛み、発疹、かゆみ、かぶれ、うっ血等の異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。・本体のお手入れは中性洗剤を使用し、シンナー等の薬品は使用しないでください。・洗濯の際はボーンを抜き取り、本体のみを手洗いしてください。本体が十分乾いたことを確認してからボーンを差し込み、使用してください。・改造はしないでください。・就寝中は使用しないでください。・本来の目的以外での使用はお止めください。

【保管方法及び有効期間等】

・直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

・装着前に破れ等が無いことを確認してください。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 サンメディカル
千葉県野田市目吹96番地 電話:04-7123-8515

【発売元】

株式会社 サイプラス
奈良県橿原市八木町3-1-16

商品についてのお問い合わせは 野口健康相談室まで ☎0120-895-020 (平日9:00~17:00 土日祝休み)