

取扱説明書

医療用品(05) 副木
一般医療機器 手・指用副木 JMDNコード:16210000

メディカル指らく

ご使用前に必ずお読みください。

【禁忌・禁止】

- ・高温な物には近づけないでください。・化膿のある部位には使用しないでください。
- ・裂傷のある部位には使用しないでください。・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。
- ・製品素材にアレルギーのある方は使用しないでください。

【形状・構造等】



ボーン

【使用目的又は効果】

指関節に添ってボーンを密着させ、指関節の動きを制限することで、バネ指や腱鞘炎、関節炎等からの痛みを緩和し回復を補助する。

【原理】

製品に内蔵されたボーンを指関節内側に添う形に密着させることで当該関節の動きを制限することにより、バネ指や腱鞘炎、関節炎等の疾患により治療のために安静が必要な部位の痛みを緩和し、回復を補助する。

材 質

本 体:エラストマー
ボーン:ポリプロピレン

【使用方法】指関節に装着して使用する。


※本体表面にエラストマー注入口の処理痕がありますが性能品質には問題ありません。



上下を確認してください。



ボーンが指の内側になるように装着してください。

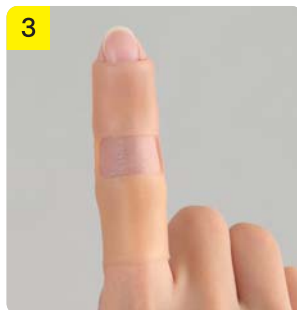

できるだけ指関節を覆うように調整してください。



完成です。



※初めは短時間から使用して、徐々に使用時間を長くしてください。

【使用上の注意】

・最初は1～2時間くらいの使用で不快感や痛みが無いことを確認し、問題がない場合は使用時間を徐々に長くしてください。・血行障害、糖尿病等の方は専門医に相談してください。・使用中や使用後に痛み、痒み、かぶれ、発疹、うっ血等の症状が発生した場合は、直ちに使用を中止し医師や薬剤師に相談してください。・**素材の性質上、本品に亀裂が入ると切れる原因となりますので、無理に引っ張ったり、爪等で傷が入らないよう注意してください。**・熱い物に触れないでください。・無理に曲げるとボーンが折れてしまう可能性があります。・汚れた場合には中性洗剤で水洗いして、しっかり乾燥させてから使用してください。また、汚れを吸収しやすい材質ですので、洗浄しても汚れが落ちない場合があります。・**装着しづらい場合は乾燥後パウダー等を本品にまぶして使用してください。**・改造はしないでください。・就寝中は使用しないでください。・本来の目的以外での使用はお止めください。

【保管方法及び有効期間等】

・直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・着用前に破れや傷が無いことを確認してください。
- ・パウダーを使用すると装着しやすくなります。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 サンメディカル
千葉県野田市目吹96番地 電話:04-7123-8515

【発売元】

株式会社 サイプラス
奈良県橿原市八木町3-1-16

商品についてのお問い合わせは 野口健康相談室まで ☎0120-895-020 (平日9:00～17:00 土日祝休み)