

取扱説明書

医療用品03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 再使用可能な指保護具 JMDNコード:42050000

指関節まもりん内布タイプ

ご使用前に必ずお読みください。

【禁忌・禁止】

- ・高温な物には近づけないでください。
- ・化膿のある方は使用しないでください。
- ・裂傷がある部位には使用しないでください。
- ・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。
- ・製品素材にアレルギーのある方は使用しないでください。


【原理】

弾力性のある材質によって、ヘバーデン結節やリウマチ等で変形した関節を保護し、物理的接触による痛みを緩和する。

形 状



構 造

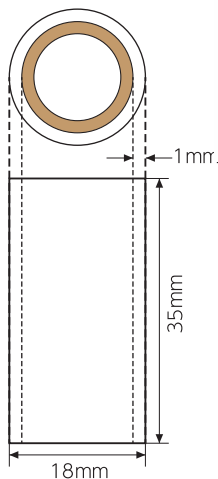

素 材

ナイロン、エラストマー

【使用方法】

指関節にはめて使用する。



- 締め付けがきつく感じる場合は、伸ばし広げてから装着してください。

【使用目的又は効果】

弾力性のある材質によって、ヘバーデン結節やリウマチ等で変形した関節を保護し、物理的接触による痛みを緩和する。



※初めは短時間から使用して、徐々に使用時間を長くしてください。

裏面へ続く ➡

【使用上の注意】

- ・最初は1～2時間くらいの使用で不快感や痛みがないかを確認し、問題がない場合は使用時間を徐々に長くしてください。
- ・血行障害、糖尿病等の方は専門医に相談してください。
- ・体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こす事があります。このような症状が発生した場合は、直ちに使用を中止し医師に相談してください。
- ・素材の特性上、本品に亀裂が入ると切れる原因となりますので、無理に引っ張ったり、爪等で傷が入らないよう注意してください。
- ・熱い物に触れないでください。
- ・汚れた場合には中性洗剤で水洗いして、しっかり乾燥させてから使用してください。ただしエラストマー部分は汚れが付着しやすい素材ですので、洗浄しても汚れが落ちない場合があります。
- ・表面の粘着が気になる場合はパウダーをまぶしてから使用してください。
- ・エラストマーの特性上、みかん等柑橘類の果汁及び除光液が付着すると、硬化し破れるおそれがあります。
- ・締め付けがきつく感じる場合は、伸ばし広げてから装着してください。
- ・装着後、指先の変色等の異常が見られた場合は使用を中止してください。
- ・改造して使用することはおやめください。
- ・就寝中は使用しないでください。
- ・本来の目的以外での使用はお止めください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・直射日光や高温多湿を避けて室温で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・着用前に破れや傷がないことを確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社 サンメディカル

千葉県野田市目吹96番地 電話：04-7123-8515

【発売元】

株式会社 サイプラス

奈良県橿原市八木町3-1-16

商品についてのお問い合わせは

野口健康相談室まで

 0120-895-020 (平日9:00～17:00 土日祝休み)