

取扱説明書

医療用品03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 再使用可能な指保護具 JMDNコード:42050000

夜用ヘバーデン指関節サポーター

ご使用前に必ずお読みください。

【禁忌・禁止】

- ・高温な物には近づけないでください。
- ・化膿のある方は使用しないでください。
- ・裂傷がある部位には使用しないでください。
- ・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。
- ・製品素材にアレルギーのある方は使用しないでください。

【原理】

クッション性のある素材によって、ヘバーデン結節やリウマチ等で変形したり痛みがある指関節を保護し、物理的接触による痛みを緩和する。


【使用目的又は効果】

クッション性のある素材によって、ヘバーデン結節やリウマチ等で変形したり痛みがある指関節を保護し、物理的接触による痛みを緩和する。

形 状



構 造

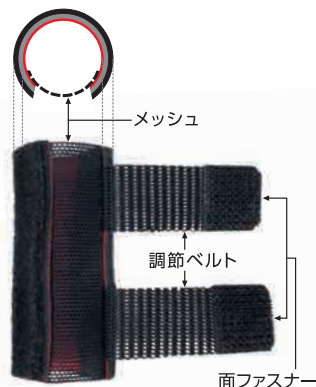

品質表示

本体:クロロプレンゴム、チタン合金
層、ナイロン、ポリウレタン
メッシュ:ナイロン、ポリウレタン
調節ベルト:ナイロン、ポリウレタン
面ファスナー:ナイロン

【使用方法】


就寝時に手指の関節部にはめて使用する。



メッシュ部分が手の平側になるように手指の関節部に装着します。



2本の調節ベルトを引っ張り、面ファスナーで固定します。

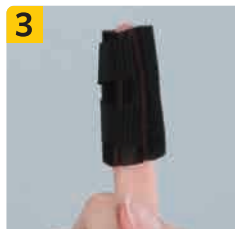

締め付け具合を確認して完成です。



※初めは短時間から使用して、徐々に使用時間を長くしてください。

裏面へ続く ➡

【使用上の注意】

- 体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こす事があります。このような症状が発生した場合は、直ちに使用を中止し医師に相談してください。
- 最初は1～2時間くらいの使用で不快感や痛みが無いかを確認し、問題が無い場合には使用時間を徐々に長くしてください。
- 使用中や使用後に痛み、発疹、かゆみ、かぶれ、うっ血等の異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、専門医に相談してください。
- 血行障害、糖尿病などの方は使用前に専門医に相談してください。
- 洗濯の際は手洗いをして、しっかり乾燥させてから使用してください。
- 摩擦により他の物に色移る場合があります。
- 改造はしないでください。
- 破損した場合は使用しないでください。
- 商品本来の目的以外では使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- 室温で保管してください。
- 直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- 着用前に破れが無いことを確認してください。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社サンメディカル

千葉県野田市目吹96番地 電話:04-7123-8515

【発売元】

株式会社サイプラス

奈良県橿原市八木町3-1-16

商品についてのお問い合わせは

野口健康相談室まで

 0120-895-020 (平日9:00～17:00土日祝休み)