

リカバリー臓器脱サポーター

GS1コード



【禁忌・禁止】

- ・重度の血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の方は使用しないでください。
- ・使用素材に対する過敏症がある方は使用しないでください。
- ・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。

形状・構造及び原理等



原理

構成物の弾性を利用し、脱肛部を押さえる。

使用目的又は効果

股部の脱肛(子宮脱、膀胱嚢、直腸嚢等)症状を有する者が、該当部分にパッドを当てて押さえることにより、下垂した臓器を正常な位置に保持する。

使用方法等

- ・通常のショーツの上に装着してください。
- ・サイズが適切か確認後装着してください。緩すぎる場合効果が減少するため、適切なサイズをお選びください。

(cm)	M~L	LL~3L
ウエスト	64~77	77~93
ヒップ	87~100	97~110


パッドを横から見た図
低い 高い



パットの高い方が奥になるようにベルト部内側のポケットに入れます。



Y字ベルトを面テープで固定し、ショーツなどの上から着用します。

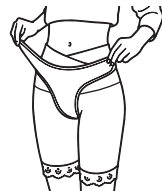

患部にかかる圧力は、面テープの留め方を変えることで調節してください。

使用上の注意

- ・治療用としてお使いの場合は、医師の指示により、適切な保護具をご使用ください。
- ・糖尿病、高血圧などの症状がある方は医師にご相談ください。
- ・体に疾患等がある方は医師にご相談ください。
- ・動脈血循環に障害のある方は着用をお控えください。
- ・装着する際にキズ・はれもの・湿疹などの異常がある時は使用しないでください。
- ・使用目的以外の部位には使用しないでください。
- ・使用中のズレやゆるみ、しわが生じたときは正しく装着しなおしてください。
- ・しわ、折れのないように着用してください。
- ・長時間にわたって使用する際は、適度に着脱を繰り返してご使用ください。
- ・適応サイズの範囲外の方は着用しないでください。
- ・使用中、又は使用後、皮膚に湿疹・かぶれ・かゆみなど症状が現れた時は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。

- ・ほつれの原因になりますので、爪や鋭利なものでも引っ掛けないでください。
- ・本品は女性用です。
- ・始めのうちは1~2時間程度の短い時間でご利用いただき、痛みや痒み等の異常が無いが確認して、徐々に使用時間を長くしてください。
- ・改造は行わないでください。
- ・生地を強く引っ張ったり、こすり合わせたりしないでください。破損したり色落ちする場合があります。
- ・アレルギー体質、湿疹、汗でかぶれ易い方は、ご使用をお止めください。
- ・着用サイズが合っていない場合は、生地の端がめくれているいたり、よじれたりする場合があります。
- ・塩素系及び酸素系漂白剤のご使用はお避けください。
- ・水や汗等で濡った状態で強い摩擦を受けると他のものに色移りするおそれがあります。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。

保管方法及び有効期間等

- ・室温で保管してください。
- ・直射日光や高温多湿を避けて保管してください。

保守・点検

- ・着用前に破れやほつれが無いことを確認してください。

洗濯絵表示

※洗濯ネット使用



- 材質/身生地:ポリエステル、ポリウレタン 付属パッド:TPE ●原産国/中国

〈発売元〉株式会社 ブランドウ

名古屋市中区東横1-4-13 アイ高岳5F
お客様窓口/0120-657-502
(祝日を除く平日 10:00~18:00)

〈製造販売元の氏名又は名称及び住所等〉

株式会社 サンメディカル

千葉県野田市目吹96番地
電話/04-7123-8515

