

機械器具 7 5 脱疾治療用具
一般医療機器 脱疾治療用ストラップ（JMDNコード：30883000）


sara24 ペルヴィスアップショーツ

【禁忌・禁止】

- ・重度の血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の方は使用しないでください。
- ・使用素材に対する過敏症がある方は使用しないでください。
- ・体に疾患等がある方は医師にご相談ください。
- ・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。

【形状・構造及び原理等】

■形状

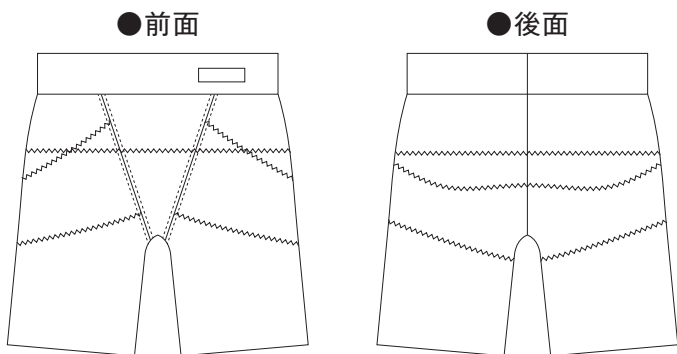

■原理

構成物の弾性を利用し、脱疾部を押さえる。

【使用目的又は効果】

下垂した膀胱を正常な位置に保持し、膀胱瘤による頻尿や尿漏れ等の症状を改善、予防する。

【使用方法等】

- 1：適用サイズの範囲内であることをご確認ください。
- 2：本品を通常のショーツと同様に着用してください。
- 3：身体に適切にフィットするよう位置を調整してください。

【使用上の注意】

- ・治療用としてお使いの場合は、医師の指示により、適切な保護具をご使用ください。
- ・糖尿病、高血圧などの症状がある方は医師にご相談ください。
- ・体に疾患等がある方は医師にご相談ください。
- ・動脈血循環に障害のある方は着用をお控えください。
- ・装着する際にキズ・はれもの・湿疹などの異常がある時は使用しないでください。
- ・就寝中の使用はお止めください。
- ・使用中のズレやゆるみ、しわが生じたときは正しく装着しなおしてください。
- ・しわ、折れのないように着用してください。
- ・長時間にわたって使用する際は、適度に着脱を繰り返してご使用ください。
- ・適応サイズの範囲外の方は着用しないでください。
- ・使用中、又は使用后、皮膚に湿疹・かぶれ・かゆみなど症状が現れた時は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- ・「ほつれ」の原因になりますので、爪や鋭利なもので引っ掛けないでください。
- ・本品は女性用です。
- ・始めのうちは1～2時間程度の短い時間でご使用いただき、痛みや痒み等の異常が無いか確認して、徐々に使用時間を長くしてください。
- ・改造は行わないでください。
- ・使用目的以外の部位には使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温で保管してください。
- ・直射日光や高温多湿を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・着用前に破れやほつれが無いことを確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 サンメディカル
千葉県野田市目吹9 6 番地
電話：04-7123-8515

はじめに


この度は数ある製品より本製品をお選びいただきありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書をよくお読みください。なお、取扱説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

製品との相性や、使用感には個人差があります。初めはご自宅でお試しいただくことをおすすめします。

着用方法


下記を参考に形を整えてご着用ください。

step 1

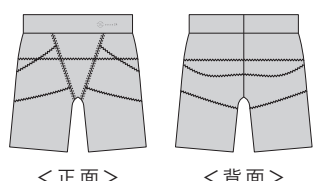


<正面> <背面>


step 2

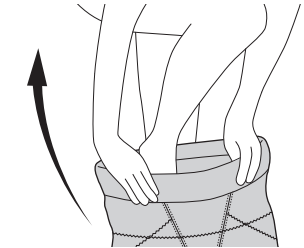

step 3

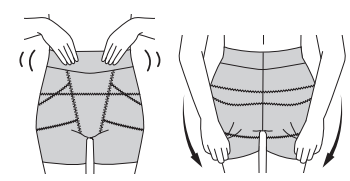

step 4

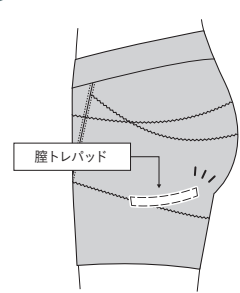

前後を確認してください。

ショーツに足を通して、ウエストまで丁寧に引き上げます。

表生地を上下左右に引くなどしてウエスト、ヒップ部分を整えます。

陰トレパッドの位置が会陰から肛門あたりにきているか確認します。

お手入れの方法

- 洗濯により色落ち・色移りするおそれがあります。
- 他のものと分けて洗濯してください。
- 洗濯後はすぐに形を整え、陰干ししてください。
- 摩擦や汗、水濡れ等により多少色落ち・色移りする場合があります。
- 下着用洗剤や衣類用の中性洗剤をご使用ください。
- アイロンがけはできません。

品質表示

本体／ナイロン91%、ポリウレタン9%
別布／ポリエステル69%、ポリウレタン31%
メッシュ／ナイロン76%、ポリウレタン24%
クロッチ／綿100%



シミやニオイが気になる場合

1. つけ置き液を作る

40℃以下のぬるま湯に下着用洗剤や衣類用の中性洗剤を加えます。分量は使用する製品の表示に従ってください。水温が高すぎると汚れが変質して落ちにくくなる場合がありますのでご注意ください。

2. 30分～2時間つけ置く

本製品を手で押してつけ置き液に沈め、30分～2時間つけ置きして水気をしぼります（長時間のつけ置きは衣類を傷める原因になります）。手荒れ予防にゴム手袋の使用をおすすめいたします。

3. 汚れを落としてすすぐ

生地を傷めないよう、やさしくこすって汚れを落とし、きれいな水で泡が出なくなるまですすいでください。

4. すぐに乾かす

タオルなどに包んで軽く叩くか、手でやさしくしぼって水気をとってから形を整えて、陰干ししてください。

返品・交換について

本製品は直接肌につける衛生商品のため、お客様都合による返品・交換の対応はいたしかねます。あらかじめご了承ください。