

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 JMDN 70962001


デプスゲージ ショート／ロング

【警告】

1. クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)の患者、又はその疑いのある患者に使用した器具を再使用する場合には、最新の国内規制、ガイドラインを遵守すること。[二次感染の恐れがある。]

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造等

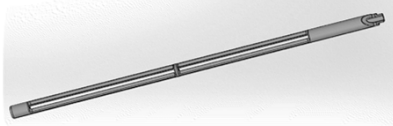

2.原材料

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

骨接合手術等の骨手術に用いる手術器械であり、手動式のものに
限る。本品は、再使用可能である。

【使用方法等】

1.使用前の準備

- (1)本品は未滅菌品である。使用前に、当社の推奨する又は本品
使用施設指定の滅菌方法及び滅菌条件で滅菌してから使用
すること。(保守・点検に係る事項参照)
- (2)必ず目視等で外観検査を行い、傷、割れ、有害なまくれ、錆、
亀裂、変形(曲がり)・破損の異常がないことを確認する。

2.使用方法

本品の取扱説明書(手術手技書)を参照し使用すること。

3.使用後

本品は直ちに洗浄・消毒し、高圧蒸気滅菌を行う。
(保守・点検に係る事項参照)

【使用上の注意】

1.使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- (1)金属や異物に対しての重篤なアレルギーがある患者
[アレルギー発現のおそれがある]
- (2)重度骨粗鬆症、癌、腎臓透析、骨減少症の患者
[原則使用しないこと]

2.重要な基本的注意

使用前に必ず洗浄(保守・点検に係る事項参照)・滅菌(推奨滅菌
条件参照)を行うこと。

3.不具合・有害事象

本品の使用により起こり得る不具合・有害事象を以下に記載する。
以下のような不具合・有害事象が認められた場合は、使用を中止
し直ちに適切な処置を行うこと。

(1)重大な不具合

- ・本品の変形、折損及び破損
- ・金属疲労による製品の破損

(2)重大な有害事象

- ・不十分な滅菌等による感染
- ・アレルギー反応
- ・神経、血管、身体組織の損傷
- ・空気・血管凝固等による塞栓
- ・骨折、穿孔、骨の亀裂
- ・麻痺
- ・不適切な取扱いによる破損片等の体内留置

(3)その他の有害事象

- ・痛み、不快、違和感

4.高齢者への適用

骨粗鬆症など、骨形成、骨量、骨質が十分でない患者は、術中に
過度の力(応力)を加えることにより、上記の不具合・有害事象が発
生する可能性がある為、慎重に使用すること。

5.妊婦、産婦、授乳婦及び、小児等への適用

小児へ適用する際、骨形成、骨量、骨質が十分でない患者は、術
中に過度の力(応力)を加えることにより、上記の不具合・有害事象
が発生する可能性がある為、慎重に使用すること。

6.過剰使用

- ・本品は、意図された適正な使用方法を遵守すること。意図しない
使用方法の場合、応力による変形、破壊の可能性がある。
- ・応力による変形により、正しく機能しなくなる。又は、経年の度重
なる使用による反復的な応力により疲労を起こし破損にいたること
がある。([使用方法等]1.使用前の準備を参照)

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保
管すること。
- ・貯蔵・保管の際、変形や損傷の原因となりうる硬い物への接触や
衝撃を避ける様、注意を払うこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 日常・使用前の点検

使用(滅菌)前及び使用後は、汚れ、傷、曲がり等の損傷・異常が
ないことを確認する。

2.洗浄

付着している血液・体液・組織・薬品等の除去が必要な場合、洗浄
及び乾燥を行うこと。洗浄に使用する水は、蒸留水や脱イオン水
を使用すること。

[洗浄・乾燥方法]

- ・使用後は、出来るだけ早く洗浄、濯ぎ等で汚れを除去し、血液等
異物が付着していないことを確認すること。
- ・汚れの残存がある箇所はブラッシングによる用手的洗浄を追加
すること。
- ・洗浄には柔らかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属たわし、ク
レンザー(磨き粉)等は、機器表面が損傷するため使用しないこと。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し適正
な濃度で使用する。
- ・塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因となるので、出来
るだけ使用を避けること。使用中に付着したときには、水洗いを
すること。
- ・強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあ
るので、使用を避けること。
- ・洗剤の残留がないように十分に濯ぎをすること。仕上げ濯ぎには、
浄化水(濾過、蒸留、脱イオン水等)を用いることを推奨する。
- ・洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャー・ディスイネクタ等)
で洗浄するときには、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱
い説明書を遵守し、器具の隙間部等に異物等が無いことを確認
出来るまで洗浄すること。
- ・洗浄装置を使用するときには、鋭利部同士又は他の器械と接触
して損傷することがないように注意すること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

取扱説明書(手術手技書)を必ずご参照ください。

3.保守

[使用者による保守点検事項]

- ・使用前の点検において、手術に必要な医療機器がすべて揃っていることを確認すること。
- ・使用(滅菌)前、及び使用後は、汚れ、傷、曲がり等の損傷・異常がないことを点検すること。
- ・点検後セット・包装をし、必要に応じて高圧蒸気滅菌をすること。
なお、滅菌のためのセット・包装にあたっては、確実に滅菌出来るよう配慮すること。

4.滅菌

本品は未滅菌品である為、使用前及び再使用前には必要に応じて滅菌を行うこと。

滅菌は適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌装置で標準的滅菌条件、又は医療機関で滅菌バリデーションが検証され有効性が立証された滅菌条件で行うこと。

・推奨滅菌方法

高圧蒸気滅菌(プレバキューム)

滅菌温度	保持時間
115～118℃	30分
121～124℃	15分
126～129℃	10分

・過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の禁止

本品に過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌を使用しないこと。

[表面が褪色し、性状に影響を及ぼします]

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 佐文工業所

電話番号 : 025-382-2171