

2021年4月8日作成(第一版)

取扱説明書

製造販売届出番号:11B3X10017000021

医療用品04 整形用品
一般医療機器 ギブス包帯 33056000

夜用メディカルゆびただし


ご使用前に必ずお読み下さい。

【禁忌・禁止】

- ・外反母趾や捻挫で通院中の方は、ご使用前にかかりつけの医師に相談し、医師の指示に従ってご使用下さい。
- ・化膿、裂傷のある部位には使用しないで下さい。
- ・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止め下さい。

【形状・構造及び原理等】

(形状)右足用

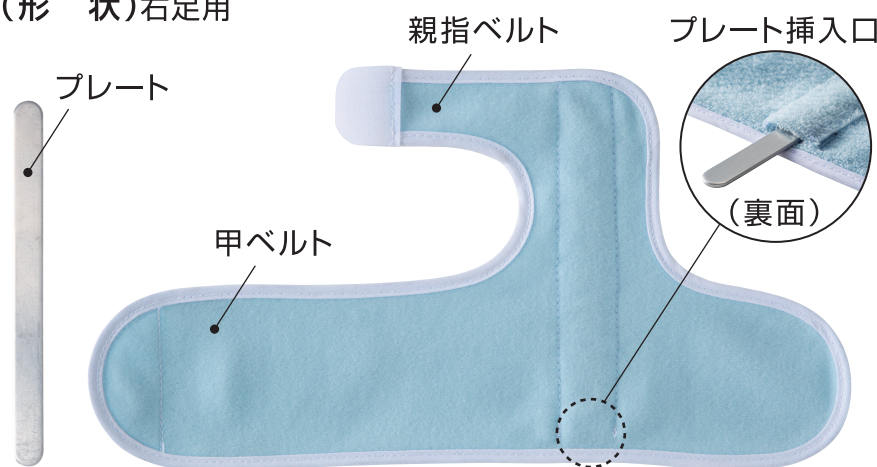

(原理)

外反母趾や捻挫で変形した足の親指を正常位置に保持するよう形成されたアルミ製プレートを親指側面に添え、親指ベルトと甲ベルトで固定。治療のために安静が必要な足の親指を正常位置に矯正し固定することで、痛みを緩和し回復を補助する。

〈使用目的又は効果〉

外反母趾や捻挫で変形した足の親指を矯正し固定することで、痛みを緩和し回復を補助する。

(材質)

(本体):ナイロン、綿、ポリエステル
(プレート):アルミニウム

【使用方法】(右足用の場合)



プレートがしっかり挿入されていることを確認し、プレート部分を親指の側面に合わせて甲ベルトを装着します。



親指ベルトを装着します。

〈矯正力の調整〉

親指ベルトと甲ベルトの締め付けを強くすると、矯正力も強くなります。初めのうちはゆるめにして、痛み等の異常が無いよう矯正力を調節して下さい。

〈プレートの外し方〉

挿入口はプレートが飛び出さないよう、袋状の閉じこみになっています。一旦プレートを親指側へ寄せて、袋状の閉じこみにかからないように取り出して下さい。

【使用上の注意】

- 初めのうちは就寝前に、寝転んだ状態か椅子に座った状態で1時間程度で使いいただき、痛みやかゆみ等の異常が無いか確認してから、就寝中に使用するようにして下さい。
- 使用中、または使用後に痛みやかゆみ等の異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、専門医にご相談下さい。
- 本品は就寝用です。
- 本品を着用しての歩行は、破損の原因になりますのでお止め下さい。
- 本来の目的以外では使用しないで下さい。
- 汚れた場合はプレートを取り外して、手洗いをして下さい。漂白剤は使用しないで下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。直射日光には当てず必ず陰干しをして下さい。長時間水に浸さないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- 面ファスナーの付きが弱くなったら買い替えが必要です。

【保守・点検に係る事項】

- 着用前に破れやほつれが無いか確認して下さい。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者】株式会社サクサン
埼玉県川越市砂新田80-38
TEL:049-246-1232

【商品についてのお問い合わせ先】

株式会社オリジナルオファー
愛知県清須市春日須ヶ田85
TEL:052-408-2131