

2023年6月1日作成 (第一版)

取扱説明書

製造販売届出番号:11B3X10017000025


器械器具75 脱疾治療用器具
一般医療機器 脱疾治療用ストラップ 30883000骨盤底筋モレナレディショーツ
(ご使用前に必ずお読み下さい。)

【禁忌・禁止】

骨盤臓器脱(膀胱瘤、子宮脱、直腸脱等)の治療、妊娠中や出産直後で通院中の方は、ご使用前にかかりつけの医師に相談し、医師の指示に従ってご使用下さい。

【形状・構造及び原理等】

(形状)

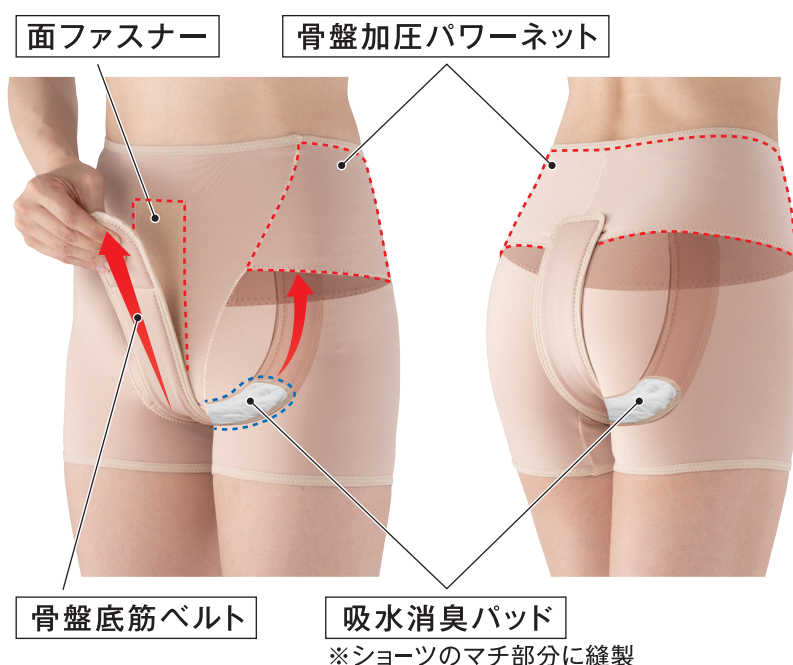

(原理)

本品を着用し、股下の骨盤底筋ベルトをお腹側へ引き上げて面ファスナーで固定。骨盤底筋ベルトが膀胱瘤により下垂した臓器を正常な位置に保持し、症状を改善・予防する。

〈使用目的又は効果〉

下垂した膀胱を正常な位置に保持し、頻尿や尿漏れを伴う膀胱瘤の症状を改善・予防する。

(素材)

本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
バイピング:ナイロン90%、ポリウレタン10%

(適応サイズ)

サイズ	ヒップ
M~L	87~100cm
L~LL	92~105cm
LL~3L	97~110cm

【使用方法】

①本品を素肌に着用します。

②骨盤底筋ベルトを股下に圧が加わるように引き上げながら、お腹側の面ファスナーに貼り付けます。

【使用上の注意】

- 初めのうちは1~2時間程度の短い時間でご使用いただき、痛みやかゆみ等の異常が無いか確認して、徐々に使用時間を長くして下さい。
- 使用中、または使用後に痛みやかゆみ等の異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、専門医にご相談下さい。
- 吸水消臭パッドの一箇所に水分が集中した場合は、ふちや縫い目から漏れ出す恐れがありますのでご注意下さい。
- 本品は女性用です。
- 本来の目的以外では使用しないで下さい。

- お洗濯の際は面ファスナーを貼り付けた状態でネットに入れ、他の物と区別して下さい。漂白剤は使用しないで下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。直射日光には当てず必ず陰干しをして下さい。長時間水に浸さないで下さい。
- 吸水消臭パッド部分は乾きにくいいため、十分に乾燥させてからご使用下さい。



【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- 面ファスナーの付きが弱くなったら買い替えが必要です。

【保守・点検に係る事項】

- 着用前に破れやほつれが無いか確認して下さい。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者】株式会社サクサン
埼玉県川越市砂新田80-38
TEL:049-246-1232

【商品についてのお問い合わせ先】

株式会社オリジナルオファー
愛知県清須市春日須ヶ田85
TEL:052-408-2131
(平日10:00~17:00 土日祝休み)