

「空気—酸素ブレンダー OA2060」の付属品
(F15×M22 ジョイント)

【警告】


- 錆やキズの有る物は使用しないでください [漏れを防止するため]。

【禁忌・禁止】

- 高温、高湿になる場所で使用及び保管をしないでください [サビの発生を防止するため]。
- 薬品をかけないでください [サビの発生を防止するため]。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状 (型式番号)
F15×M22 ジョイント OA0015-12
2. 構成
F15×M22 ジョイント 1 個 添付文書 1 冊
P12 オーリング 1 個
3. 寸法及び重量
重量 48g 寸法 mm
取り付けネジサイズ U9/16 メネジ

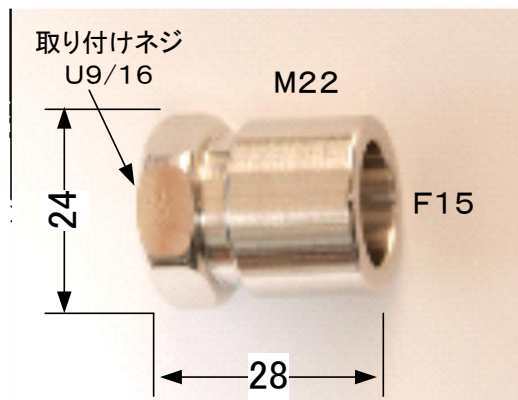

4. 原理

1) ガス供給（接続）

空気—酸素ブレンダー等に附属する流量計出口の接続ネジ (U9/16 オネジ) 部に漏れ止め用パッキンを取り付け、F15×M22 ジョイントの取り付けネジ (U9/16 メネジ) を捻じ込みガスの供給を受けます。

2) ガス出口

内側は F15 メステーパ―です、医療用呼吸回路或いは M15 オスジョイントを差し込んで使用します。外側は M22 オスステーパ―です、医療用呼吸回路或いは医療用 F22 メスジョイントを接続して使用します。

【使用目的】

F15 或いは M22 テーパー部に呼吸回路やジョイントを差し込んで使用します。

【使用方法等】

1. 器機等との接続

- F15 或いは M22 部に呼吸回路を差し込んで接続します。

2. 作動チェック

- 使用する前にリークが無い事を確認してください。

【使用上の注意】

- 使用温度は 5℃～+50℃です
- 空気—酸素ブレンダーや人工呼吸器等のガス出口に取り付け呼吸回路を接続して使用します。壁の供給圧力 (0.4Mpa) では使用できません。
- 供給ガスは清潔な医療用ガスを使用してください。
- 呼吸回路は使用中に回路内圧等で抜ける事のない様にしっかりと差し込んで使用してください。
- ジョイント等は無理に差し込んで使用しないでください、ジョイントが抜けなくなる可能性があります。テーパー部には油分を塗布しないでください、ジョイントが抜け易くなります。
- オートクレーブ滅菌、プラズマ滅菌、EOG 滅菌等が可能です。
- 中性洗剤等を使って外面を清拭してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管温度 -20℃～+60℃
- 相対湿度 10～90%以下 (非結露)
- 本器の使用期間は購入後 7 年です

【保守・点検に係る事項】

- 使用前点検は破損、汚れ、各部の緩み、内部に異物混入等のない事を確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 有限会社サンユーテクノロジー
TEL 048-951-3627
製造業者 有限会社サンユーテクノロジー

販売代理店：