

機械器具 6 呼吸補助器
一般医療機器 空気・酸素混合装置 (JMDN70578000)

「空気-酸素ブレンダー PMB-5000」の附属品 (耐圧管)

【警告】

- オートクレーブやプラズマ滅菌は出来ません[耐圧ホースの劣化を防ぎリークや破裂等を防止するため]。
- 空気/酸素の供給圧力は 0.5MPa 以下で使用してください [耐圧ホースのリークや破裂等を避けるため]。


【禁忌・禁止】

- 直射日光の当たる場所、高温、高湿になる場所で使用及び保管をしないでください[耐圧ホースの劣化を防ぎリークや破裂等を防止するため]。
- 水、薬品をかけないでください[耐圧ホースの劣化を防ぎリークや破裂等を防止するため]。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状 (標準 3 m) (型式番号)
 - ピン式酸素用耐圧管 OA0015 - 02
 - ピン式酸素用耐圧管 (酸素出口酸素用オス) OA0015 - 02 - 01
 - ピン式空気用耐圧管 OA0015 - 03
 - リング式酸素用耐圧管 OA0015 - 04
 - リング式空気用耐圧管 OA0015 - 05通常はピン式或いはリング式の酸素用耐圧管 (緑色) 空気用耐圧管 (黄色) 各 1 本をセット販売です (長さはご指定の長さでの製作が可能です)。
酸素用耐圧管或いは空気用耐圧管を単品で販売する事もあります。
2. 構成
酸素用耐圧管 (緑色) / 空気用耐圧管 (黄色) 各 1 添付文書 1 冊
3. 寸法及び重量
重量 550g (酸素用/空気用セット重量)
長さ各 3 m (標準長さ)

機器との接続用袋ナットです(酸素用オネジも有ります)。誤接続防止のため各々ネジサイズが違います。

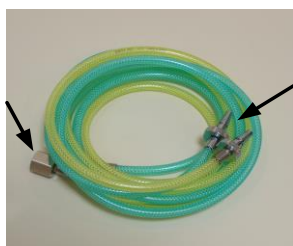

壁或いはシーリングペンダント等にあるガスOUTに押し込み接続します。誤接続防止に各々形状が違います。ピン式とリング式があります。

4. 原理

1) 空気と酸素の供給 (接続)

ガス供給側の接続形式はピン式とリング式が有り各々空気と酸素の誤接続防止のため形状が異なります。施設の壁或いはシーリングペンダント等に設けられているピン式或いはリング式のガス供給口に押し込んで接続しガスの供給を受けます。

2) ガス出口

耐圧管の空気及び酸素の出口は誤接続防止のため各々専用の袋ナット (酸素出口が酸素用オスも有ります) となっ

ています。耐圧管ガス出口の各々の袋ナット (酸素出口がオスの場合も同様に) をスパナ等を用い機器にしっかりと接続してください。

【使用目的】

医療用の酸素ガスと圧縮空気を人工呼吸器或いは空気/酸素ブレンダー等の医療機器に供給します。

【操作方法又は使用方法等】

1. 機器等との接続
 - 耐圧管には空気と酸素の供給を受けるための専用ジョイントが有り誤接続を防いでいます、このジョイントを空気と酸素の接続口に押し込んで接続し、空気と酸素の供給を受けて下さい。
 - 耐圧管ガス出口の其々の袋ナットを機器にしっかりと接続して下さい。
2. 作動チェック
 - 本耐圧管を使用する前にリークが無い事を確認して下さい。

【使用上の注意】

- 使用温度は+5℃～+50℃です。
- 最大流量は 60L/分以下で使用してください。
- 供給ガスは清潔な医療用ガスを使用して下さい。
- EOG 滅菌が可能です。
- 中性洗剤等を使って外面を清拭して下さい、液体が内部に入らない様に注意してください。
- オートクレーブは出来ません、液体に浸さないでください、強い溶剤を含んだクリーナーは使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管温度 -20℃～+60℃
- 相対湿度 10～90%以下 (非結露)
- 本器の耐用期間は購入後 7 年です

【保守、点検に係わる事項】

- 使用前に破損、汚れ、各部の緩み、内部に異物混入がないかチェックし、不具合が有る場合は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 有限会社サンユーテクノロジー
TEL 048-951-3627
製造業者 有限会社サンユーテクノロジー

販売代理店 アイ・エム・アイ株式会社
住所 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-12
TEL 048-988-4411 FAX 048-961-1350