

機械器具 6 呼吸補助器
一般医療機器 空気・酸素混合装置（JMDN70578000）
「空気—酸素ブレンダーOA70」のオプション
（ポールLジョイント）

【警告】

- オートクレーブやプラズマ滅菌はできません【部材の緩みや腐食を避けるため】

【禁忌・禁止】

- 直射日光の当たる場所、高温、高湿になる場所で使用及び保管をしないでください【部材の劣化を防止するため】
- 水、薬品をかけないでください【部材の劣化を防止するため】


【形状・構造及び原理等】

1. 形状 (型式番号)
ポールLジョイント PO70L

2. 構成

ポール用クランプ（Φ11～Φ42）に本体が取り付け、本体側面のガスINジョイント（M22×F15）にガスを供給します（ガスINジョイントは本体の反対側面に付け替える事が出来ます）。
本体底面の酸素用オス（U9/16）からガスの出力となります。

3. 寸法及び重量
300g

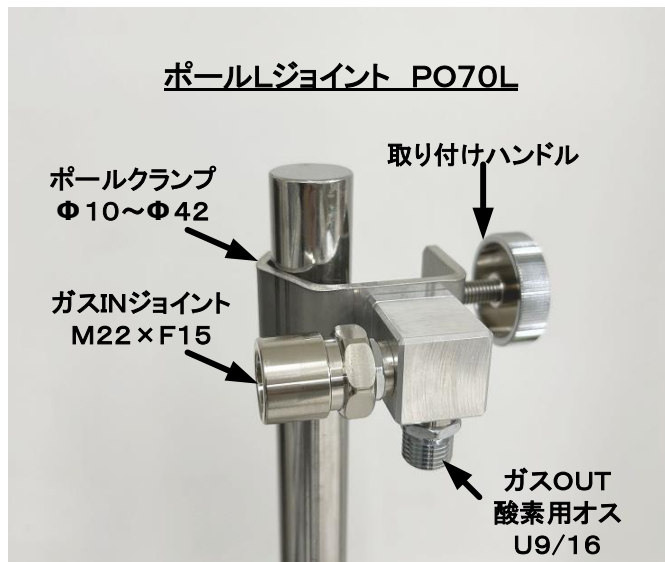

4. 原理

1) 吸気ガスの中継に用います

ポールにポールクランプでLジョイントを取り付け、その後ガスINジョイント（M22×F15）にガス供給用のホースを接続、出口の酸素用オス（U9/16）に回路を接続します。
本器を用いる事で回路が床に這って不潔状態になる事を予防します。

2) ガス入り口及びガス出口

誤接続防止のためガスINは（M22×F15）、ガスOUTは酸素用オス（U9/16）となっています。
接続回路はしっかりと接続してください。

【使用目的又は効果】

呼吸回路に医療用の酸素、空気、或いは両ガスの混合ガスを供給するための中継に用います。本器を用いる事で回路が床に這って不潔状態になる事を予防します。

【使用方法等】

1. 機器等との接続

- ポールクランプでポールに取り付けてください。
- ガスの供給を受けるための22×F15ジョイントにガスの供給を受けてください。
- ガス出力の酸素オス（U9/16）に回路を接続してください

2. 作動チェック

- 使用する前にリークが無い事を確認してください。

【使用上の注意】

- 使用温度は+15℃～+35℃です。
- 最大流量は100L/分以下で使用してください。
- 供給ガスは清潔な医療用ガスを使用してください。
- EOG滅菌が可能です。
- 中性洗剤等を使って外面を清拭してください、液体が内部に入らない様に注意してください。
- オートクレーブは出来ません、液体に浸さないでください。強い溶剤を含んだクリーナー、消毒液は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管温度 -20℃～+60℃
- 相対湿度 10～90%以下（非結露）
- 本器の使用期限は購入後7年です

【保守・点検に係る事項】

- 使用前に破損、汚れ、各部の緩み、内部に異物混入が無いチェックし、不具合が有る場合は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 有限会社サンユーテクノロジー
TEL 048-951-3627
製造業者 有限会社サンユーテクノロジー

販売代理店：